


Die beabsichtigte Verwendung

JT003 Baby Ear Thermometer misst Infrarot-Energie durch die eardrumn umgebenden Gewebe.

Allgemeine Kenntnisse der Körpertemperatur

Die menschliche Kern-Temperatur ist die Temperatur des Blutes im Herzen und im Gehirn. Es gibt einige Aufstellungsorte, die direkt gemessen werden konnten, Trommelfell, Oral, axillaris etc.

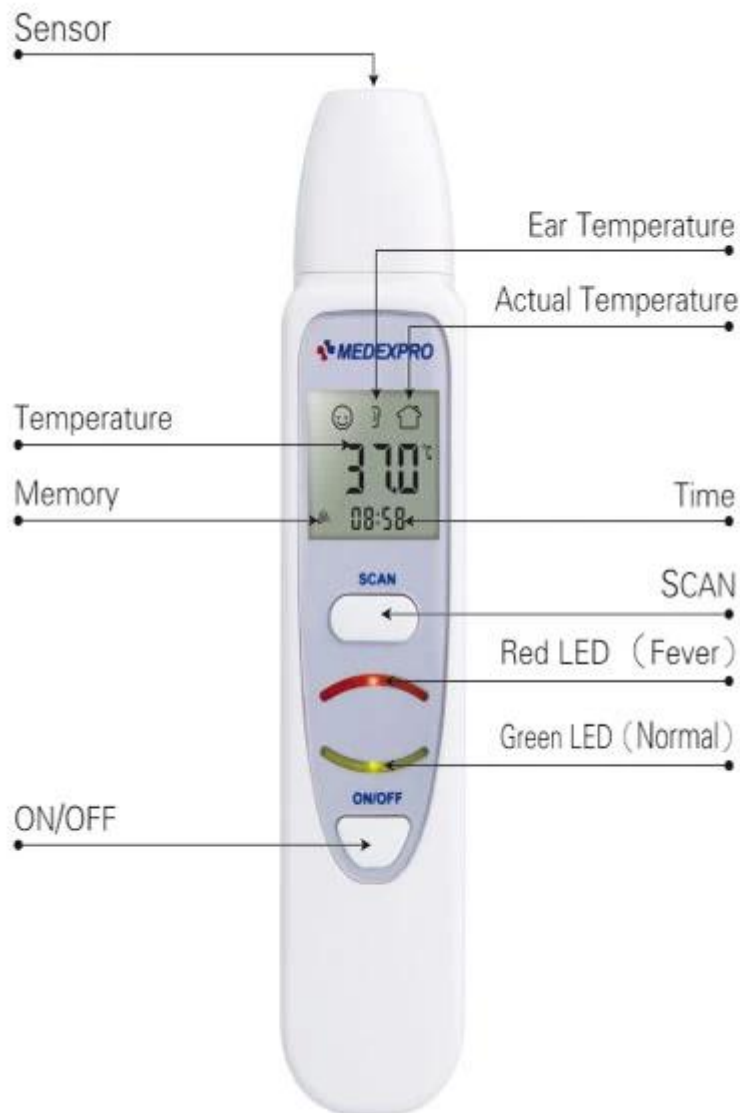

Wie kann man die Temperatur messen?

1. Bitte nehmen Sie die Abdeckung des Sensors vor der Messung der Temperatur des Ohr. Wenn Schmutz auf Sensor, Bitte reinigen Sie es mit einem Baumwoll-Swap oder weiches Tuch mit 95% Alkohol feuchten.



2. im Mess-Modus ist die Temperatur der Umwelt immer auf dem LCD-Display.



3, die Ohr-Temperatur haben automatische Messung Funktion. Wenn es in das Ohr, eine genaue Temperaturmessung mit "BI" Stimme getroffen wurde, wird grüne LED bedeutet, dass alles in Ordnung ist. Wenn Lesung höher ist als 38 ° c, wird rote LED bedeutet, das Baby ist Fieber.



4. das Ohr-Thermometer wird in den Standby-Modus ohne Auslöser innerhalb von 1 Minute nach der Messung. Drücken Sie "ein/aus"-Taste, alle Symbole werden auf dem LCD-Display und wird Mess-Modus.



Vorsicht:

Zerlegen oder reparieren Sie das Thermometer nicht selbst.

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe des Thermometers.

Bitte achten Sie auf die Batterie Polar, wenn Sie die Batterien austauschen.

Entfernen Sie die Batterie, wenn das Thermometer nicht für 3 Monate oder mehr verwendet wird.