


El uso previsto

El termómetro del oído del bebé de JT003 mide energía infrarroja por los tejidos circundantes del tímpano.

Conocimiento general de la temperatura corporal

La temperatura del núcleo humano es la temperatura de la sangre en el corazón y el cerebro. Hay algunos sitios que se podrían medir directamente, tímpano, oral, rectal, axilar, etc

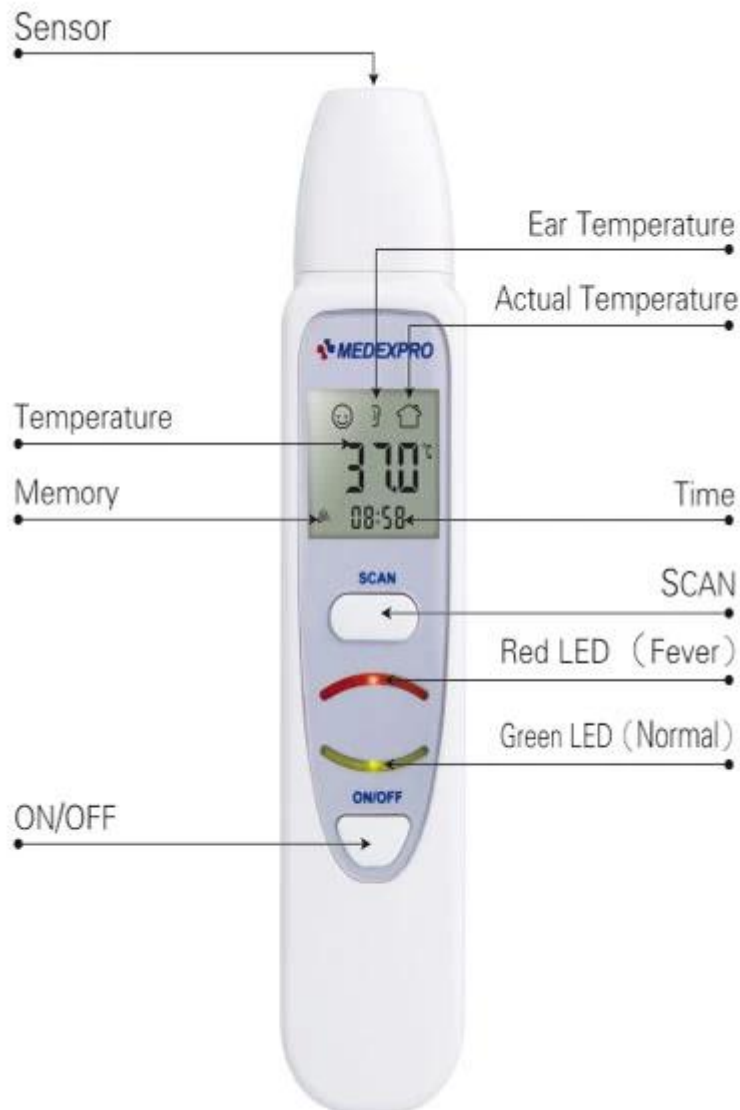

¿Cómo medir la temperatura?

1, por favor quite la cubierta del sensor antes de medir la temperatura del oído. Si tiene suciedad en el sensor, por favor límpiela con un algodón de intercambio o un paño suave humedecido con 95% de alcohol.



2, en el modo de medición, la temperatura ambiente está siempre en la pantalla LCD.



3, la temperatura del oído tienen función automática de la medida. Cuando se coloca en el oído, una medición exacta de la temperatura se ha tomado con la voz "BI", LED verde será el significado de todo está bien. Cuando la lectura es más alta que 38 °C, el LED rojo significará que el bebé es fiebre.



4, el termómetro del oído estará en modo de espera sin ningún disparador en el plazo de 1 minuto después de la medida. Pulse la tecla "ON/OFF", todos los símbolos estarán en la pantalla LCD y será el modo de medición.



PRECAUCIÓN:

No desarme ni repare el termómetro por sí mismo.

No utilice el teléfono móvil cerca del termómetro.

Por favor preste atención a la batería polar cuando reemplace las baterías.

Retire la batería cuando el termómetro no se usará durante 3 meses o más.