


## L'utilisation prévue

JT003 thermomètre d'oreille de bébé mesure l'énergie infrarouge par les tissus environnants du tympan.

## Connaissance générale de la température corporelle

La température humaine est la température du sang dans le cœur et le cerveau. Il y a quelques sites qui pourraient être mesurés directement, tympan, oral, rectal, axillaire etc.

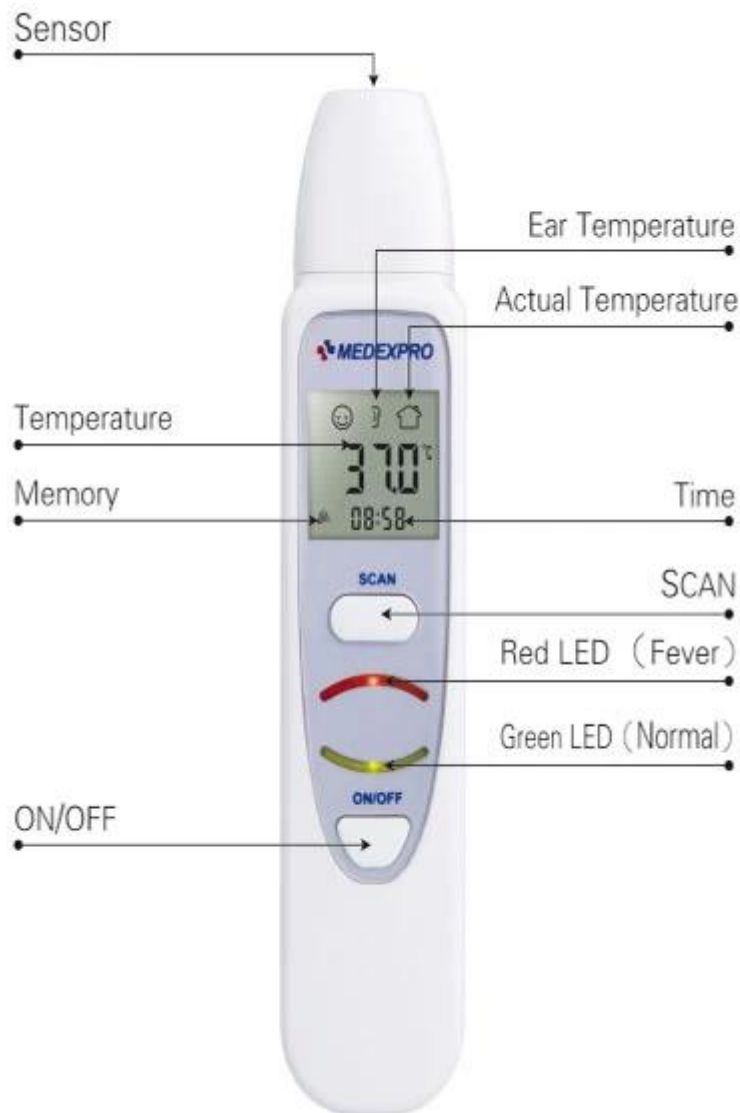

## Comment mesurer la température?

1, s'il vous plaît enlever le couvercle du capteur avant de mesurer la température de l'oreille. Si vous avez de la saleté sur le capteur, s'il vous plaît nettoyer avec un swab de coton ou un chiffon doux humidifié avec 95% d'alcool.



2, au mode de mesure, la température ambiante est toujours sur l'affichage à cristaux liquides.



3, la température de l'oreille ont la fonction de mesure automatique. Quand il place dans l'oreille, une mesure de température précise a été prise avec "bi" voix, LED verte sera signifiant que tout va bien. Lorsque la lecture est supérieure à 38 °C, LED rouge sera la signification du bébé est la fièvre.



4, le thermomètre auriculaire sera en mode veille sans déclenchement dans un délai de 1 minute après la mesure. Appuyez sur la touche "on/off", tous les symboles seront sur l'afficheur LCD et seront en mode de mesure.



## Attention:

Ne pas démonter ou réparer le thermomètre par soi-même.

N'utilisez pas le téléphone portable près du thermomètre.

S'il vous plaît prêter attention à la batterie polaire lors du remplacement des piles.

Retirez la pile lorsque le thermomètre ne sera pas utilisé pendant 3 mois ou plus.