

Функции:

Гигантский ЖК-дисплей

Точность: $\pm 0,05$ °C ($\pm 0,1$ °F)

Температура

Память о последнем чтении

Жесткий Совет

Индикатор низкого заряда батареи

Автоматический выключен

Предназначен для использования в устной форме




Инструкции пользователя:

Шаг 1. Нажмите кнопку "вкл/выкл" рядом с ЖК-дисплеем. Тон будет звучать как экран, за которым следует последняя температура памяти.

После демонстрации температуры самопроверки термометр теперь находится в режиме тестирования.

* Примечание: если измеренная температура составляет менее 32 °C или 90 °F, на ЖКИ мониторе отображается Lo, если измеренная температура превышает 42,9 °C или 109,9 °F, на ЖКИ мониторе будет отображаться Hi.

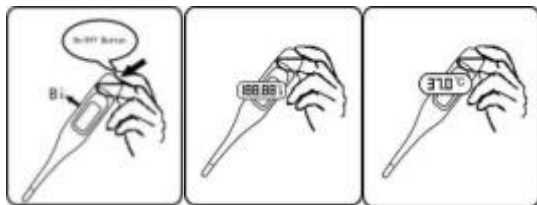


Степ2. Положение термометра в нужном месте (Маус)

а) устное использование: поместите термометр на язык, как указано в позиции "v". Закрой рот и дыши ровно через нос, чтобы предотвратить влияние на измерение с помощью вдыхаемого/выдыхаемого воздуха. Нормальная температура между 35,7 °C и 37,3 °C (96,3 °F и 99,1 °F)

Степ3.

На протяжении всего процесса тестирования выносится знак степени. При мигающих остановках сигнализация будет сигнализировать примерно 10 секунд. Измеренное считывание будет отображаться на ЖКИ мониторе одновременно. Минимальное время измерения до тех пор, пока сигнал сигнала (гудок) не должен быть сохранен без исключения. Измерение продолжается даже после уведомления об этом. Отображаемая температура не изменится при удалении термометра из его позиции тестирования.

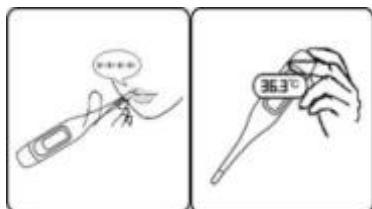

Степ4.

Чтобы продлить время работы батареи, нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы выключить устройство после завершения тестирования. Если никакие действия не принимаются, единица измерения будет автоматически отключена после аранд10 минут. Храните термометр в его чехле.

