


Zamýšlené použití

JT003 Baby Ear teploměr měří infračervenou energii eardrumn okolní tkáně.

Obecná znalost tělesné teploty

Lidské jádro teplota je teplota krve v srdci a mozku. Tam jsou některé stránky, které by mohly být měřeny přímo, ušní bubínek, ústní, rektální, axilární atd.

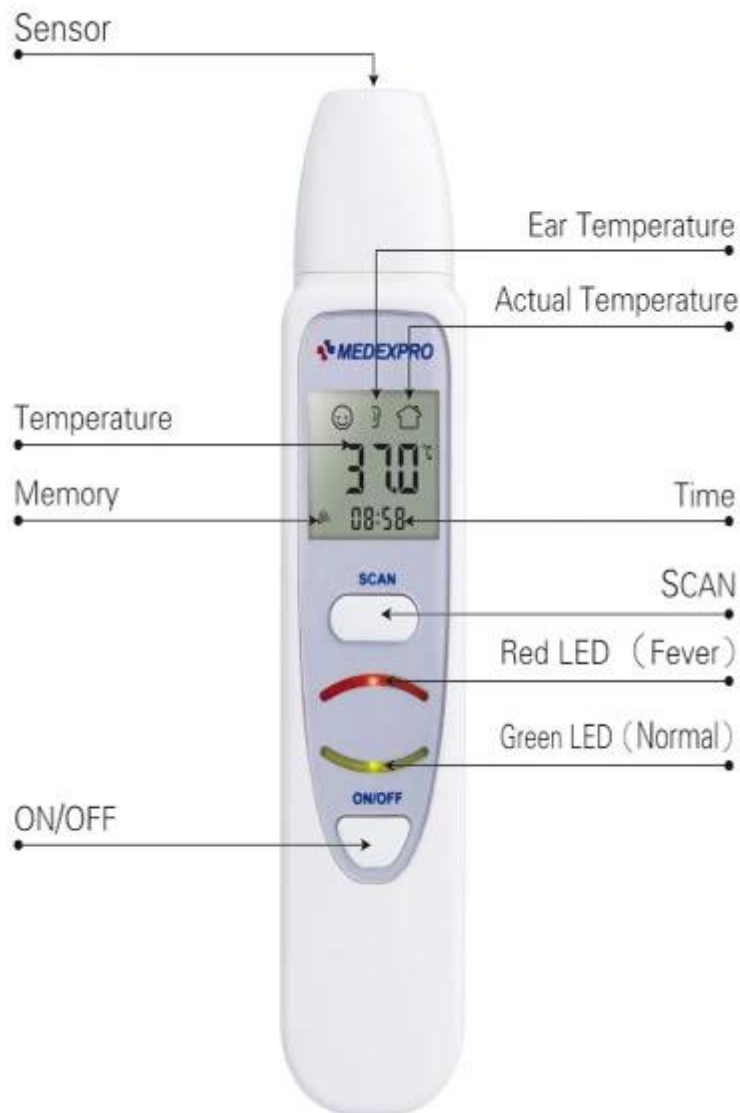

Jak měřit teplotu?

1 ☐ prosím sundat kryt senzoru před měřením teploty ucha. Pokud máte nečistoty na čidle, prosím vyčistěte ji s bavlněným swapem nebo měkkým hadříkem navlhčeným s 95% alkoholu.



2 □ v režimu měření je teplota prostředí vždy na LCD displeji.



3, teplota ucha mají automatické měření funkce. Při umístění do ucha, přesné měření teploty byla přijata s "BI" hlas, zelená LED bude znamenat, všechno je v pořádku. Při čtení je vyšší než 38 °C, červená LED bude znamenat, že dítě je horečka.



4 □ ušní teploměr bude do pohotovostního režimu bez jakékoli spouště do 1 minuty po měření. Stiskněte tlačítko "on/off", všechny symboly budou na LCD displeji a budou měřit režim.



Pozor:

Teploměr nerozebírejte ani neopravujte sami.

Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti teploměru.

Při výměně baterií věnujte pozornost polaritě baterie.

Pokud teploměr nebudete používat po dobu 3 měsíců nebo déle, vyjměte baterii.