


L'uso previsto

JT003 baby Ear termometro misura l'energia a infrarossi dai tessuti circostanti timpano.

Conoscenza generale della temperatura corporea

La temperatura del nucleo umano è la temperatura del sangue nel cuore e nel cervello. Ci sono alcuni luoghi che potrebbero essere misurati direttamente, timpano, orale, rettale, ascellare ecc.

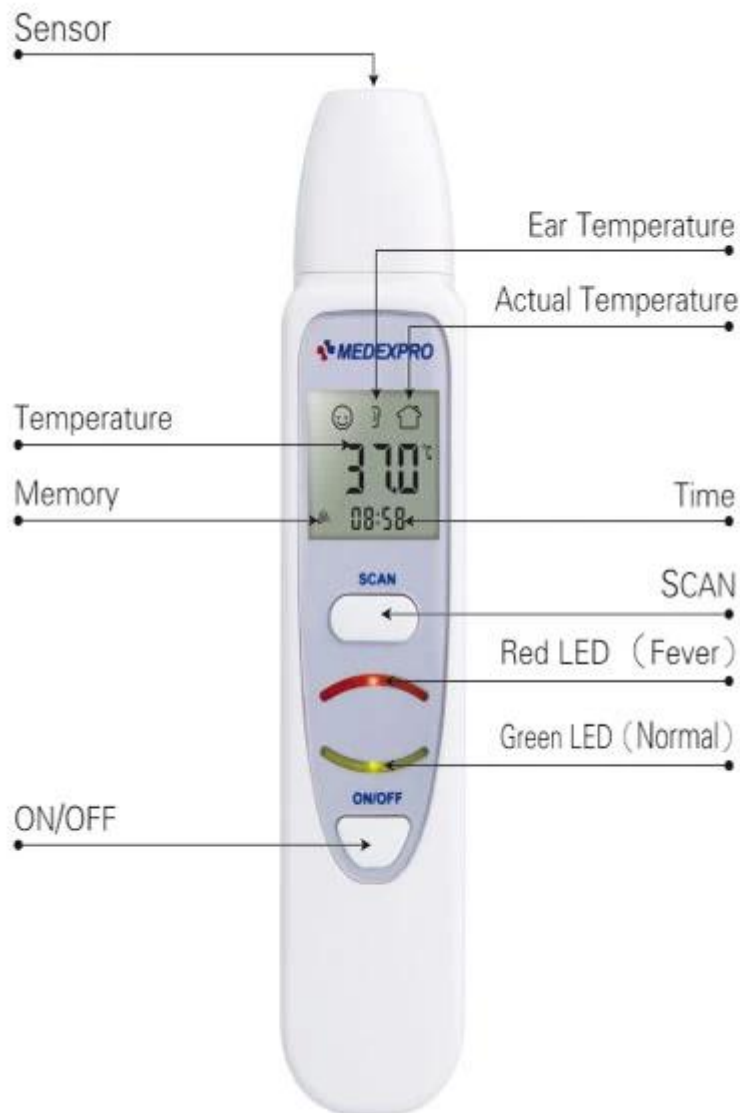

Come misurare per la temperatura?

1 □ si prega di togliere il coperchio del sensore prima di misurare la temperatura dell'orecchio. Se si dispone di sporcizia sul sensore, pulirla con un batuffolo di cotone o un panno morbido inumidito con 95% di alcool.



2 □ in modalità di misurazione, la temperatura ambiente è sempre sul display LCD.



3 □ la temperatura dell'orecchio ha funzione di misurazione automatica. Quando lo mettete nell'orecchio, una misura di temperatura esatta è stata presa con la voce "bi", LED verde sarà significato tutto va bene. Quando la lettura è superiore a 38 °C, LED rosso sarà significato il bambino è la febbre.



4 □ il termometro auricolare sarà in modalità standby senza alcun trigger entro 1 minuto dalla misurazione. Premere il tasto "on/off", tutti i simboli saranno sul display LCD e sarà la modalità di misurazione.



Attenzione:

Non smontare o riparare il termometro da soli.

Non usare il cellulare vicino al termometro.

Prestare attenzione alla batteria Polar quando si sostituiscono le batterie.

Rimuovere la batteria quando il termometro non viene utilizzato per 3 mesi o più.