


Termometro frontale a infrarossi per carrozzeria, fornitore all'ingrosso Cina [termometro](#).



Introduction of advanced probes. Exquisite process measurement is more accurate.



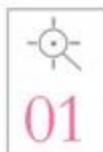

A second rapid temperature measurement.  
No longer need 5 minutes to take temperature, quick and easy.  
Introduction of advanced probe technology, the exquisite craft a second automatic scanning 8 times, a second rapid temperature measurement, the baby does not cry no, the measurement of temperature is more convenient and quick.

<p>闭合</p>  <p>开启</p>  <p>00:00:01</p> <p>时 分 秒</p> <p>1秒钟</p>	<p>普通体温计</p>  <p>00:05:00</p> <p>时 分 秒</p> <p>5分钟</p>
---	--



Collect skin spontaneous infrared, the machine itself does not emit.  
Radiation, no radiation.  
When measuring the temperature, the sensor collects infrared measurements from the forehead, and the machine itself does not emit any radiation.  
The error value is not exceeded.



## modalità di misurazione della temperatura sulla fronte

1. Premere il tasto ON per iniziare, quando viene visualizzato "---", è pronto per misurare. Quando il display LCD mostra "Body" significa che entra in modalità misurazione fronte, premere brevemente il tasto ON e può misurare direttamente, e mostra la temperatura target attuale.

2. Premere il tasto SETTING per modificare la modalità (Corpo, Superficie, Stanza).

3) Premere il tasto SU / GIÙ per oltre 2 secondi per accedere alla modalità memoria.

### 2. Modalità di misurazione della temperatura della superficie

1) Premere il tasto ON per iniziare, quando visualizza "----", è pronto per misurare.

2) Premere il tasto SETTING per impostare la modalità di misurazione su "Surface", significa che entra in modalità di misurazione della temperatura della superficie.

3) Premere il tasto ON e può misurare direttamente e visualizzare la temperatura target attuale.

4) Premere il tasto SETTING per modificare la modalità (Corpo, Superficie, Stanza).

5) Premere e tenere premuto il tasto SETTING per accedere alla modalità di impostazione del sistema.

6) Premere il tasto SU / GIÙ per due secondi per accedere alla modalità memoria.

### 3. Modalità di misurazione della temperatura della camera

1) Premere il tasto ON per iniziare, quando visualizza "----", è pronto per misurare.

2) Premere il tasto SETTING per cambiare la modalità di misurazione per visualizzare "Room".

Significa che entra nella modalità di misurazione della temperatura della stanza. Il display LCD visualizza direttamente la temperatura ambiente. (Si consiglia di conservare il dispositivo per più di 30 minuti nell'ambiente corrente)

3) Premere rapidamente il tasto ON non è valido.

4) Premere il tasto SETTING per cambiare la modalità (Body, Surface, Room)

5) Premere e tenere premuto il tasto SETTING per accedere alla modalità di impostazione del sistema.

6) Premere il tasto SU / GIÙ per oltre 2 secondi per accedere alla modalità memoria.

### 4. Modalità impostazioni di sistema:

1) Premere il tasto ON per iniziare, quando visualizza "----", è pronto per misurare.

2) Premere il tasto SETTING per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione del sistema.

3) Quando il display LCD visualizza "F-1", premere il tasto SU / GIÙ per commutare l'unità "C / F".

4) Premere il tasto SETTING per entrare in "F-2". Dopo 1 secondo, quando il display LCD mostra "0.0", significa che è impostata la deviazione della temperatura (-5.0 ~ + 5.0). Premere il tasto SU / GIÙ, è possibile aggiungere e sottrarre la temperatura misurata (Corpo, Superficie).

5) Premere il sistema di tasti SETTING per accedere a "F-3", dopo 1 secondo, quando visualizza "1" o "0", significa che l'interruttore del suono è impostato. Premere il tasto SU / GIÙ per cambiare l'interruttore (1: ON, 0: OFF).

6) Premere il tasto SETTING per salvare le impostazioni e quindi spegnere.

7) Nella modalità di impostazione, premere il tasto ON, il dispositivo tornerà alla modalità di misurazione, quando visualizzerà "---", è pronto per misurare.

### 5. Modalità memoria:

1) Premere il tasto ON per iniziare, quando visualizza "----", è pronto per misurare.

2) Premere il tasto SU / GIÙ per oltre 2 secondi per accedere alla modalità memoria.

3) Il display LCD mostrerà il "numero di gruppo" dell'ultima memoria misurata, e dopo 1 secondo

mostrerà la "memoria digitale".

4) Premere il tasto SU / GIÙ, si vedrà l'ultimo o il successivo "numero di gruppo" e la "memoria digitale", se appare "Clr", significa che non ha più record.

5) In modalità memoria, premere il tasto ON, il sistema tornerà alla modalità di misurazione, quando visualizzerà "----", è pronto per misurare.