


O uso pretendido

O termômetro de orelha do bebê de JT003 mede a energia infravermelha pelos tecidos circunvizinhos do tímpano.

Conhecimento geral da temperatura corporal

A temperatura do núcleo humano é a temperatura do sangue no coração e no cérebro. Há alguns locais que poderiam ser medidos diretamente, tímpano, oral, reto, axilar etc.

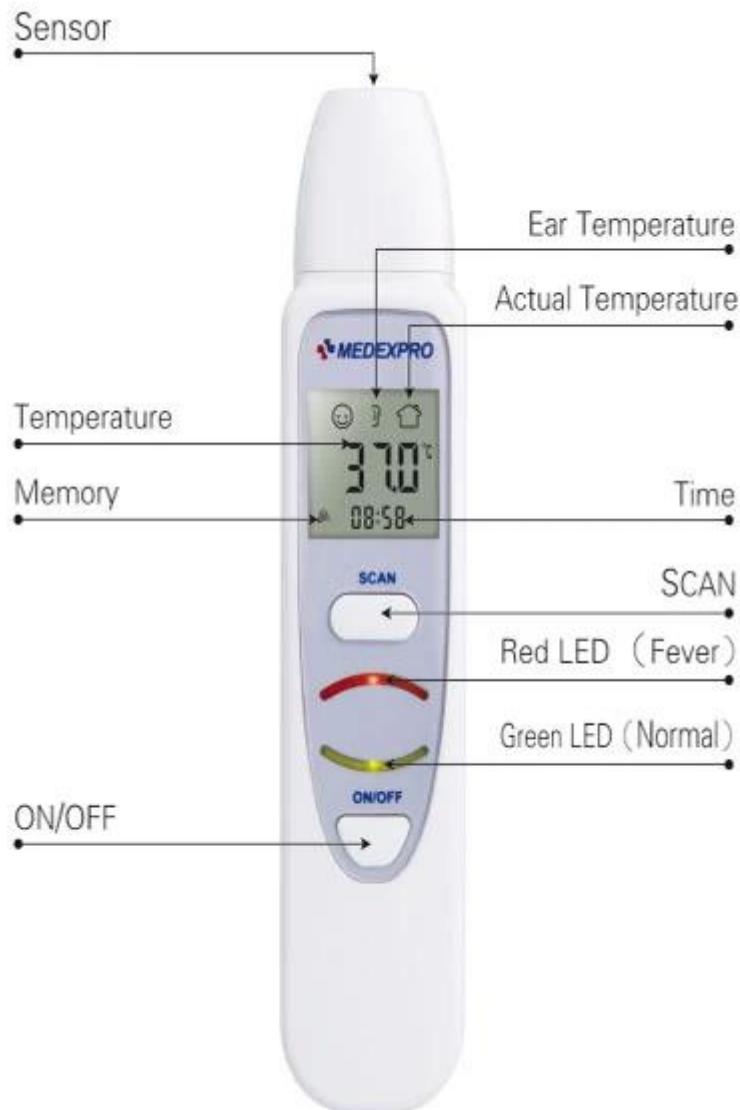

Como medir a temperatura?

1 ☐ por favor, tire a tampa do sensor antes de medir a temperatura da orelha. Se tiver sujeira no sensor, por favor limpe-o com uma permuta de algodão ou pano macio umedecido com 95% de álcool.



2 □ no modo de medição, temperatura ambiente está sempre no display LCD.



3 □ a temperatura da orelha tem a função automática da medida. Quando coloc o na orelha, uma medida exata da temperatura foi tomada com a voz do "bi", o diodo emissor de luz verde estará significando que tudo está bem. Quando a leitura é mais elevada do que 38 °C, o diodo emissor de luz vermelho será significado o bebê é febre.



4 □ o termômetro da orelha estará no modo de espera sem nenhum acionador dentro de 1 minuto após a medida. Pressione a tecla "on/off", todos os símbolos estarão no visor LCD e estarão medindo o modo.



Cuidado:

Não desmonte nem conserte o termômetro sozinho.

Não use o telefone móvel perto do termômetro.

Por favor, preste atenção para a bateria polar quando substituir as baterias.

Remova a bateria quando o termômetro não será usado por 3 meses ou mais.