


Предполагаемое использование

Жт003 термометр для ребенка измеряет инфракрасную энергию еardрумн окружающими тканями.

Общие сведения о температуре тела

Температура ядра человека-это температура крови в сердце и мозге. Имеются некоторые участки, которые могут быть измерены непосредственно, барабанное, устное, прямой кишки, аксиллари и т. д.

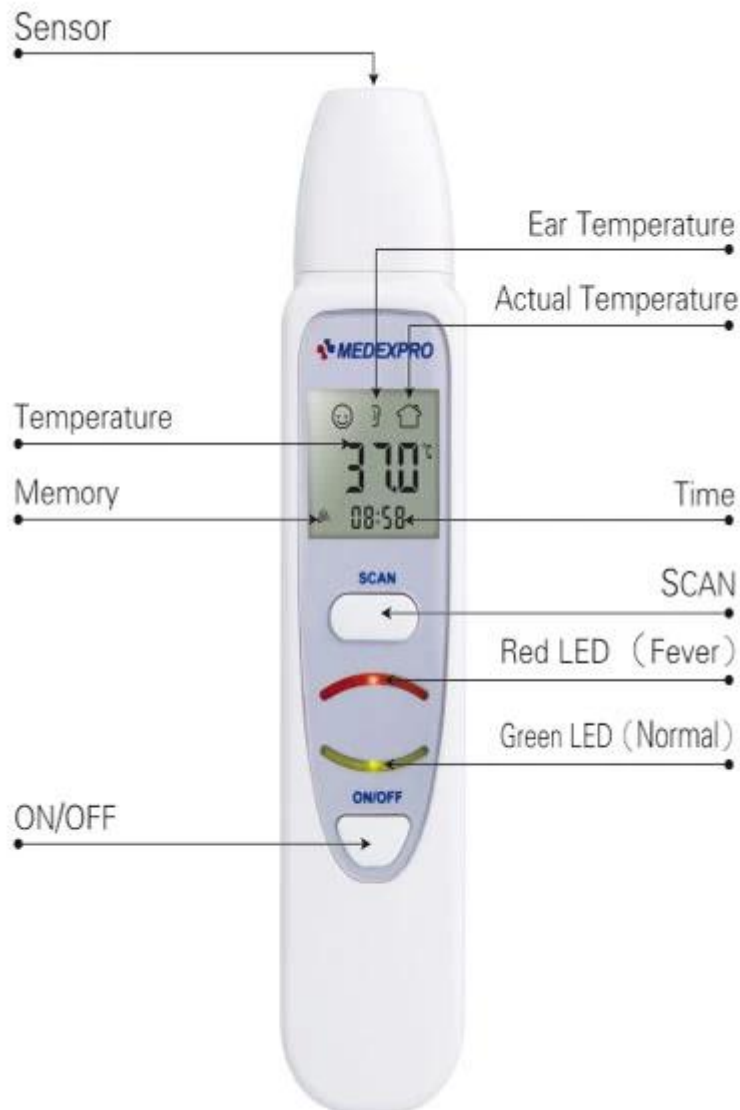

Как измерять температуру?

1 □ Пожалуйста, снимите крышку сенсора, прежде чем измерять температуру уха. Если на сенсоре есть грязь, пожалуйста, очистите его с помощью хлопка или мягкой ткани, моистенед с 95% алкоголя.



2 □ в режиме измерения температура окружающей среды всегда находится на ЖК-дисплее.



3 □ Температура уха имеет функцию автоматического измерения. При помещении его в ухо, точное измерение температуры было принято с голосом "ВІ", зеленый светодиод означает, что все в порядке. При чтении выше 38 °С, красный светодиод будет означать, что у ребенка жар.



4 □ термометр для уха будет находиться в ждущем режиме без какого-либо триггера в течение 1 минуты после измерения. Нажмите клавишу «вкл/выкл», все символы будут отображаться на ЖК-дисплее и будут использоваться в режиме измерения.



Осторожно:

Не разбирайте и не исправьте термометр сам.

Не используйте мобильный телефон возле термометра.

При замене батарей следует обратить внимание на полярную батарею.

Удалите батарею, если термометр не будет использоваться в течение трех месяцев или более.