


## Amaçlanan kullanım

JT003 bebek kulak termometresi, eardrumu çevreleyen dokularda kızılötesi enerji ölçer.

## Vücut ısısının genel bilgisi

İnsan çekirdeği sıcaklığı kalp ve beyindeki kanın sıcaklığıdır. Orada doğrudan ölçülebilir bazı siteler vardır, kulak zarı, sözlü, rektal, koltukaltı vb.

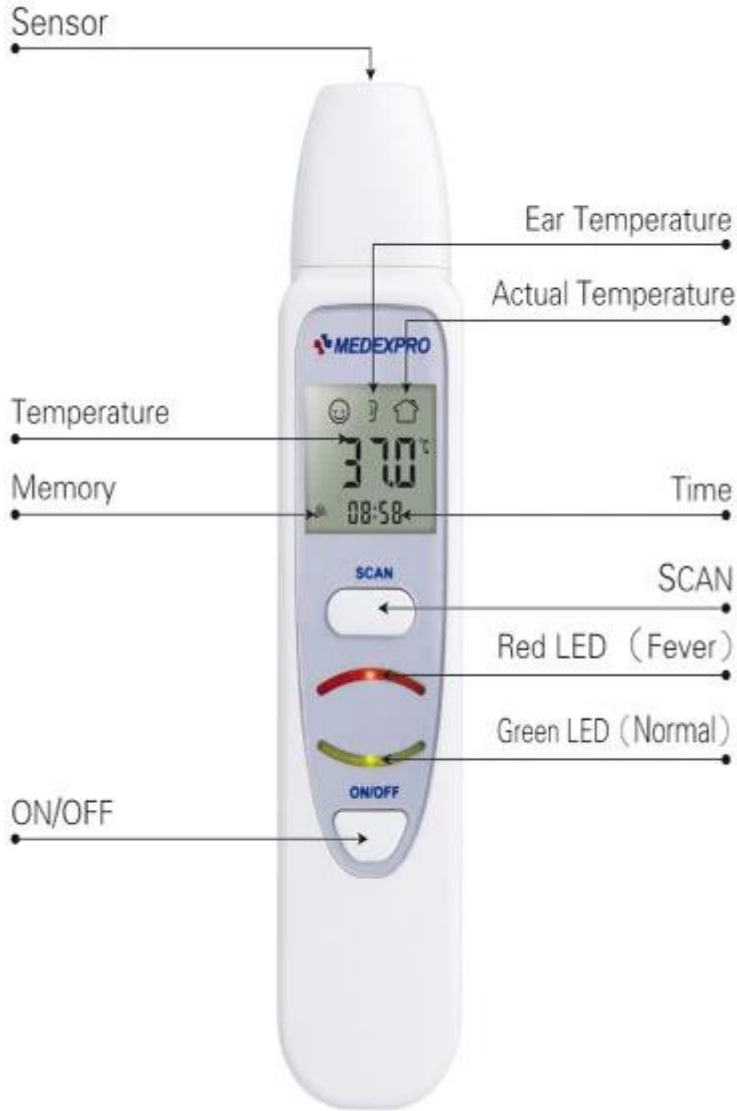

## Nasıl sıcaklık ölçmek için?

1 □ lütfen kulak sıcaklığını ölçmeden önce sensör kapağını çıkarın. Eğer sensör üzerinde kir varsa, 95% alkol ile nemlendirilmiş bir pamuk Swap veya yumuşak bez ile temizleyin.



2 □ Ölçüm modunda, ortam sıcaklığı her zaman LCD ekrandadır.



3 □ kulak sıcaklığı otomatik ölçüm fonksiyonuna sahiptir. Kulak içine yerleştirin, doğru bir sıcaklık ölçümü "bi" sesi ile çekilmiştir, yeşil LED her şey yolunda olacak. Okuma 38 °C daha yüksek olduğunda, kırmızı LED bebeğin ateş olduğu anlamına gelir.



4 □ kulak termometresi, ölçümden sonra 1 dakika içinde herhangi bir tetikleyici olmaksızın bekleme moduna geçer. "on/off" tuşuna basarak, tüm semboller LCD ekranda olacak ve ölçüm modu olacaktır.



**Dikkat:**

Sökmeyin veya termometre kendiniz tamir etmeyin.  
Cep telefonunu termometrenin yakınında kullanmayın.  
Pillerin yerini alırken lütfen pilin dikkatini verin.  
Termometre 3 ay veya daha fazla kullanılmaması durumunda pili çıkarın.