

ترمومتر الجبين الاشعه تحت الحمراء للجسم والكائنات ودرجه الحرارة المحيطة

القياس الثاني 1



ترمومتر ، أضافه إلى انها الاعتمادية ، والدقة ، وسهولة المناولة ، ويسمح لطيف وغير الغازية قياس درجة حرارة الجسم JT004 فان دون لمس المريض.


1 ثانيه

.قياس سريع ولطيف في 3 ثوان فقط.

3 in 1

متعدد الوظائف

قياس الجين والكائنات ودرجة الحرارة المحيطة في ثوان

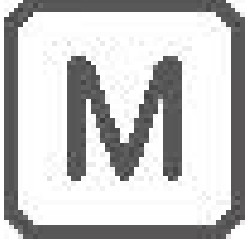

ذاكره البيانات 30

التخزين التلقائي لأخر 30 قيم قياس مع التاريخ والوقت



مواصفات:

القياس الخالي من اللمس في ثانيه واحده فقط.

متعددة الوظائف (الجسم والجسم ودرجة الحرارة المحيطة)
تتبع الضوء--لسهولة الاستخدام أيضا في الليل

اختبار سريريا واوصي بها الأطباء
الوهج الصامت™ التكنولوجيا والإنذار الحمى

شاشة مضيئه كبيره مع التاريخ والوقت
30 ذاكره البيانات (مخزنه مع التاريخ/الوقت)


التحكم الصوتي (تشغيل/إيقاف)
اختياري: حاله تخزين أو حقيبة تخزين

دفاع. No: NC 150
مم 141.1 x 43.3 x 36.9 الحجم :
الوزن: 90 غ (مع البطارية) ، 67 غرام (ت/س البطارية)
°c نطاق القياس: 0-100.0
دقه القياس: ± 0.2 درجة مئوية بين 36.0 و 39.0 درجة مئوية
AAA بطاريات قلوية ، الحجم V البطارية: 1.5×2

تعليمات المستخدم:

الخطوة الاولى:

يمكنك ضغط زر الوضع للتبديل بين وضع الجبهة ووضع الكائن. اضغط علي زر الطاقة أو زر أبدا ، بعد عرض الشاشة الكاملة ، Er2 أو Er1 وترمومتر جاهز الآن للقياس الجديد. إذا كان هناك غير طبيعي ، يظهر

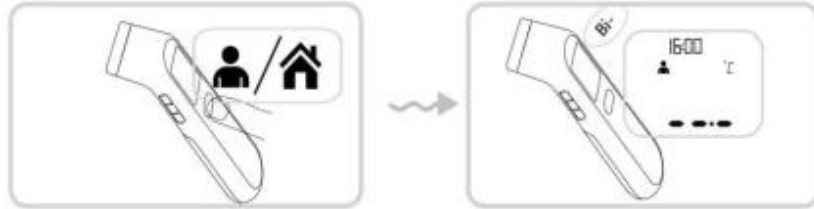

الخطوة 2:

الشريان الصدغي متصل بالقلب عبر الشريان السباتي لذلك تم تصميمه لقياس سطح الجلد حول الشريان الصدغي ، والشريان الرئيسي للراس. الهدف من ترمومتر في وسط الجبين مع مسافة من 2 إلى 3 سم ثم اضغط علي زر أبدا. ملاحظه: لا تزيل ترمومتر من الجبين قبل سماع الصفارة النهائية.



الخطوة 3

قراءة درجة الحرارة علي الشاشة.

1. إذا كانت درجة الحرارة القراءة اقل من 37.8°C (100.0°F) ، سيتم عرض وجه سعيد بجوار القراءة.
2. إذا كانت درجة الحرارة القراءة 37.8°C (100.0°F) أو اعلي ، سيتم عرض وجه سيئ بجوار القراءة



الخطوة 4

لأطاله عمر البطارية ، اضغط علي زر الطاقة لإيقاف تشغيل الوحدة بعد اكتمال الاختبار. في حالة عدم اتخاذ اي اجراء ، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيا بعد حوالي 1 دقيقة.
خزن ميزان الحرارة في قضيته الحمايية