


التراب الشعبي الجديد غير المنسوج **قناع** ضبط التنفس الاصطناعي رئيس **قناع** قابل للتنفس والمنضدة.

قناع من تصميم ثلاثي الابعاد وفقا لمحيط الوجه ، تجنب الاحتكاك بالفم والثنية. يتم تحسين مقطع الأنف مع اي تصميم الشكل **أقنعه** مجموعته كامله من الأداء الختم. كفاءه المواد مرشح المستوردة تحسين كبير تأثير الحماية. مناسبه لحماية الجهاز التنفسي الجسيمات ، مثل: الغبار والمسحوق المعدني ، لا يمكن استخدامها للحماية من الغاز الضار.



:

تصميم ستيريو هندسه الجسم البشري 3
الانسجه غير المنسوجه متعددة الطبقات والمخلوطة ، مجموع 4 طبقات
حزام ألومنيوم عقد الشكل

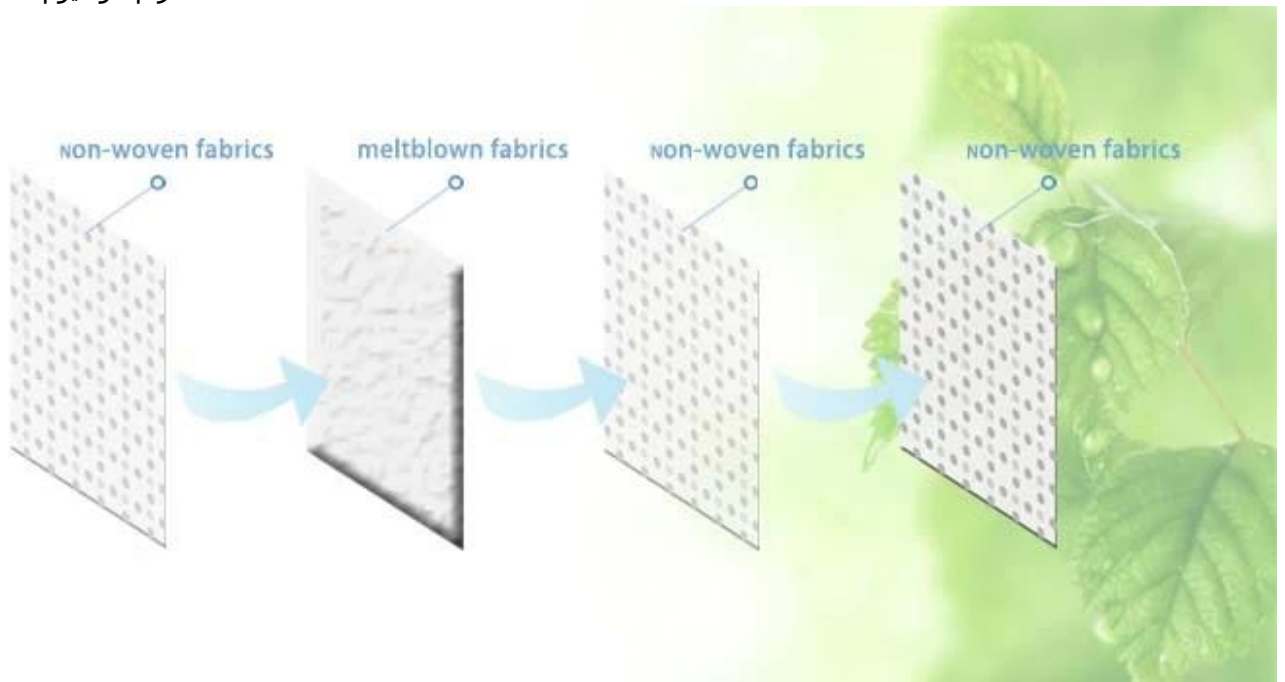

النطاق المنطبق

ويمكن استخدام أقنعه لحماية الجزيئات غير الزيتية ، والحد من رائحة بعض المركبات اوغائيتش. ليس فقط في الوقت المناسب لعزل البكتيريا ، والغبار في الهواء ، والضباب ، ويمكن تحسين حماية الجهاز التنفسي ، وبشره الوجه. الجسيمات غير الزيتية: الغبار (الممتلكات المعدنية ، غبار ألياف المعدنية الغبار) حبوب اللقاح والضباب ، والتي يمكن استخدامها لحماية PM 2.5 البيئة تلوث الهواء الجسيمات غرامه

لا يمكن ان تكون مناسبة ل:

ولا تنتج أجهزه التنفس الأوكسجين ، وليس في بيئة تفتقر إلى الأوكسجين.

الحرب:

هذا التنفس يساعد علي حماية ضد جزيئات معينه ، وسوء الاستخدام يمكن ان يؤدي إلى المرض أو الموت.



خطوات الاستخدام

- الخطوة 1: حدد الصحيح **تنفيس** الحجم الذي كنت تجهزه.
- الخطوة 2: وضع النخيل من خلال الحلقات من جهاز التنفس الخاص بك وكاس علي وجهك.
- الخطوة 3: وضع جهاز التنفس لتغطيه الأنف والاذن.
- الخطوة 4: مع يد واحده عقد جهاز التنفس الاصطناعي ، واستخدام اليد الأخرى لوضع الحزام الأول علي تاج الراس (فوق أذان) ، ثم وضع حزام الثاني علي الجزء الخلفي من الرقبة.
- خطوه 5: باستخدام اصبعين من كلتا اليدين ، اضغط علي قطعه معدنيه وفقا لكفاف جسر الأنف الخاص. (لا قرصه قطعه معدنيه!)
- الخطوة 6: مع كل من اليدين علي جهاز التنفس الاصطناعي ، والزفير بقوة للتحقق من وجود تسرب حوله.
- الخطوة 7: التسرب واضح عندما شعرك يتحرك خلال الزفير قويه. إذا كان يرتدي نظارات ، والسحب من النظارات تشير إلى التسرب.
- خطوه 8: إذا لوحظ تسرب الهواء ، وضبط التنفس الاصطناعي ، والاشرطه ، وقطعه الأنف قبل الاختبار مره أخرى.



لأزاله جهاز التنفس:

- خطوه 1: مع كلا اليدين ، ورفع ببطء الحزام السفلي من حول رقبتك صعودا وفوق راسك.

الخطوة 2: رفع الحزام العلوي. لا تلمس جهاز التنفس