

قناع v الصين الشركة المصنعة الرقبة الجسيمات 103

1. التنفس الاصطناعي لديه تصميم أفضل.

2. الاشرطه الثابتة المزدوجة ، والفرقة المعدنية الأنف قابل للتعديل.

3. البطانة الداخلية السلسلة ضمان ختم أمنه.


4-مواد الترشيح العالية والكهرباء الساكنة لمقاومه الجسيمات السمية الطبيعية والتينغ ميكرون.



تصميم ستيريو هندسه الجسم البشري 3

الانسجه غير المنسوجة متعددة الطبقات والمخلوطة ، مجموع 4 طبقات

حزام ألومنيوم عقد الشكل

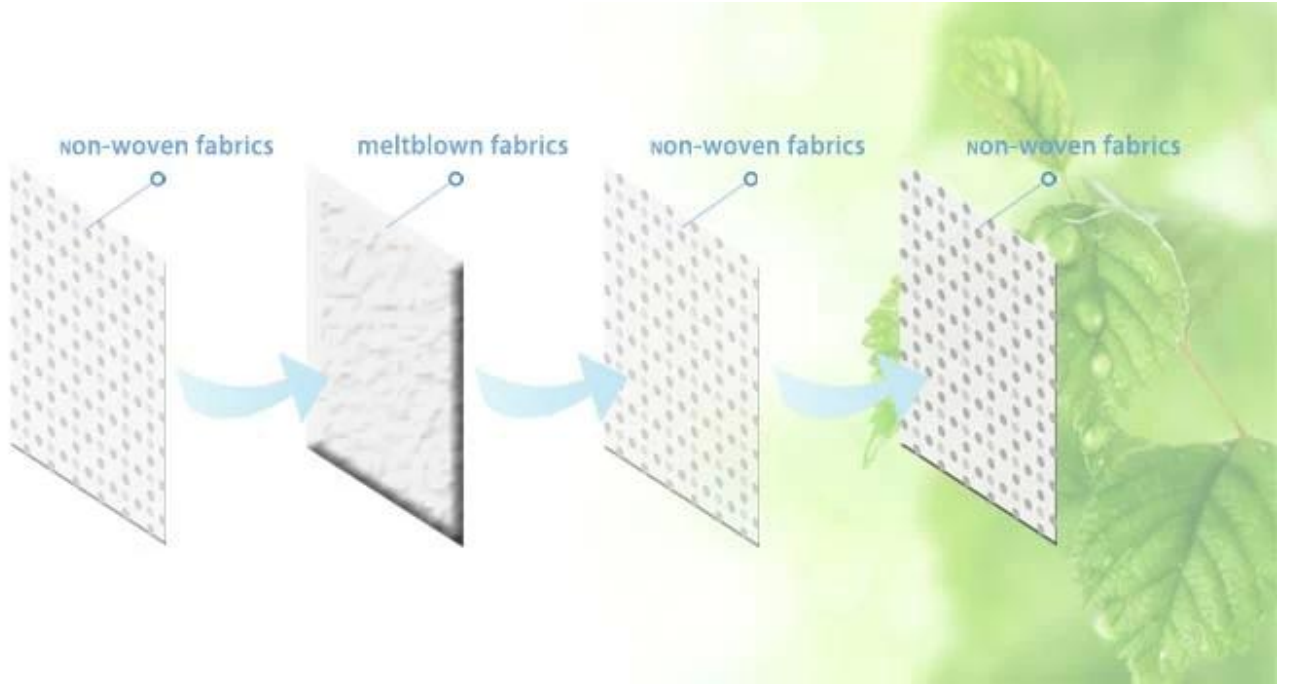

النطاق المنطبق

ويمكن استخدام أقنعه لحماية الجزيئات غير الزيتية ، والحد من رائحة بعض المركبات اوغانيتش. ليس فقط في الوقت المناسب لعزل البكتيريا ، والغبار في الهواء ، والصاب ، ويمكن تحسين حماية الجهاز التنفسي ، وبشره الوجه. الجسيمات غير الزيتية: الغبار (الممتلكات المعدنية ، غبار ألياف المعدنية الغبار) حبوب اللقاح والصاب ، والتي يمكن استخدامها PM 2.5 لحماية البيئة تلوث الهواء الجسيمات غرامه لا يمكن ان تكون مناسبة ل: ولا تنتج أجهزة التنفس الأوكسجين ، وليس في بيئة تفتقر إلى الأوكسجين.

إنذار:

هذا التنفس يساعد على حماية ضد جزيئات معينه ، وسوء الاستخدام يمكن ان يؤدي إلى المرض أو الموت.



خطوات الاستخدام

أداء النظافة اليدوية قبل وضع علي قناع.

اختر الحجم الصحيح من القناع وتأكد من عدم وجود عيوب.

1. عقد العاشرة في النخيل الخاص بك مع نوبিকা في متناول يديه ، وشنق الاشرطه الاذن دون مقابل.

2. وضع الخامسة والعاشرة تحت ذقنك مع نوبিকা.

في مكان ، وسحب اثنين من الاشرطه علي كل اذن. x في حين عقد 10

3. ومن ثم سحب الطوق إلى حزام آخر ، وجعله في مكان علي الرقبة.

4. إذا كان لديك الشعر الطويل ، ويجب وضع حزام تحت شعرك.

ضع ال 103 فولت علي انفك

5. باستخدام كلتا اليدين ، والعفن نوبিকা إلى شكل انفك من خلال دفع الهبوط والخارج.

بينما يحرك أطراف أصابعك إلى كلا جانبي اللجنة الخاصة

6. اجراء فحص مناسب عن طريق وضع كلتا يديه تماما علي القناع.

توخي الحذر لعدم الإخلال بالموقف والزفير بشكل حاد.

إذا تسرب الهواء حول انفك ، وضبط نوبিকা كما هو موضح في الخطوة 5.

إذا تسرب الهواء في حواف القناع ، وضبط الاشرطه مره أخرى علي طول الجانبين من راسك.

اجراء تدقيق مناسب مره أخرى إذا تم اجراء تعديل.

تذكر:

ارتداء الحق الحجم قناع.

ويجب ان يتم تنفيذها في كل مره عند ارتداء. xتناسب الاختيار إلزامي لجميع المستخدمين من القناع 10

قم باليد اليسرى بعد وضع القناع

