


## Nový design horké prodeje 102 velkoobchodní masky velkoobchod v Číně.

The [maska](#) 3-D designu podle obrysu obličeje, vyvarujte se třením s otvory a ústy. Nosník s jakýmkoliv tvarem tvaru je rozšířen masky plný rozsah těsnicího výkonu. Účinný dovážený filtrační materiál výrazně zlepšuje ochranný efekt. Vhodné pro ochranu dýchacích cest, jako např. : prach, minerální prášek, nelze použít pro ochranu před škodlivým plynem.



### Funkce:

Konstrukce lidského těla 3D stereo design  
Vícevrstvá netkaná textilie a meltblown, celkem 4 vrstvy  
Tvar držení hliníkového pásu

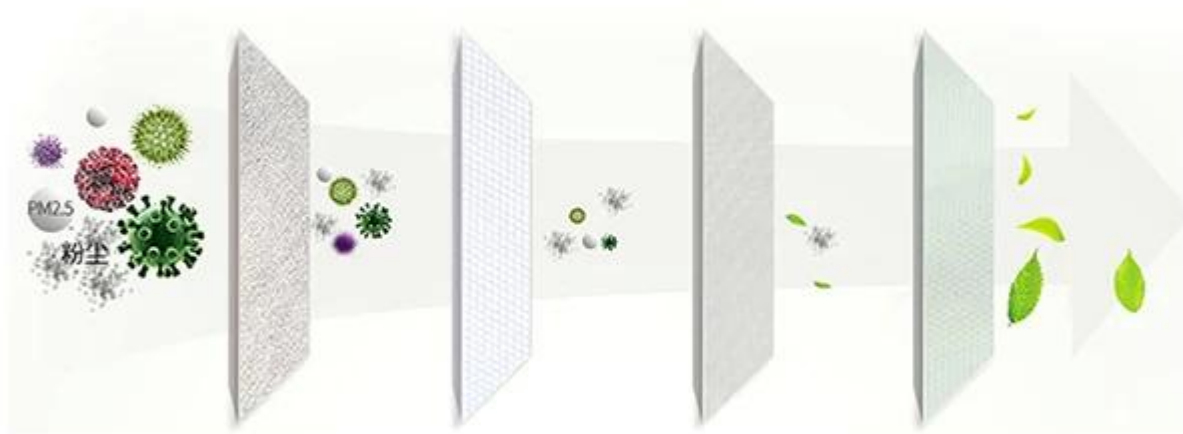

## Použitelný rozsah

Masky lze použít k ochraně neolejových částic, ke snížení zápachu některých organických sloučenin.

Nejen včas izolovat bakterie, prach ve vzduchu, opar, a může lépe chránit dýchací cesty a kůži na obličeji.

Neolejové částice: prach (prach z minerálních látek, kovový prach z prachových vláken), pyl a mlha, které lze použít k ochraně znečištění ovzduší jemnými částicemi PM 2.5.

## Nemůže být vhodný pro:

Respirátory nevytvářejí kyslík, ne v prostředí s nedostatkem kyslíku.

Warning:

Tento [Respirátor](#) pomáhá chránit před některými částicemi, zneužití může vést k nemoci nebo smrti.



## Kroky pro použití

Krok 1: Vyberte správný [Respirátor](#) velikost, kterou jste namontovali.

Krok 2: Umístěte dlaň do smyčky vašeho dýchacího přístroje a nasypete ji přes obličej.

Krok 3: Umístěte respirátor tak, aby zakryl nos a bradu.

Krok 4: Jednou rukou držte respirátor, druhou rukou umístěte první řemínek na korunku hlavy (nad ušima) a potom umístěte druhý řemínek na zadní část krku.

Krok 5: Pomocí dvou prstů obou rukou zatlačte kovový kousek podle kontury nosního můstku. (NIKDY NEPOSTUPE KOVOVÝ KUS!)

Krok 6: S oběma rukama nad respirátorem vydejte silně, abyste zkontrolovali, zda kolem něj nedošlo k úniku.

Krok 7: Únik je zřejmý, když se vlasy během silného výdechu pohybují. Pokud nosíte brýle, zahmlení sklenic naznačuje únik.

Krok 8: Pokud je zjištěno únik vzduchu, upravte respirátor, popruhy a přední část před opětovným testováním.

