

China Hersteller 103V Partikel [Maske](#)

1. Respirator hat ein besseres Design.
2. duale feste Riemen, verstellbare Metall-Nase Band.
3. glatte innere Verkleidung, die ein sicheres Siegel sicherstellt.
4. hohe Filtration und statische Elektrizität Material zu widerstehen normal giftig und Ting Micron Partikel.




Features

Human Body Engineering 3D Stereo Design

Mehrschichtige Gewebe und Meltblown, insgesamt 4 Schichten

Aluminium Gürtel Hold Shape

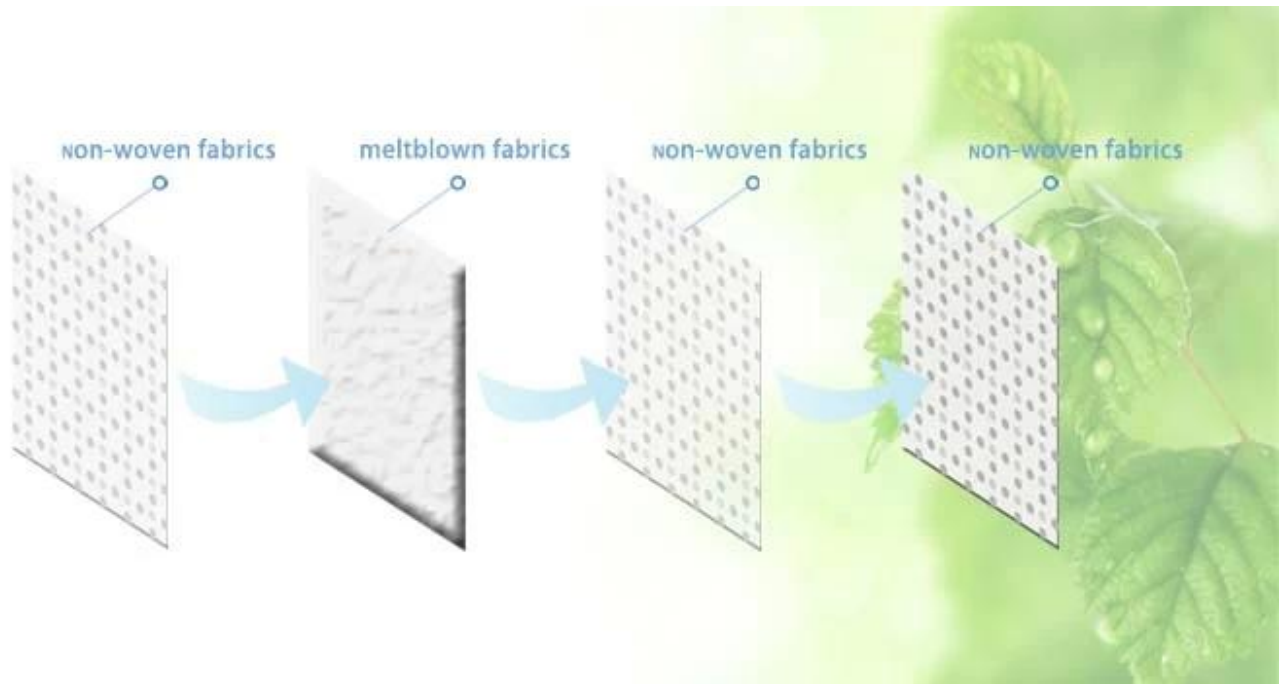

Anwendbares Geltungsbereich

Masken können verwendet werden, um nicht-Fette Partikel zu schützen, den Geruch einiger organic Verbindungen zu reduzieren.

Es nicht nur in der Zeit, Bakterien zu isolieren, Staub in der Luft, Dunst, und kann besser schützen die Atemwege, und Gesichts-Haut.

Non-Fette Partikel: Staub (Mineral-Eigenschaft, metallische Staub-Staub) Pollen und Dunst, die verwendet werden können, um Umwelt Luftverschmutzung Fine Particle pm 2,5.

Kann nicht geeignet für:

Die Atemwege produzieren keinen Sauerstoff, nicht in der Sauerstoff-mangelhaften Umgebung.

Warnung:

Diese Atemwege schützt vor bestimmten Partikeln, Missbrauch kann zu Krankheit oder Tod führen.



Schritte für die Verwendung

Die Hand-Hygiene vor der Inbetriebnahme [Maske](#).

Wählen Sie die korrekte Größe der Maske aus und stellen Sie sicher, dass keine Defekte vorhanden sind.

1. halten Sie die 103V in Ihrer Handfläche mit dem Revolverscheibe an den Fingerspitzen, hängen Ohr Bänder frei unterhalb der Hand.

2. Positionieren Sie die 103V unter dem Kinn mit dem Revolverscheibe aufwärts.

Wenn Sie die 103V halten, ziehen Sie die beiden Riemen über jedes Ohr.

3. und ziehen Sie dann den Reifen zu einem anderen Gurt, machen es an der Stelle auf dem Hals.

4. Wenn Sie lange Haare haben, muss der Gurt unter dem Haar positioniert werden.

Positionieren Sie die 103V niedrig auf der Nase.

5. mit beiden Händen, Schimmel die Revolverscheibe auf die Form der Nase durch Schieben nach unten und nach außen.

Während Sie Ihre Fingerspitzen auf beiden Seiten des Revolverscheibe.

6. führen Sie eine fit-Prüfung durch die Platzierung beider Hände vollständig über die Maske.

Achten Sie darauf, die Position nicht zu stören und scharf zu atmen.

Wenn airlecks um die Nase herum, passen Sie die Revolverscheibe wie in Schritt 5 beschrieben.

Wenn die Luft an der Maske Kanten leckt, passen Sie die Riemen an den Seiten des Kopfes zurück.

Passen Sie wieder fit Check, wenn eine Berichtigung vorgenommen wird.

Denken Sie daran:

Tragen Sie die richtige Größe [Maske](#)

Fit Check ist obligatorisch für alle Benutzer der 103V Maske und muss jedes Mal nach dem tragen durchgeführt werden.

Führen Sie hygieneafter durch die Maske aus.

