


Nuevo diseño de venta caliente 102 Head mask wholesale en China.

los [máscara](#) de 3-D diseño de acuerdo con el contorno facial, evitar la fricción con la boca y la boca. clip de la nariz con cualquier diseño de forma es máscaras mejoradas una gama completa de rendimiento de sellado. Material de filtro importado eficiente mejorar en gran medida el efecto de protección. Adecuado para la protección respiratoria de partículas, tales como: polvo, polvo mineral, no se puede usar como protección contra gases nocivos.



características:

Cuerpo humano, ingeniería, 3D, estéreo, diseño
Tejido multicapa no tejido y soplado en fusión, 4 capas en total
Forma de sujeción de correa de aluminio

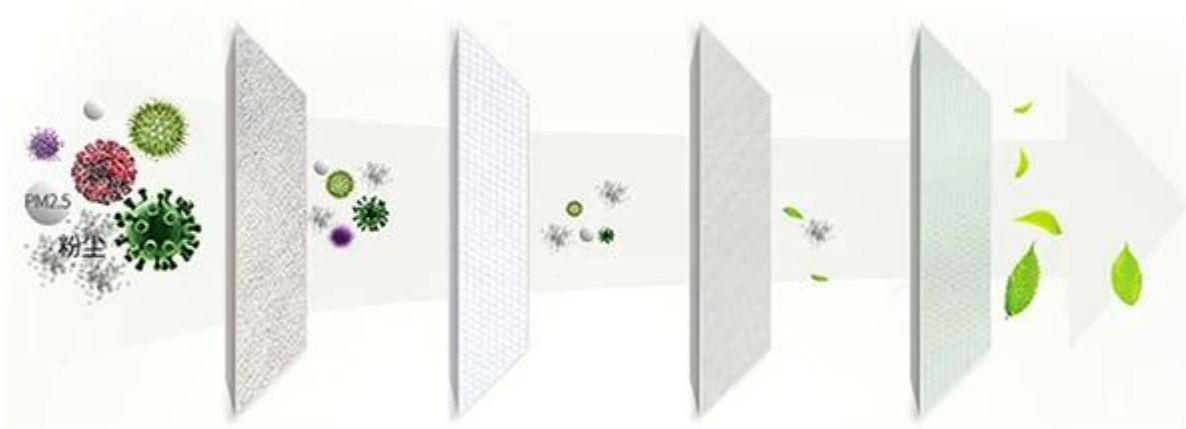

Alcance aplicable

Las máscaras se pueden usar para proteger las partículas no grasas y reducir el olor de algunos compuestos orgánicos.

No solo a tiempo para aislar las bacterias, el polvo en el aire, la neblina, y puede proteger mejor el tracto respiratorio y la piel del rostro.

Partículas no grasas: polvillo (propiedad de minerales, polvo de fibra de polvo metálico) polen y neblina, que pueden usarse para proteger el medio ambiente, partículas finas de partículas PM 2.5.

No puede ser adecuado para:

Los respiradores no producen oxígeno, no en ambientes deficientes de oxígeno.

Warning:

Esta [respirador](#) ayuda a proteger contra ciertas partículas, el mal uso puede causar enfermedad o muerte.



Pasos para el uso

Paso 1: selecciona el correcto [respirador](#) tamaño que le cupieron

Paso 2: coloque la palma de su mano a través de los anillos de su respirador y cópiela sobre su cara.

Paso 3: Coloque el respirador para cubrir la nariz y el mentón.

Paso 4: con una mano sosteniendo el respirador, use la otra mano para colocar la primera correa en la corona de la cabeza (arriba de las orejas), luego coloque la segunda correa en la parte posterior del cuello.

Paso 5: con dos dedos de ambas manos, presione hacia abajo la pieza de metal de acuerdo con el contorno de su puente nasal. (¡NUNCA PINCHE LA PIEZA METÁLICA!)

Paso 6: con ambas manos sobre el respirador, exhale fuertemente para verificar si hay fugas alrededor del respirador.

Paso 7: la fuga es evidente cuando el cabello se mueve durante la fuerte exhalación. Si usa gafas, el empañamiento de las gafas indica fugas.

Paso 8: Si se observa una fuga de aire, ajuste el respirador, las correas y la pieza de la nariz antes de volver a realizar la prueba.

