

Nouveau design [masque de cou VT103](#) wholesale en Chine

- La conception de forme unique permet un profil bas et un bon ajustement
- Confort amélioré grâce à un pont de nez facilement réglable
- Masque haute densité et haute dégradation pour les P2, 5




Caractéristiques

Conception 3D stéréo de fuselage humain d'ingénierie

Tissu non tissé multicouche et meltblown, total 4 couches

Forme de maintien de ceinture en aluminium

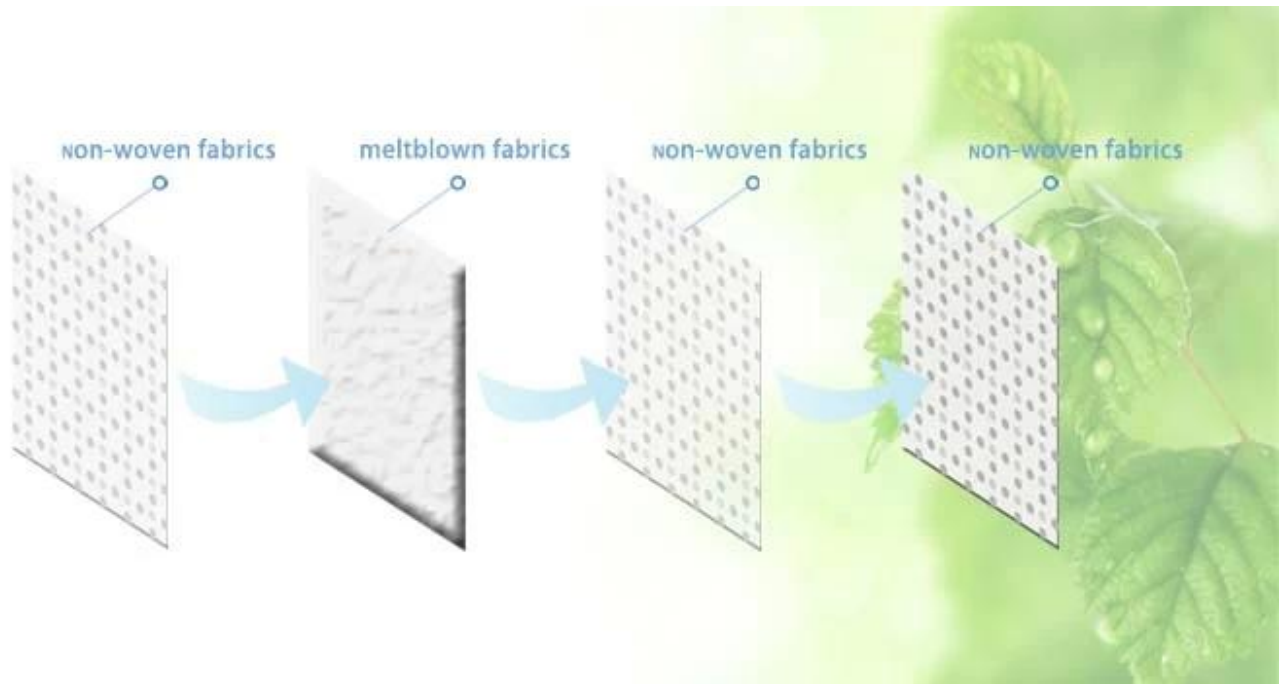

LIMITATIONS et avertissements d'utilisation

1. le porteur doit d'abord être formé à l'utilisation appropriée et à l'ajustement testé avant d'utiliser ce respirateur.
2. do pas utiliser cette [respirateur](#) Lorsque les concentrations de contaminants sont immédiatement dangereuses pour la vie ou la santé.
3. Quittez immédiatement la zone contaminée si la respiration devient difficile, ou si des étourdissements ou d'autres détresses surviennent.
4. jeter et remplacer le respirateur s'il devient endommagé ou si la résistance à la respiration devient excessive.
5. inspecter le respirateur avant chaque utilisation pour s'assurer qu'il est en bonne condition de travail. Examinez toutes les pièces du respirateur pour détecter les signes de détérioration, y compris les deux sangles, les pince-nez et les agrafes.
6. do pas altérer, laver, abuser ou mauvais usage de ce respirateur.
7. do ne pas utiliser avec des barbes ou d'autres poils faciaux ou d'autres conditions qui empêchent un bon joint entre le visage et le bord d'étanchéité du respirateur.


AVERTISSEMENT:

Ce respirateur aide à protéger contre certaines particules, une mauvaise utilisation peut entraîner la maladie ou la mort.

Guard your family and your health

Prevention of UV rays Cool and comfortable

Suitable for a variety of occasions

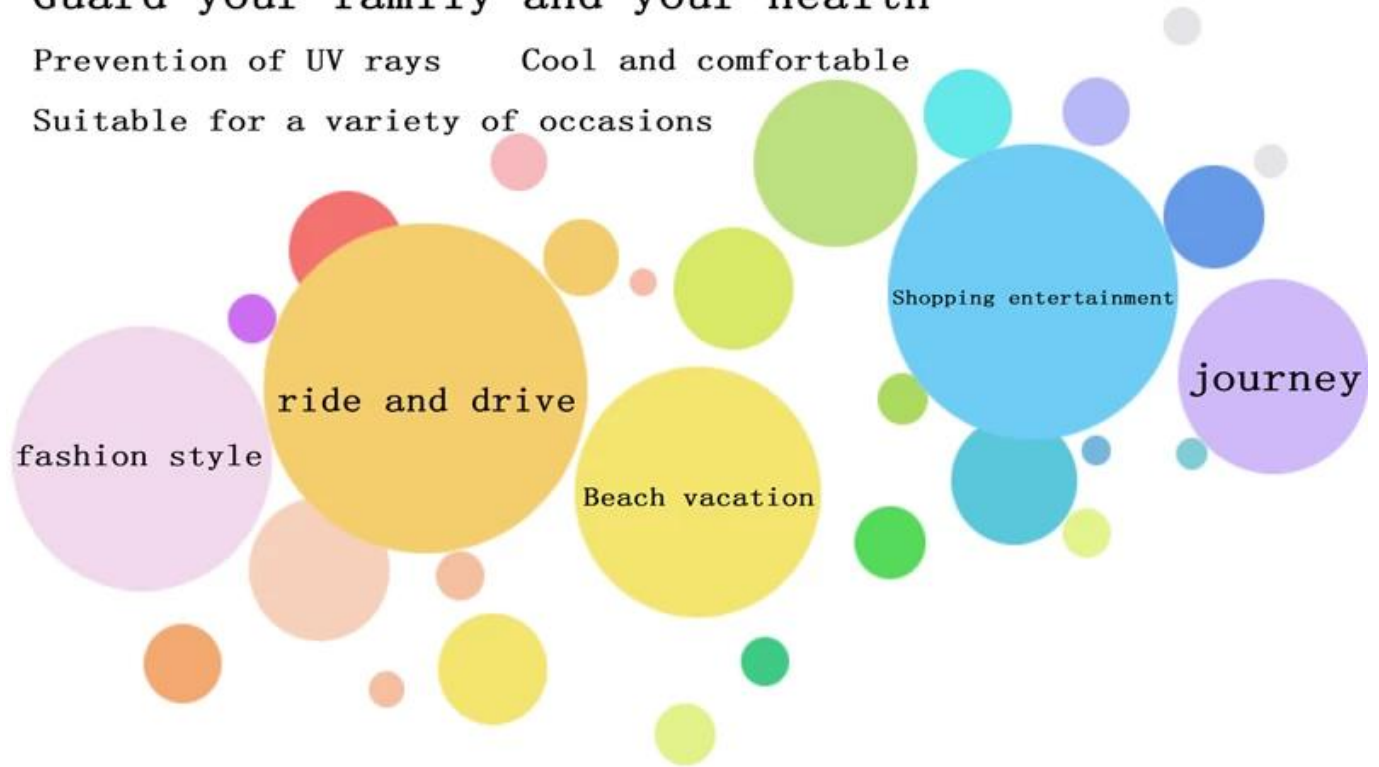

Étapes d'utilisation

Pratiquer l'hygiène des mains avant de mettre [masque](#).

Choisissez la taille correcte du masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de défauts.

1. Tenez le VT103 dans votre paume avec le embout au bout des doigts, accrochez les courroies d'oreille librement au-dessous de la main.

2. Positionnez le 103v sous votre menton avec le embout vers le haut.

Tout en tenant le VT103 en place, tirez les deux sangles sur chaque oreille.

3. puis tirez le cerceau à une autre sangle, le faire en place sur le cou.

4. Si vous avez les cheveux longs, la sangle doit être positionnée sous vos cheveux.

Positionnez le VT103 bas sur votre nez.

5. en utilisant les deux mains, Moulez le embout à la forme de votre nez en poussant vers le bas et vers l'extérieur.

Tout en déplaçant vos doigts vers le bas des deux côtés de la embout.

6. Effectuez un contrôle d'ajustement en plaçant les deux mains complètement au-dessus du masque.

Veillez à ne pas déranger la position et expirez brusquement.

Si des fuites d'eau autour de votre nez, réglez le embout comme décrit à l'étape 5.

Si l'air fuit aux bords du masque, réglez les sangles de nouveau le long des côtés de la tête.

Effectuez une nouvelle vérification de l'ajustement si un réglage est effectué.

Souviens:

Portez le masque de taille droite

La vérification d'ajustement est obligatoire pour tous les utilisateurs du masque de VT103 et doit être exécutée chaque fois sur le port.

Exécuter hygieneafter main mettre sur le masque.

