

Nuovo design Hot vendita 102 testa maschera all'ingrosso in Cina.


La mascherina del disegno 3-D secondo il contorno facciale, evita l'attrito con thenose e la bocca. Il clip del naso con tutto il disegno di figura è mascherine aumentate una gamma completa di prestazione di sealing. Efficiente materiale filtrante importato migliorare notevolmente l'effetto di protezione. Adatto per la protezione delle vie respiratorie, come: polvere, polvere minerale, non può essere utilizzato per la protezione da gas nocivi.



Caratteristiche:

Disegno stereo del corpo umano di ingegneria 3D
Tessuto non tessuto multistrato e Meltblown, totale 4 strati
Forma della stretta della cinghia di alluminio

4 layers protection

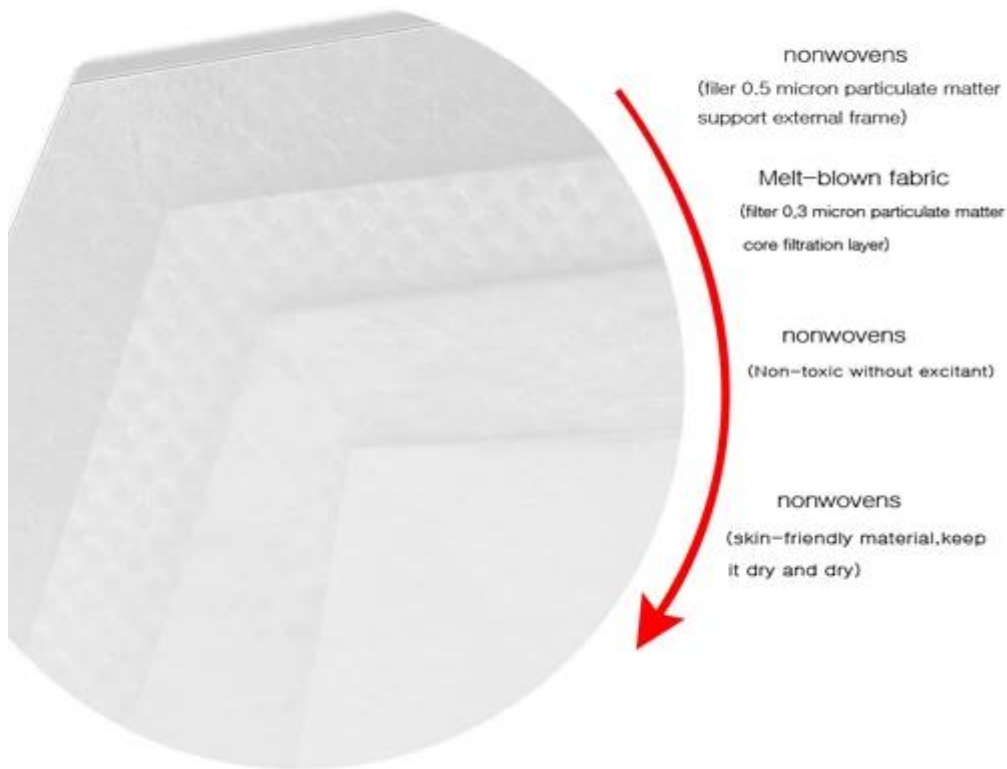

Ambito applicabile

Maschere possono essere utilizzati per proteggere le particelle non oleose, ridurre l'odore di alcuni composti organici.

Non solo in tempo per isolare i batteri, la polvere in aria, foschia, e può meglio proteggere il tratto respiratorio, e la pelle del viso.

Particolato non oleoso: polvere (proprietà minerale, polveri metalliche in fibra di polvere) polline e foschia, che può essere utilizzato per proteggere l'ambiente inquinamento atmosferico particolato fine PM 2,5.

Non può essere adatto per:

I respiratori non producono ossigeno, non in ambiente carente di ossigeno.

Warning:

Questo respiratore aiuta a proteggere contro determinate particelle, l'abuso può provocare la malattia o la morte.

Guard your family and your health

Prevention of UV rays Cool and comfortable

Suitable for a variety of occasions



Procedura per l'utilizzo

Passo 1: selezionare la dimensione respiratoria corretta che è stato montato.

Punto 2: disponga la vostra palma attraverso i cicli del vostro respiratore e la tazza sopra la vostra faccia.

Fase 3: posizionare il respiratore per coprire il naso e il mento.

Punto 4: con una mano che tiene il respiratore, usi l'altra mano per disporre la prima cinghia sulla parte superiore della testa (sopra le orecchie), quindi disponga la seconda cinghia sulla parte posteriore del collo.

Punto 5: usando due barrette di entrambe le mani, premi giù la parte del metallo secondo il contorno del vostro ponticello del naso. (non pizzicare mai il pezzo di metallo!)

Punto 6: con entrambe le mani sopra il respiratore, espirate fortemente per controllare la perdita intorno esso.

Fase 7: la perdita è evidente quando i capelli si muovono durante la forte espirazione. Se si indossano occhiali, l'appannamento dei bicchieri indica perdite.

Punto 8: se la perdita dell'aria è notata, regolare il respiratore, le cinghie ed il pezzo anteriore prima della prova ancora.



Per rimuovere il respiratore:

Punto 1: con entrambe le mani, alzi lentamente la cinghia inferiore intorno al vostro collo in su e sopra la vostra testa.

Fase 2: sollevare il cinturino superiore. Non toccare il respiratore.