


## Novo design de venda quente 102 Máscara de cabeça por atacado na China.

o [mascarar](#) de design 3-D de acordo com o contorno facial, evitar o atrito com thenose e boca. Clipe de nariz com qualquer projeto de forma é reforçada máscaras uma gama completa de desempenho de vedação. Eficientes importados filtro material melhorar consideravelmente o efeito de proteção. Adequado para proteção respiratória de partículas, tais como: poeira, pó mineral, não pode ser usado para proteção contra gases nocivos.



### Características:

Corpo humano engenharia 3D design estéreo  
Tecido não tecido multicamadas e meltblown, total de 4 camadas  
Forma de espera cinto de alumínio

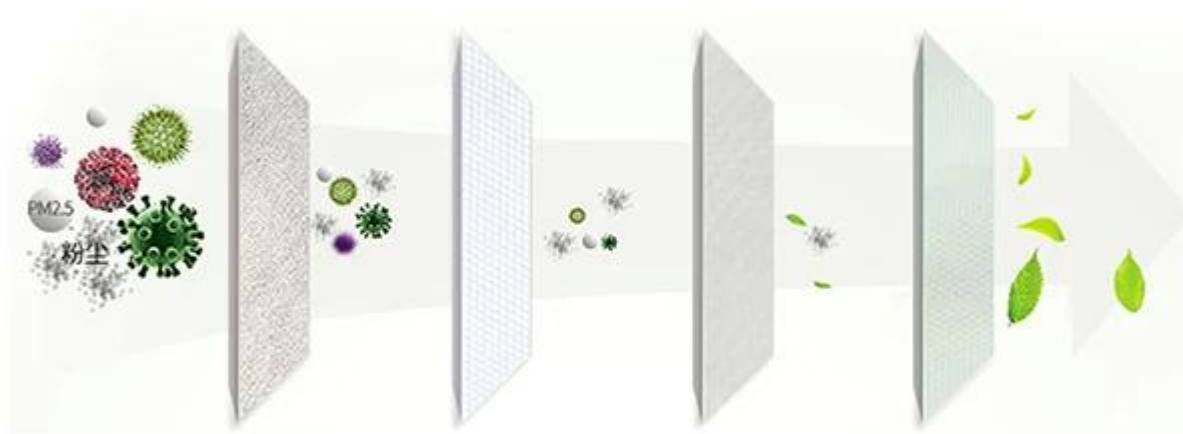

## Escopo aplicável

As máscaras podem ser usadas para proteger partículas não oleosas, reduzir o odor de alguns compostos orgânicos.

Não só a tempo de isolar bactérias, poeira no ar, neblina e pode proteger melhor o trato respiratório e a pele do rosto.

Partículas não oleosas: poeira (propriedade mineral, pó de fibra metálica poeira) pólen e neblina, que pode ser usado para proteger a poluição atmosférica do ar partículas finas PM 2.5.

## Não pode ser adequado para:

Respiradores não produzem oxigênio, não em ambiente deficiente em oxigênio.

Warning:

este [respirador](#) ajuda a proteger contra certas partículas, o uso indevido pode resultar em doença ou morte.



## Etapas para uso

Etapa 1: selecione o correto [respirador](#) tamanho que você foi montado.

Passo 2: Coloque a palma da sua mão através das alças do seu respirador e coloque-a sobre o seu rosto.

Etapa 3: posicione o respirador para cobrir o nariz e o queixo.

Passo 4: Com uma das mãos segurando o respirador, use a outra mão para colocar a primeira alça na coroa da cabeça (acima das orelhas), depois coloque a segunda alça na parte de trás do pescoço.

Passo 5: Usando dois dedos de ambas as mãos, pressione a peça de metal de acordo com o contorno da ponte do nariz. (NUNCA ENCAIXE A PEÇA DE METAL!)

Passo 6: Com ambas as mãos sobre o respirador, expire fortemente para verificar se há vazamento em torno dele.

Passo 7: O vazamento é evidente quando o cabelo se move durante a expiração forte. Se estiver usando óculos, o embaçamento dos óculos indica vazamento.

Etapa 8: Se houver vazamento de ar, ajuste o respirador, as tiras e a parte nasal antes de testar novamente.

