

Novo design quente venda 102 máscara de cabeça por atacado na China.


A máscara do projeto 3-D de acordo com o contorno facial, evita a fricção com o nariz e a boca. O grampo do nariz com todo o projeto da forma é máscaras realçadas uma escala cheia do desempenho da selagem. O material de filtro importado eficiente melhora extremamente o efeito da proteção. Adequado para a proteção da respiração da partícula, como: pó, pó mineral, não pode ser usado para a proteção do gás prejudicial.



Características:

Engenharia de corpo humano 3D Design estéreo
Tecido não tecido multicamado e Meltblown, total 4 camadas
Forma da preensão da correia de alumínio

4 layers protection

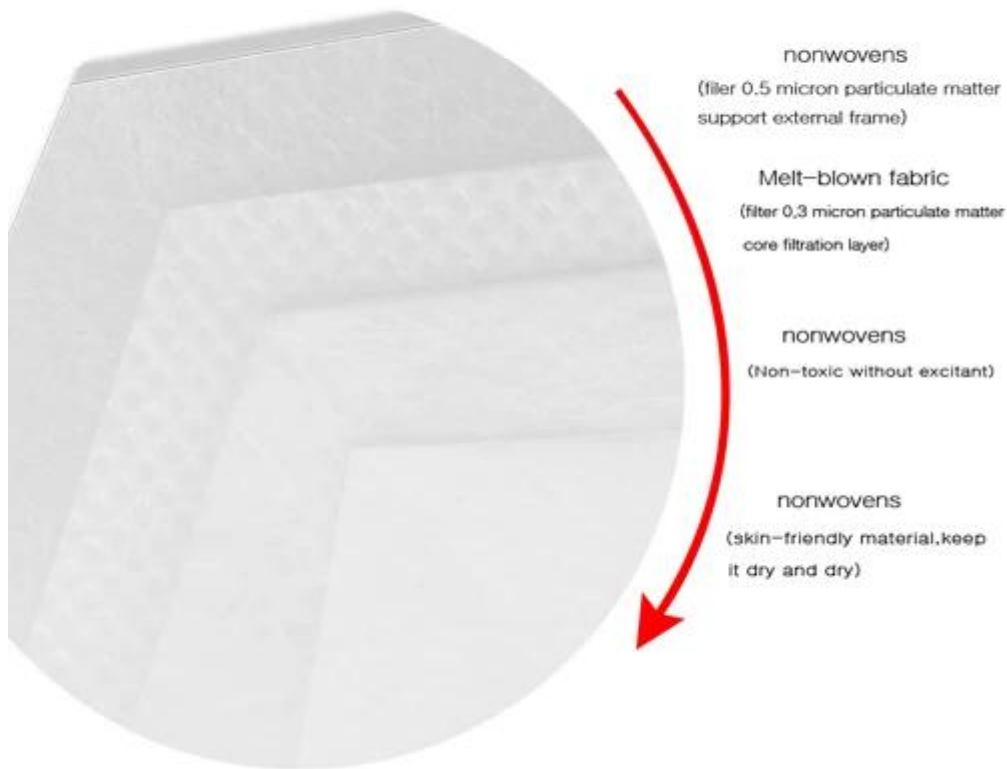

Escopo aplicável

Máscaras podem ser usadas para proteger as partículas não oleosas, reduzir o odor de alguns compostos orgânicos.

Não só a tempo de isolar as bactérias, poeira no ar, neblina, e pode proteger melhor o trato respiratório, e pele facial.

Partículas não oleosas: poeira (Propriedade mineral, pó metálico de fibra de poeira) pólen e neblina, que pode ser usado para proteger o ambiente de poluição do ar fina partícula PM 2,5.

Não pode ser apropriado para:

Os respiradores não produzem oxigênio, não em ambiente deficiente de oxigênio.

Warning:

Este respirador ajuda a proteger contra certas partículas, o uso indevido pode resultar em doença ou morte.

Guard your family and your health

Prevention of UV rays Cool and comfortable

Suitable for a variety of occasions



Etapas para o uso

Etapas para o uso
Etapa 1: selecione o tamanho correto do respirador que você estava equipado.

Passo 2: Coloque a palma através dos laços de seu respirador e copo-lo sobre seu rosto.

Passo 3: Posicione o respirador para cobrir o nariz e o queixo.

Etapa 4: com uma mão segurando o respirador, use a outra mão para colocar a primeira cinta na coroa da cabeça (acima das orelhas), em seguida, coloque a segunda cinta na parte de trás do pescoço.

Passo 5: usando dois dedos de ambas as mãos, pressione a peça metálica de acordo com o contorno da sua ponte de nariz. (nunca belisque a peça de metal!)

Passo 6: com ambas as mãos sobre o respirador, expire fortemente para verificar se há vazamento em torno dele.

Passo 7: vazamento é evidente quando o cabelo se move durante o forte exalar. Se usar óculos, embaçamento dos vidros indica vazamento.

Passo 8: se o vazamento de ar for notado, ajuste o respirador, as correias e a parte do nariz antes de testar novamente.



Para remover o respirador:

Passo 1: com ambas as mãos, levante lentamente a cinta inferior em torno de seu pescoço para cima e sobre sua cabeça.

Passo 2: Levante a cinta superior. Não toque no respirador.