

Новая популярная нетканая пыль **Маск** Регулируемая респираторная головка **Маск** дыхательные и просторные.

В **Маск** из трехмерного дизайна в соответствии с контуром лица Избегайте трения с сеносе и ртом. Клип в носу с любым дизайном фигуры улучшен **маски** полный набор характеристик герметизации. Эффективный импортированный материал фильтра значительно повышает эффект защиты. Приспособление для защиты дыхательных путей для частиц, например, пыль, минеральный порошок, не может использоваться для защиты от вредного газа.




Функции:

Проектирование

Многослойная ткань и мелтбловн, всего 4 слоя

Форма удержания алюминиевого ремня

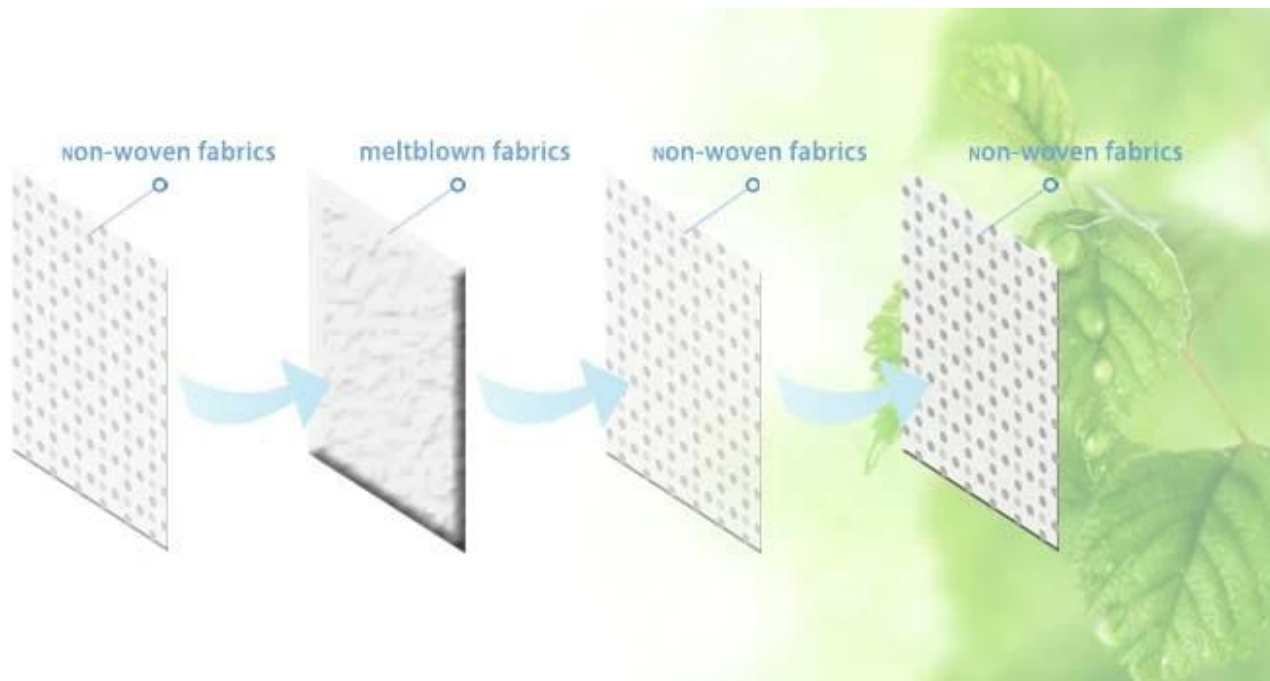

Применимая область

Маски можно использовать для защиты нелетучих частиц, уменьшая запах некоторых органических соединений.

Не только вовремя изолировать бактерии, пыль в воздухе, дымку и лучше защитить дыхательные тракты и кожу лицевой стороны.

Не маслянистые частицы: пыль (минеральная собственность, металлическая пыльная волокно) пыльца и дымка, которые могут использоваться для защиты окружающей среды тонкодисперсных частицы ТЧ 2,5.

Не подходит для:

Респираторы не производят кислород, а не в условиях дефицита кислорода.

Варининг:

Этот респиратор помогает защититься от определенных частиц, неправомерное использование может привести к болезни или смерти.



Действия по использованию

Шаг 1: выберите правильный [респиратор](#) размер, который вы были установлены.

Шаг 2: Поместите ладонь через петли респиратора и выпьем по вашему лицу.

Шаг 3: Поместите респиратор, чтобы покрыть нос и подбородок.


Шаг 4: с одной рукой, держащей респиратор, используйте другую руку для размещения первой лямки на гребне головы (над ушами), а затем поместите вторую лямку на спину шеи.

Шаг 5: используя два пальца обеих рук, нажимайте металлическую деталь в соответствии с контуром моста носа. (никогда не зажмите металлическую деталь!)

Шаг 6: с помощью обеих рук в аппарате респираторного дыхания твердо выдохните, чтобы проверить наличие утечки вокруг него.

Шаг 7: утечка очевидно, когда ваши волосы перемещаются во время сильного выдохнуть. Если надеть очки, то туманность очков указывает на утечку.

Шаг 8: Если отмечается утечка воздуха, то перед повторным испытанием Отрегулируйте респиратор, ремни и кусок носа.

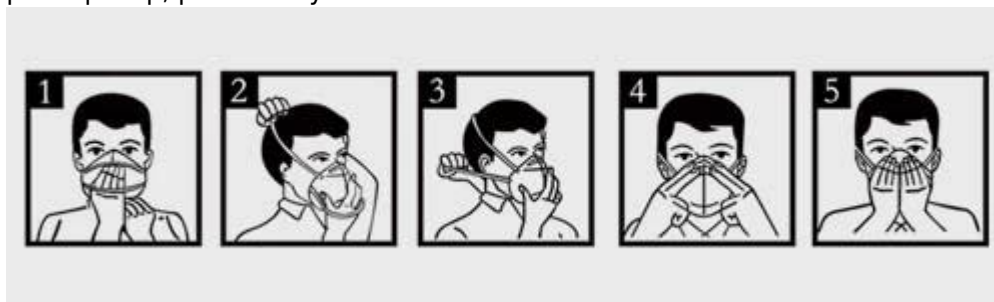

Чтобы удалить аппарат искусственного дыхания:

Шаг 1: с обеих рук, медленно поднимите нижнюю лямку вокруг шеи и над головой.

Шаг 2: Поднимите верхнюю лямку. Не трогай аппарат искусственного дыхания.