

آمنة وموثوقة **درجة الحرارة** قراءات. تشير إشارة صوتية مسموعة إلى عملية القياس المكتملة Medexpro Thermometers تقدم بمجرد الوصول إلى درجة حرارة الذروة. يصدر صوت تنبيه تلقائي للحمى عندما تصل درجة الحرارة إلى 37.8 °C 100 °F أو أعلى. يتم تخزين القراءة المقاسة الأخيرة تلقائيًا في الذاكرة ، مما يسمح للمستخدمين بتعقب مستويات درجات الحرارة بسهولة. تساعد ميزة الإغلاق التلقائي العملية على إطالة عمر البطارية.

محتويات المنتج:

1 ميزان الحرارة

1 دليل المالك

1 BBT غطاء

حالة التخزين 1

1 Giftbox

يغطي التحقيق 5



منتج الايضاح



مواصفات المنتج

اسم المنتج: [مقياس حرارة رقمي](#) JT002BT

زر البطارية. 1LR41 ، DC التيار الكهربائي: 1.5

استهلاك الطاقة: 0.1 ميجا واط

عمر البطارية: حوالي 1100 قراءات (إذا استخدمت لمدة 10 دقائق في اليوم)

وحدة الاستشعار: الترمستور

طريقة القياس: القياس الفعلي

عرض درجة الحرارة: 3 أرقام ، + درجة مئوية (درجة فهرنهايت) عرض بزيادات 0.1 درجة

دقة القياس: ± 0.05 درجة مئوية (32 درجة مئوية 43 درجة مئوية)

± 0.1 درجة فهرنهايت (89.60 درجة فهرنهايت 109.40 ° F)

مقياس الوقت: 2

نطاق القياس: 32 درجة مئوية إلى 43 درجة مئوية (89.6 درجة فهرنهايت إلى 109.40 درجة فهرنهايت)

بيئة الاستخدام: درجة الحرارة المحيطة: + 10 درجة مئوية إلى + 40 درجة مئوية (50 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت)

بيئة التخزين: -20 درجة مئوية إلى + 60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت)

95-30 RH % درجة الحرارة والرطوبة: الرطوبة النسبية

الوزن تقريبا. 15 جرام (وشملت البطارية)

و(د) 13mm * 130MM (L) * IMM (W) الأبعاد: 20

حالة التخزين ، دليل المستخدم. ، (LR4) الملحقات: اختبار البطارية (زر البطارية القلوية والمغنيسيوم

80 pcs / CTN التعبئة:

331 الحجم: 305mm * 260mm

تعليمات المستخدم:

ستظهر نغمة كما تظهر الشاشة ، متبوعة آخر درجة حرارة. LCD الخطوة 1. اضغط على زر تشغيل / إيقاف إلى جانب شاشة للذاكرة.

بعد عرض درجة حرارة الاختبار الذاتي ، يكون مقياس الحرارة الآن في وضع الاختبار.
تعرض لو ، إذا كانت درجة الحرارة المقاسة LCD * ملاحظة: إذا كانت درجة الحرارة المقاسة أقل من 32 °C أو 90 °F ، فإن شاشة
Hi. تعرض LCD أعلى من 42.9 °C أو 109.9 °F ، فإن شاشة




الخطوة 2. موقف ميزان الحرارة في الموقع المطلوب (الفم)

أ) الاستعمال الشفوي: ضع الترمومتر تحت اللسان كما هو موضح في موضع "v". أغلق فمك وتنفس بشكل متساوٍ عبر الأنف لمنع
°F a تأثير القياس باستنشاق الهواء أو زفيره. درجة الحرارة العادية بين 35.7 °C و 37.3 °C (96.3

الخطوة 3

يومض علامة درجة طوال عملية الاختبار. عندما يتوقف اللعاب ، يصدر صوت تنبيه لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا. سوف تظهر القراءة المقاسة
على شاشات الكريستال السائل في وقت واحد. الحد الأدنى لقياس الوقت حتى يتم الحفاظ على نغمة الإشارة (تنبيه) دون استثناء.
يستمر القياس حتى بعد إخطار الجرس. لن تتغير درجة الحرارة المعروضة عندما تتم إزالة الحرارة من موضع الاختبار

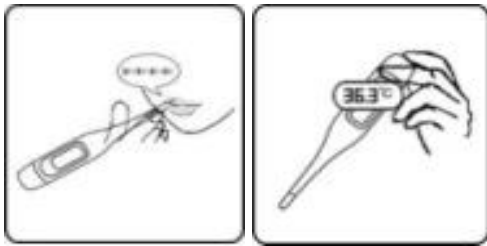

Step4.

لإطالة عمر البطارية ، اضغط على الزر تشغيل / إيقاف لإيقاف الوحدة بعد اكتمال الاختبار. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء ، فسيتم إيقاف
تشغيل الوحدة تلقائيًا بعد حوالي 10 دقائق.
تخزين ميزان الحرارة في حالتها الواقية

