
103 الصين الشركة المصنعة الرقبة الجسيمات 103 1. التنفس الاصطناعي لديه تصميم أفضل. 1. التنفس الاصطناعي لديه تصميم أفضل. 2. الاشرطه الثابتة المزدوجة ، والفرقة المعدنية الأنف قابل للتعديل. 3. البطانة الداخلية السلسة ضمان ختم أمنه. 4-مواد الترشيح العالية والكهرباء الساكنة لمقاومه الجسيمات السمية الطبيعية والتينغ ميكرون.



تصميم ستيريو dهندسه الجسم البشري 3 الانسجه غير المنسوجة متعددة الطبقات والمخلوطة ، مجموع 4 طبقات حزام ألومنيوم عقد الشكل

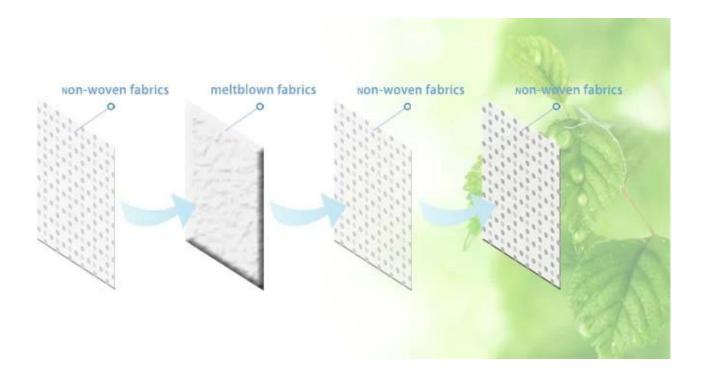

## النطاق المنطبق

ويمكن استخدام أقنعه لحماية الجزيئات غير الزيتية ، والحد من رائحة بعض المركبات اوغانيتش. ليس فقط في الوقت المناسب لعزل البكتيريا ، والغبار في الهواء ، والضباب ، ويمكن تحسين حماية الجهاز التنفسي ، وبشره الوجه.

الجسيمات غير الزيتية: الغبار (الممتلكات المعدنية ، غبار ألياف المعدنية الغبار) حبوب اللقاح والضباب ، والتي يمكن استخدامها الجسيمات غرامه PM 2.5.

لا يمكن ان تكون مناسبه ل:

ولا تنتج أجهزه التنفس الأوكسجين ، وليس في بيئة تفتقر إلى الأكسجين.

إنذار:

هذا التنفس يساعد علي حماية ضد جزيئات معينه ، وسوء الاستخدام يمكن ان يؤدي إلى المرض أو الموت.



## خطوات الاستخدام

أداء النظافة اليدوية قبل وضع على قناع.

اختر الحجم الصحيح من القناع وتاكد من عدم وجود عيوب.

1. عقد العاشرة في النخيل الخاص بك مع نوبيكا في متناول يديه ، وشنق الاشرطه الاذن دون مقابل.

2. وضع الخامسة والعاشرة تحت ذقنك مع نوبيكا.

في مكان ، وسحب اثنين من الاشرطه علي كل اذن. xفي حين عقد 10

3. ومن ثم سحب الطوق إلى حزام آخر ، وجعله في مكان على الرقبة.

4. إذا كان لديك الشعر الطويل ، ويجب وضع حزام تحت شعرك.

ضع ال 103 فولت علي انفك

5. باستخدام كلتا اليدين ، والعفن نوبيكا إلى شكل انفك من خلال دفع الهبوط والخارج.

بينما يحرك أطراف أصابعك إلى كلا جانبي اللجنة الخاصة

6. اجراء فحص مناسب عن طريق وضع كلتا يديه تماما علي القناع.

توخي الحذر لعدم الإخلال بالموقف والزفير بشكل حاد.

إذا تسرب الهواء حول انفك ، وضبط نوبيكا كما هو موضح في الخطوة 5.

إذا تسرب الهواء في حواف القناع ، وضبط الاشرطه مره أخرى على طول الجانبين من راسك.

اجراء تدقيق مناسب مره أخرى إذا تم اجراء تعديل.

## تذكر:

ارتداء الحق الحجم <u>قناع</u>

ويجب ان يتم تنفيذها في كل مره عند ارتداء. Xتناسب الاختيار إلزامي لجميع المستخدمين من القناع 10 قم باليد اليسرى بعد وضع القناع

