

Nový design Hot prodej 102 Head maska velkoobchod v Číně.


Maska 3-D design podle kontury obličeje, vyhnout se tření s thenose a ústy. Nosní svorka s jakýmkoliv tvarovým designem je vylepšené masky s celou řadou těsnících vlastností. Efektivní importovaný filtrační materiál výrazně zlepšuje účinek ochrany. Vhodné pro ochranu dýchacích cest, jako například: prach, minerální prášek, nelze použít pro ochranu před škodlivým plynem.



Funkce:

Lidské tělo inženýrství 3D Stereo design
Vícevrstvá netkané textilie a meltblown, celkem 4 vrstvy
Hliníkový pás drží tvar

4 layers protection

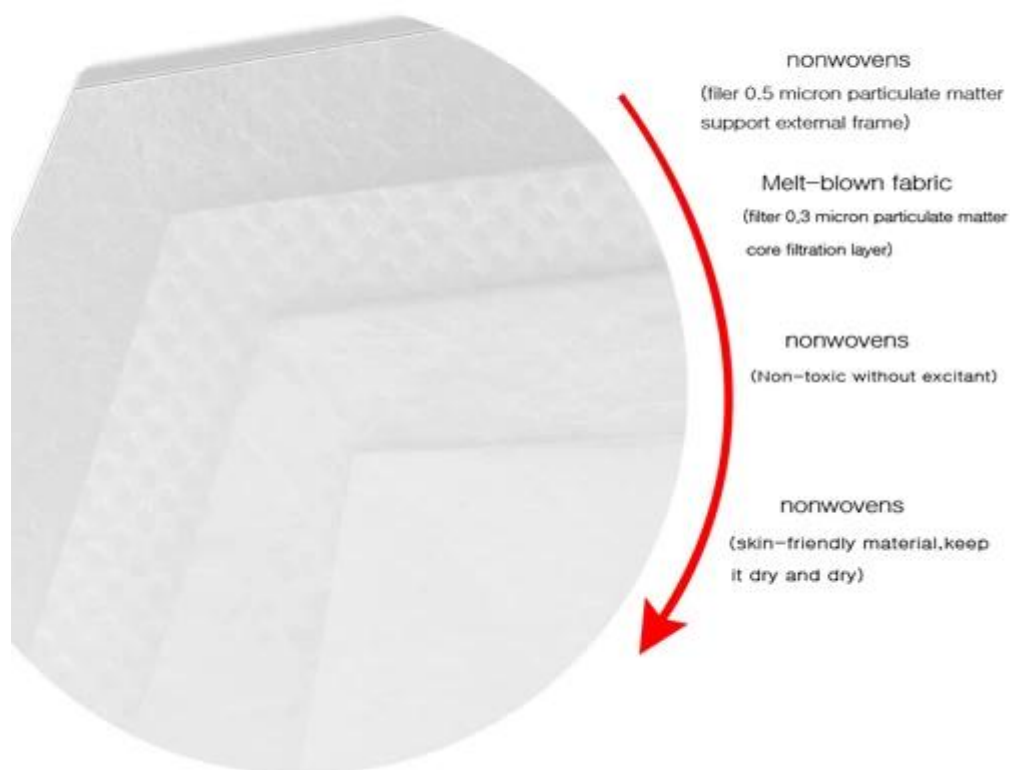

Příslušný obor

Masky mohou být použity k ochraně nemastných částic, snížit zápach některých organických sloučenin. To nejen včas izolovat bakterie, prachu ve vzduchu, opar, a může lépe chránit dýchací cesty, a pleť obličeje.

Nemastné částice: prach (minerální vlastnost, kovový prach vlákno prachu) pyl a opar, který lze použít k ochraně životního prostředí znečištění ovzduší jemné částice PM 2,5.

Nemůže být vhodný pro:

Respirátory neprodukuje kyslík, ne v kyslík-deficitní prostředí.

Warning:

Tento respirátor pomáhá chránit před některými částicemi, zneužití může mít za následek nemoc nebo smrt.

Guard your family and your health

Prevention of UV rays Cool and comfortable

Suitable for a variety of occasions



Kroky pro použití

Krok 1: vyberte správnou velikost respirátoru, který jste byli namontováni.

Krok 2: Umístěte dlaně přes smyčky vašeho respirátor a pohár ji přes obličej.

Krok 3: Umístěte respirátor na pokrytí nosu a brady.


Krok 4: s jednou rukou drží respirátor, použijte druhou stranu umístit první popruh na temeno hlavy (nad uši), pak umístěte druhý popruh na zadní straně krku.

Krok 5: pomocí dvou prstů obou rukou, stiskněte dolů kovový kus podle obrysu vašeho nosu mostu. (nikdy špetka kovový kus!)

Krok 6: s oběma rukama přes respirátor, výdech silně kontrolovat únik kolem něj.

Krok 7: únik je evidentní, když se vaše vlasy pohybuje během silné výdechu. Pokud nosíte brýle, zamlžení brýlí indikuje netěsnost.

Krok 8: je-li zjištěna netěsnost vzduchu, upravte respirátor, popruhy a nos kus před zkouškou znovu.

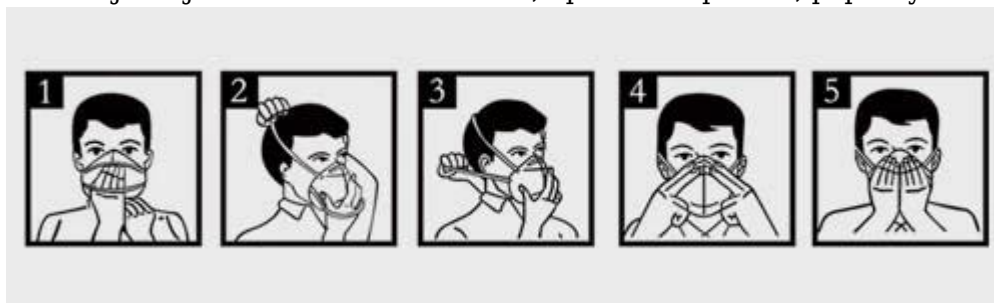

Odstranění respirátoru:

Krok 1: s oběma rukama, pomalu zvednout Spodní popruh z celého krku nahoru a přes hlavu.

Krok 2: Zvedněte horní popruh. Nedotýkejte se respirátoru.