

Infračervený čelo teploměr pro tělo, objekty a okolní teplotu

1 druhá měření



Funkce

Medexpro JT004 teploměr, dále je to spolehlivost, přesnost a snadné ovládání, umožňuje jemné a non-invazivní měření tělesné teploty, aniž by se dotkla pacienta.

1 sekundy

Rychlé a jemné měření za pouhé 3 sekundy.

3 in 1

Multifunkční

Měření čela, objektů a okolní teploty během několika sekund.



30 datová paměť

Automatické uložení posledních 30 měřících hodnot s datem a časem.



Specifikace:

Bezdotykové měření pouze za 1 SEK.

Multifunkční (těleso, objekt a okolní teplota)
Sledování světla-pro snadné použití i v noci

Klinicky testované a doporučené lékaři
Tichá záře™ technologie a horečka alarm

Velký osvětlený displej s datem a časem
30 datová paměť (uložená s datem a časem)


Ovládání zvuku (zapnuto/vypnuto)
Volitelné: pouzdro nebo úložný vak

Mod. Číslo: NC 150
Velikost: 141,1 x 43,3 x 36,9 mm
Váha: 90g (s baterií), 67g (w/o baterie)
Měřicí rozsah: 0-100,0 °c
Přesnost měření: ± 0,2 °c mezi 36,0 a 39,0 °c
Baterie: 2 x 1,5 V alkalické baterie, velikost AAA

Pokyny pro uživatele:

Krok 1:

Stisknutím tlačítka MODE můžete přepnout režim mezi režimem čela a režimem objektu. Stiskněte vypínač nebo tlačítka Start po zobrazení celé obrazovky, teploměr je nyní připraven k novému měření. Pokud je abnormální, Er1 nebo Er2 se zobrazí.

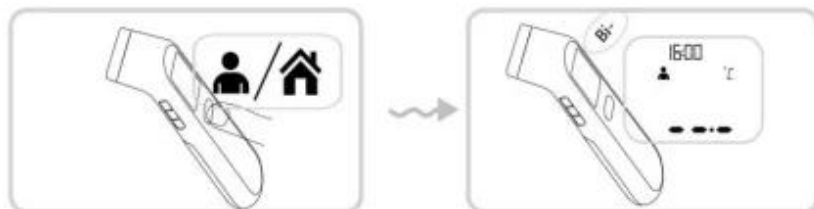

Krok 2:

Spánková tepna je napojena na srdce přes krční tepnu. Tak to je navržen pro měření povrchu kůže kolem temporální tepny, hlavní tepny hlavy. Namiřte teploměr ve středu čela o vzdálenost 2 až 3 cm a poté stiskněte tlačítka Start. Poznámka: Neodstraňujte teploměr z čela před tím, než uslyšíte poslední pípnutí.



Krok 3:

Přečtěte si teplotu na displeji.

1. je-li odečet teploty nižší než 37,8 °C (100,0 °F), bude vedle čtení zobrazen šťastný obličej.
2. Pokud je odečet teploty 37, °C (100.0 °F) nebo vyšší, zobrazí se vedle čtení špatná tvář.



Krok 4:

Chcete-li prodloužit výdrž baterie, po dokončení testování vypněte přístroj stisknutím tlačítka napájení. Pokud nedojde k žádné akci, přístroj se automaticky vypne po cca 1 minutách. Teploměr Uchovávejte v ochranném pouzdře.