


Medexpro [Teploměry](#) nabízejí bezpečná a spolehlivá měření teploty. Zvuková pípnutí signalizuje dokončený měřicí proces po dosažení maximálních teplot. Když teplota dosáhne 37,8 °C (100 °F) nebo vyšší, zazní alarm automatické horečky. Poslední naměřené hodnoty se automaticky ukládají do paměti, což uživatelům umožňuje snadno sledovat jejich teplotu. Praktická funkce automatického vypnutí pomáhá prodloužit životnost baterie.

Obsah produktu

- 1 Teploměr
- 1 Uživatelská příručka
- 1 Pouzdro na ukládání
- 1 Dárková krabička
- 5 krytů sond

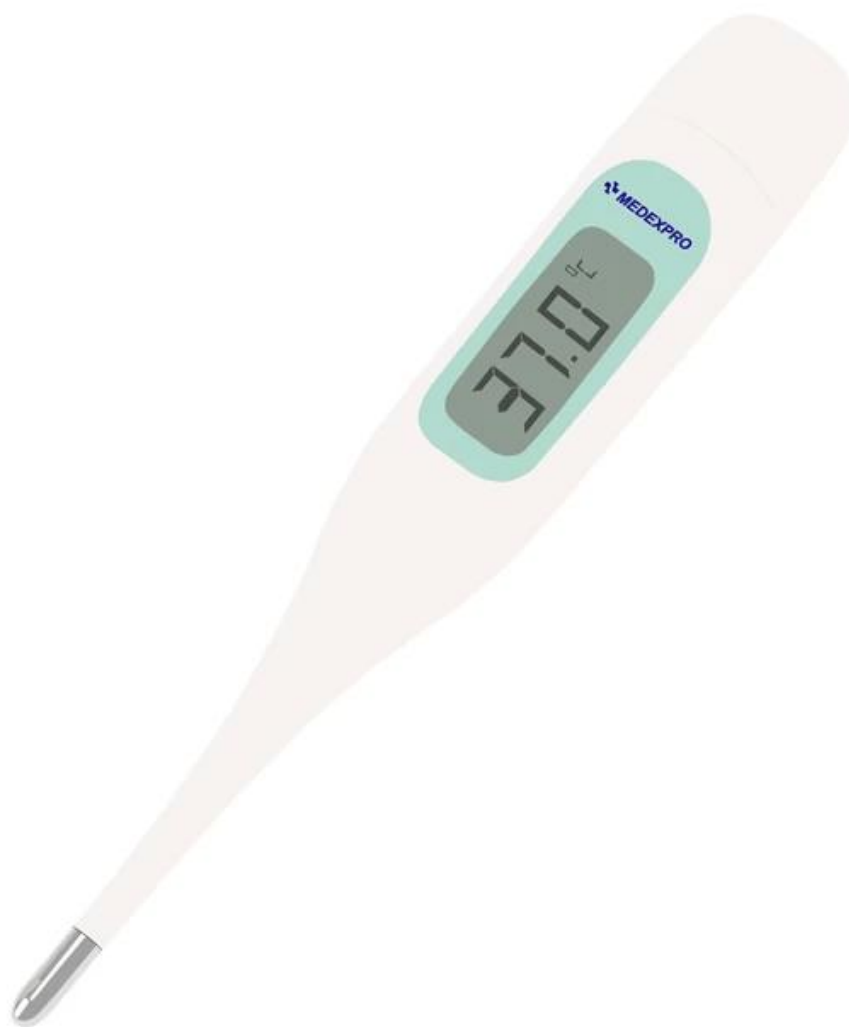

Specifikace produktu

Jméno výrobku: [Digitální teploměr](#) JT002NM

Napájení: 1,5 DC, 1LR41 tlačítko baterie.

Spotřeba energie: 0,1MW

Životnost baterie: přibližně 1100 měření (pokud se používá 10 minut denně)

Snímací jednotka: termistor

Metoda měření: skutečné měření

Zobrazení teploty: 3-místné zobrazení + ° C (° F) v krocích po 0,1 stupni

Přesnost měření: $\pm 0,1$ ° C (32 ° C až 43 ° C)

$\pm 0,18$ ° F (89,60 ° F)

Doba měření: 2 m

Rozsah měření: 32 ° C až 43 ° C (89,6 ° F až 109,40 ° F)

Prostředí použití: Okolní teplota: + 10 ° C až + 40 ° C (50 ° F až 104 ° F)

Skladovací prostředí: -20 ° C až + 60 ° C (-4 ° F až 140 ° F)

Teplota a vlhkost: Relativní vlhkost 30-95% RH

Hmotnost: Přibl. 15 g (baterie je součástí balení)

Rozměry: 20 mm (W) * 130 mm (l) * 13 mm (d)

Příslušenství: zkušební baterie (baterie alkalického hořčíku LR4), pouzdro pro uložení, uživatelská příručka.

Balení: 80ks / CTN

Velikost CTN: 331mm * 305mm * 260mm

Pokyny pro uživatele:

Krok 1. Stiskněte tlačítko Zap / Vyp vedle displeje LCD. Po zobrazení obrazovky zazní tón, po kterém následuje poslední teplota paměti.

Po zobrazení autotestu [teplota](#), je nyní teploměr v testovacím režimu.

* Poznámka: Pokud je naměřená teplota nižší než 32 ° C nebo 90 ° F, LCD displej zobrazí Lo, pokud je naměřená teplota vyšší než 42,9 ° C nebo 109,9 ° F, LCD displej zobrazí Hi.




Krok 2. Umístěte teploměr na požadované místo (ústa, konečník nebo podpaží).

a) Perorální použití: Umístěte teploměr pod jazýček, jak je naznačeno polohou "v". Zavřete ústa a dýcháte rovnoměrně nosem, aby nedošlo k ovlivnění měření inhalačním / vydechaným vzduchem. Normální teplota mezi 35,7 ° C a 37,3 ° C (96,3 ° F a 99,1 ° F)

b) Použití v rektální oblasti: Pro snadné zasunutí namažte špičku stříbrné sondy s vazelínou. Jemně

zasuňte snímač do konečnicku přibližně 1 cm (méně než 1/2 "). Normální teplota mezi 36,2 ° C a 37,7 ° C (97,2 ° F a 99,9 ° F).

c) Použití podpaží: Utřete podpaží v suchu. Umístěte sondu do podpaží a držte rameno pevně přitisknuté na stranu. Z lékařského hlediska bude tato metoda vždy poskytovat nepřesné údaje a neměla by být použita, pokud jsou vyžadována přesná měření. Normální teplota mezi 35,2 ° C a 36,7 ° C (95,4 ° F a 98).

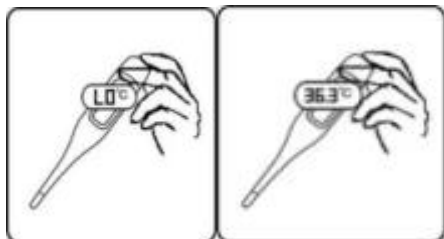

Krok4.

Chcete-li prodloužit životnost baterie, stiskněte tlačítko On / Off pro vypnutí přístroje po dokončení testu. Pokud se neprovede žádná akce, přístroj se po zhruba 10 minutách automaticky vypne. Teploměr uchovávejte v ochranném pouzdře.

