

Nový design maska krku VT103 velkoobchod v Číně

- Jedinečný tvar konstrukce umožňuje nízký profil a dobrou kondici
- Zvýšený komfort díky snadno nastavitelnému nosníku mostu
- Vysoká hustota a vysoká degradací maska pro PM2, 5




Funkce

Lidské tělo inženýrství 3D Stereo design

Vícevrstvá netkané textilie a meltblown, celkem 4 vrstvy

Hliníkový pás drží tvar

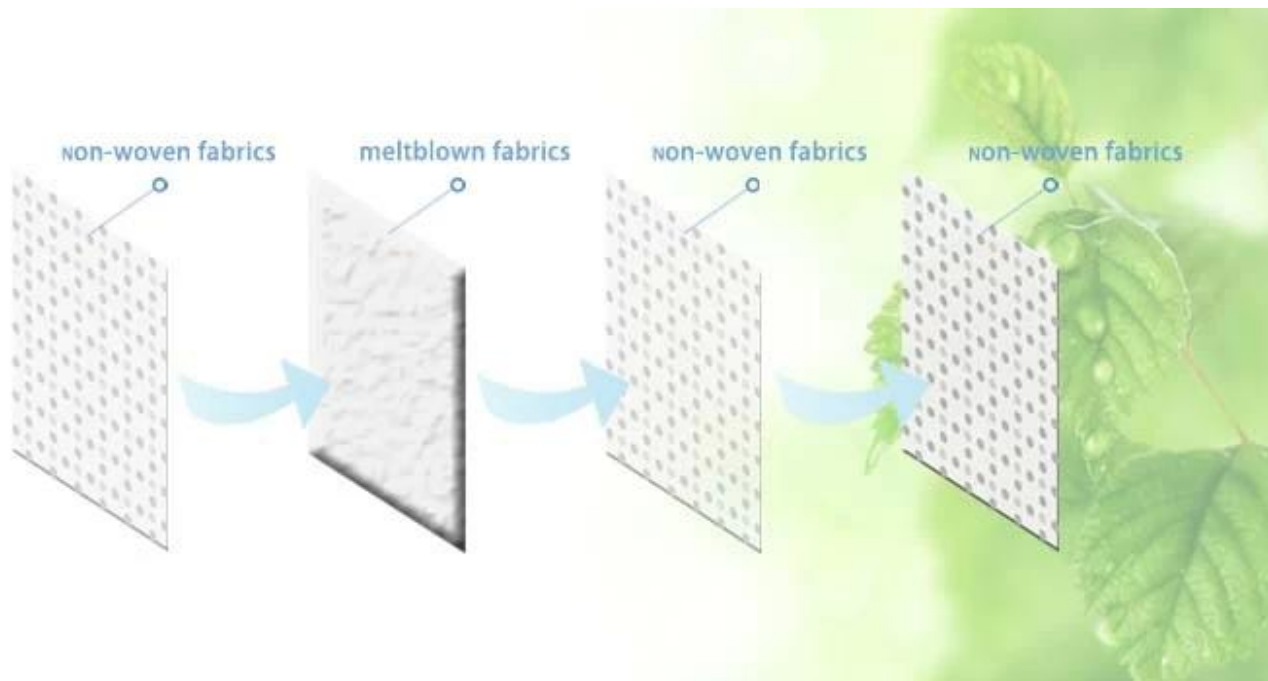

Omezení použití a upozornění

1. před použitím tohoto respirátor je třeba nejprve vytrénovat uživatele ve správném používání a fit.
2. do Nepoužívejte tento [respirátor](#) Pokud jsou koncentrace kontaminujících látek bezprostředně nebezpečné pro život nebo zdraví.
3. Pokud se dýchání stane obtížným, ponechteje contaminated oblast okamžitě, nebo dojde k závratě nebo jinému strachu.
4. vyhodte a nahradte respirátor, pokud dojde k jeho poškození nebo k nadměrnému odporu dýchání.
5. Zkontrolujte respirátor před každým použitím, aby bylo zajištěno, že je v dobré pracovní comdition. Zkontrolujte všechny respirátor díly pro známky poškození, včetně dvou popruhů, noseclip a sponky.
6. do nesmí měnit, mýt, zneužívat nebo zneužívat tento respirátor.
7. do nepoužívejte s vousy nebo jinými obličejové vlasy nebo jiné podmínky, které brání dobré utěsnění mezi obličejem a těsnicím okrajem respirátor.


Upozornění:

Tento respirátor pomáhá chránit před některými částicemi, zneužití může mít za následek nemoc nebo smrt.

Guard your family and your health

Prevention of UV rays Cool and comfortable

Suitable for a variety of occasions

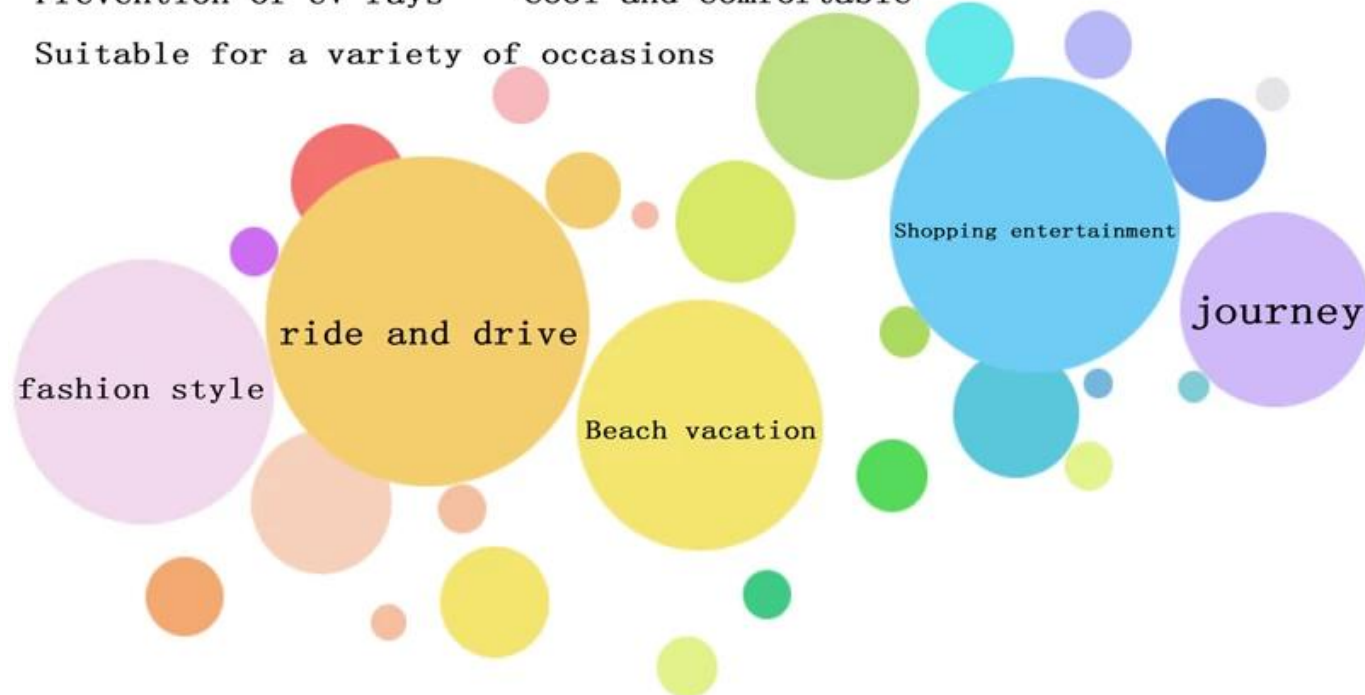

Kroky pro použití

Před uvedením do provozu proveďte hygienu rukou [maska](#).

Zvolte správnou velikost masky a ujistěte se, že nejsou žádné vady.

1. Držte VT103 v dlani s hlavicí na dosah ruky, pověsit ušní popruhy volně pod rukou.

2. Umístěte 103v pod bradu s hlavicí nahoru.

Zatímco držíte VT103 na místě, vytáhněte dva popruhy přes každé ucho.

3. a pak vytáhněte obruč na jiný popruh, aby to na místě na krku.

4. Pokud máte dlouhé vlasy, popruh musí být umístěn pod vlasy.

Umístěte VT103 nízko na nose.

5. pomocí obou rukou, plísně hlavicí na tvar nosu tím, že tlačí dolů a ven.

Při pohybu prstů po obou stranách hlavicí.

6. proveďte kontrolu lícování umístěním obou rukou přes masku.

Dávejte pozor, abyste nenarušili pozici a vydechujte ostře.

Pokud se rozteče kolem nosu, upravte hlavicí tak, jak je popsáno v kroku 5.

Pokud se vzduch na okrajích masky nevrací, nastavte pásy zpět po stranách hlavy.

Proveďte kontrolu vhodnosti znovu, pokud je provedena úprava.

Si:

Noste správnou velikost masky

Kontrola fit je povinná pro všechny uživatele VT103 masky a musí být provedena pokaždé, když na sobě.

Provést ruční hygienuafter uvedení na masku.

