

Nový populární netkaný prach [maska](#) Nastavitelná hlava respirátoru [maska](#) prodyšný a pohodlný.

Na [maska](#) 3-D provedení podle kontury obličeje, vyhnout se tření s thenose a ústy. Nosní klip s jakýmkoli tvarem je vylepšen [masky](#) kompletní sortiment těsnících výkonů. Efektivní importovaný filtrační materiál výrazně zlepšuje účinek ochrany. Vhodné pro ochranu dýchacích cest, jako například: prach, minerální prášek, nelze použít pro ochranu před škodlivým plynem.




Funkce:

Lidské tělo inženýrství 3D Stereo design

Vícevrstvá netkané textilie a meltblown, celkem 4 vrstvy

Hliníkový pás drží tvar

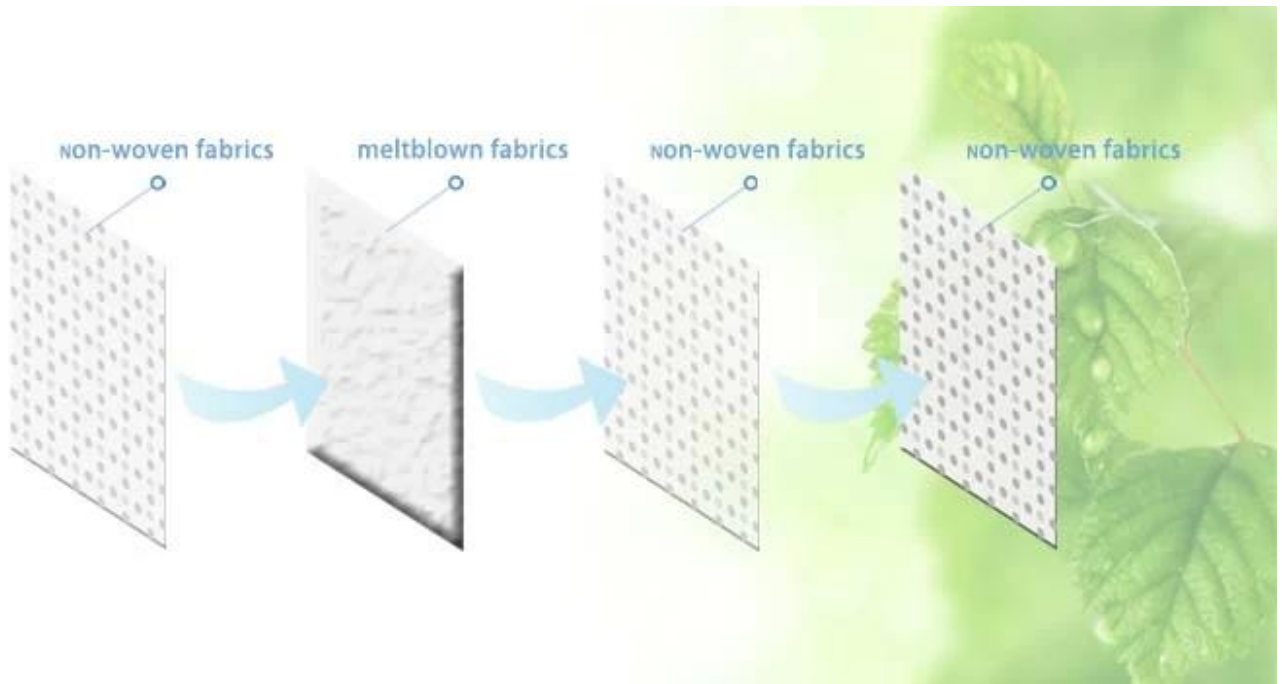

Příslušný obor

Masky mohou být použity k ochraně nemastných částic, snížit zápach některých organických sloučenin. To nejen včas izolovat bakterie, prachu ve vzduchu, opar, a může lépe chránit dýchací cesty, a pleť obličeje.

Nemastné částice: prach (minerální vlastnost, kovový prach vlákno prachu) pyl a opar, který lze použít k ochraně životního prostředí znečištění ovzduší jemné částice PM 2,5.

Nemůže být vhodný pro:

Respirátory neprodukuje kyslík, ne v kyslík-deficitní prostředí.

Warning:

Tento respirátor pomáhá chránit před některými částicemi, zneužití může mít za následek nemoc nebo smrt.



Kroky pro použití

Krok 1: vyberte správnou [respirátor](#) velikost, kterou jste namontoval.

Krok 2: Umístěte dlaně přes smyčky vašeho respirátor a pohár ji přes obličej.

Krok 3: Umístěte respirátor na pokrytí nosu a brady.

Krok 4: s jednou rukou drží respirátor, použijte druhou stranu umístit první popruh na temeno hlavy (nad uši), pak umístěte druhý popruh na zadní straně krku.

Krok 5: pomocí dvou prstů obou rukou, stiskněte dolů kovový kus podle obrysu vašeho nosu mostu. (nikdy špetka kovový kus!)

Krok 6: s oběma rukama přes respirátor, výdech silně kontrolovat únik kolem něj.

Krok 7: únik je evidentní, když se vaše vlasy pohybuje během silné výdechu. Pokud nosíte brýle, zamíření brýlí indikuje netěsnost.

Krok 8: je-li zjištěna netěsnost vzduchu, upravte respirátor, popruhy a nos kus před zkouškou znovu.



Odstranění respirátoru:

Krok 1: s oběma rukama, pomalu zvednout Spodní popruh z celého krku nahoru a přes hlavu.

Krok 2: Zvedněte horní popruh. Nedotýkejte se respirátoru.