

Čína výrobce 103v částic respirátor krk [maska](#)

1. respirátor má lepší design.
2. duální pevné popruhy, nastavitelný kovový nos kapela.
3. hladká vnitřní podšívka zajišťující bezpečné utěsnění.
4. vysoká filtrace a statická elektřina, aby odolaly normální toxické a Ting mikronů částic.




Funkce

Lidské tělo inženýrství 3D Stereo design

Vícevrstvá netkané textilie a meltblown, celkem 4 vrstvy

Hliníkový pás drží tvar

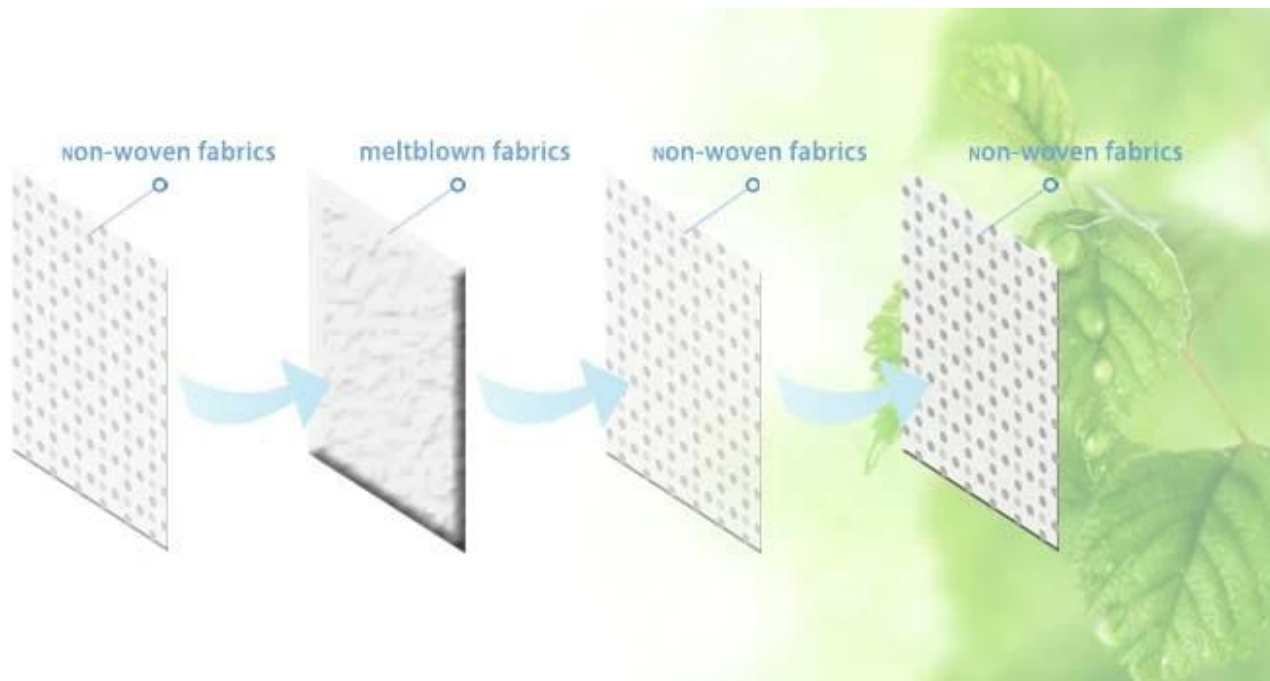

Příslušný obor

Masky mohou být použity k ochraně nemastných částic, snížit zápach některých organických sloučenin. To nejen včas izolovat bakterie, prachu ve vzduchu, opar, a může lépe chránit dýchací cesty, a pleť obličeje.

Nemastné částice: prach (minerální vlastnost, kovový prach vlákno prachu) pyl a opar, který lze použít k ochraně životního prostředí znečištění ovzduší jemné částice PM 2,5.

Nemůže být vhodný pro:

Respirátory neprodukuje kyslík, ne v kyslík-deficitní prostředí.

Upozornění:

Tento respirátor pomáhá chránit před některými částicemi, zneužití může mít za následek nemoc nebo smrt.



Kroky pro použití

Před uvedením do provozu proveďte hygienu rukou [maska](#).

Zvolte správnou velikost masky a ujistěte se, že nejsou žádné vady.

1. Držte 103v v dlani s hlavicí na dosah ruky, pověsit ušní popruhy volně pod rukou.

2. Umístěte 103v pod bradu s hlavicí nahoru.

Zatímco držíte 103v na místě, vytáhněte dva popruhy přes každé ucho.

3. a pak vytáhněte obruč na jiný popruh, aby to na místě na krku.

4. Pokud máte dlouhé vlasy, popruh musí být umístěn pod vlasy.

Umístěte 103v nízko na nose.

5. pomocí obou rukou, plísně hlavicí na tvar nosu tím, že tlačí dolů a ven.

Při pohybu prstů po obou stranách hlavicí.

6. proveďte kontrolu lícování umístěním obou rukou přes masku.

Dávejte pozor, abyste nenarušili pozici a vydechujte ostře.

Pokud se rozteče kolem nosu, upravte hlavicí tak, jak je popsáno v kroku 5.

Pokud se vzduch na okrajích masky nevrací, nastavte pásy zpět po stranách hlavy.

Proveďte kontrolu vhodnosti znovu, pokud je provedena úprava.

Si:

Noste správnou velikost [maska](#).

Kontrola fit je povinná pro všechny uživatele 103v masky a musí být provedena pokaždé, když na sobě.

Provést ruční hygienu after uvedení na masku.

