


Neuer Entwurf heißer verkaufender 102 Kopfschablonengroßverkauf in China.

Das [Maske](#) von 3-D-Design nach der Gesichtskontur, vermeiden Reibung mit der Nase und den Mund. Nasenclip mit jeder Form Design ist verbesserte Masken eine vollständige Palette von Dichtungsleistung. Effiziente importierte Filtermaterial stark verbessern den Schutzeffekt. Geeignet für Partikel Atemschutz, wie: Staub, Mineralpulver, kann nicht zum Schutz vor schädlichem Gas verwendet werden.



Eigenschaften:

3D-Stereo-Design des menschlichen Körpers
Multilayer-Vliesstoff und Meltblown, insgesamt 4 Schichten
Aluminium Gürtel Halt Form

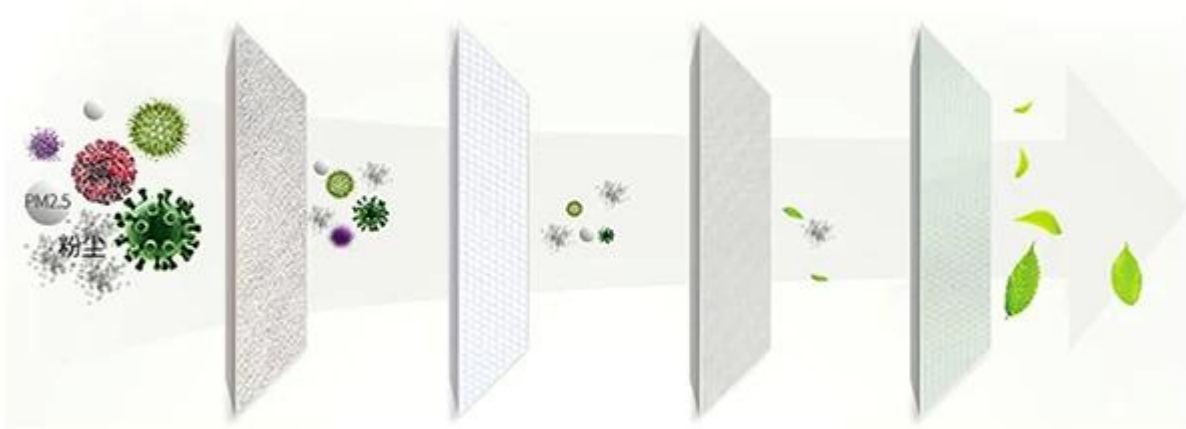

Anwendbarer Umfang

Masken können verwendet werden, um nicht ölige Partikel zu schützen und den Geruch einiger organischer Substanzen zu reduzieren.

Es ist nicht nur rechtzeitig, um Bakterien, Staub in der Luft, Dunst zu isolieren, und kann die Atemwege und Gesichtshaut besser schützen.

Nicht ölige particulates: Staub (Mineraleigenschaft, metallischer Staubfaserstaub) Pollen und Dunst, der benutzt werden kann, um Feinstaub der Umweltluftverschmutzung PM 2.5 zu schützen.

Kann nicht geeignet sein für:

Atemschutzmasken produzieren keinen Sauerstoff, nicht in sauerstoffarmer Umgebung.

Warning:

Dies [Respirator](#) schützt vor bestimmten Partikeln, Missbrauch kann zu Krankheit oder Tod führen.



Schritte für die Verwendung

Schritt 1: Wählen Sie die richtige aus [Respirator](#) Größe, die Sie angepasst wurden.

Schritt 2: Legen Sie Ihre Handfläche durch die Schlaufen Ihrer Atemschutzmaske und legen Sie sie über Ihr Gesicht.

Schritt 3: Positionieren Sie das Beatmungsgerät, um Nase und Kinn zu bedecken.

Schritt 4: Halten Sie mit einer Hand das Beatmungsgerät fest, legen Sie mit der anderen Hand das erste Band auf die Krone des Kopfes (über den Ohren) und legen Sie das zweite Band auf den Nacken.

Schritt 5: Drücken Sie mit zwei Fingern mit beiden Händen das Metallstück entsprechend der Kontur Ihrer Nasenbrücke nach unten. (NIEMALS DAS METALLTEIL NÄHEN!)

Schritt 6: Mit beiden Händen über das Beatmungsgerät ausatmen, um die Leckage zu überprüfen.

Schritt 7: Leckage ist offensichtlich, wenn sich Ihr Haar während des starken Ausatmens bewegt. Wenn Sie eine Brille tragen, deutet das Beschlagen der Brille auf Undichtigkeit hin.

Schritt 8: Wenn ein Luftleck festgestellt wird, Atemschutzgerät, Gurte und Nasenstück vor dem Test wieder einstellen.

