

Neues Design Hot Selling 102 Head Mask Großhandel in China.

Die Maske des 3-D-Designs nach der Gesichts-Kontur, vermeiden Sie Reibung mit thenose und Mund. Nase Clip mit einem Shape-Design wird erweitert Masken eine vollständige Palette der Abdichtung Leistung. Effizientes importierte Filter-Material verbessern den Schutz-Effekt erheblich. Geeignet für die Partikel-Atemwege, wie: Staub, Mineral-Pulver, kann nicht für den Schutz vor schädlichen Gas verwendet werden.




Features:

Human Body Engineering 3D Stereo Design

Mehrschichtige Gewebe und Meltblown, insgesamt 4 Schichten

Aluminium Gürtel Hold Shape

4 layers protection

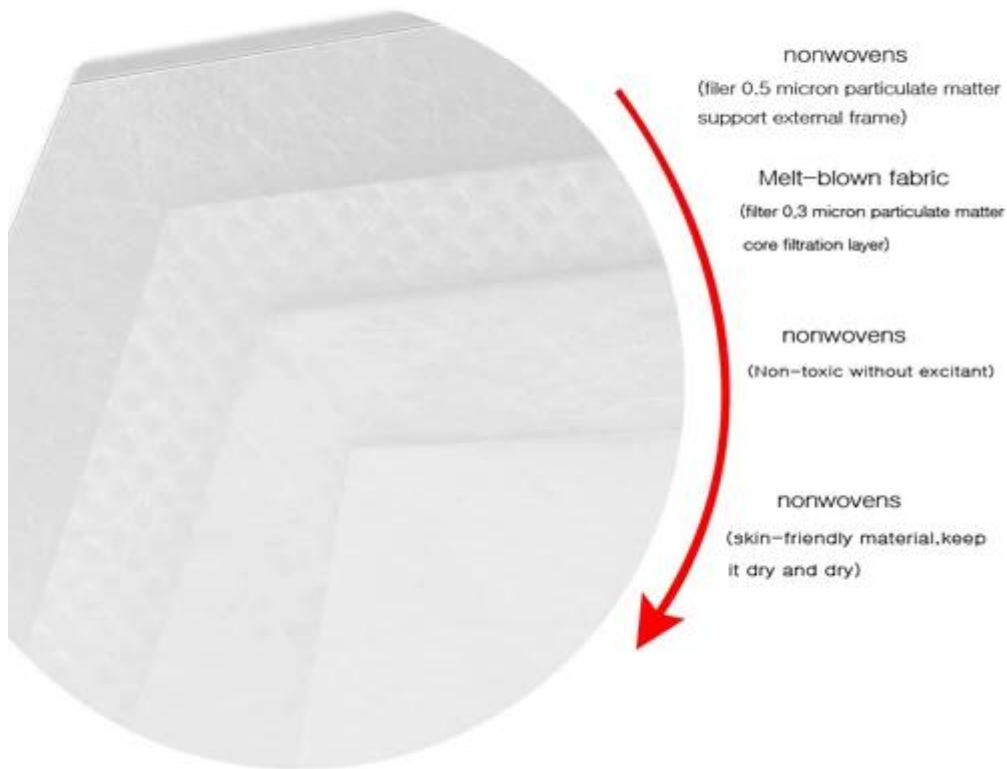

Anwendbares Geltungsbereich

Masken können verwendet werden, um nicht-Fette Partikel zu schützen, den Geruch einiger organische Verbindungen zu reduzieren.

Es nicht nur in der Zeit, Bakterien zu isolieren, Staub in der Luft, Dunst, und kann besser schützen die Atemwege, und Gesichts-Haut.

Non-Fette Partikel: Staub (Mineral-Eigenschaft, metallische Staub-Staub) Pollen und Dunst, die verwendet werden können, um Umwelt Luftverschmutzung Fine Particle pm 2,5.

Kann nicht geeignet für:

Die Atemwege produzieren keinen Sauerstoff, nicht in der Sauerstoff-mangelhaften Umgebung.

Warning:

Diese Atemwege schützt vor bestimmten Partikeln, Missbrauch kann zu Krankheit oder Tod führen.

Guard your family and your health

Prevention of UV rays Cool and comfortable

Suitable for a variety of occasions



Schritte für die Verwendung

Schritt 1: Wählen Sie die korrekte Größe der Atemwege, die Sie eingebaut waren.

Schritt 2: Platzieren Sie Ihre Handfläche durch die Schleifen Ihrer Atemwege und Tasse Sie über Ihr Gesicht.

Schritt 3: Positionieren Sie die Atemwege, um die Nase und Kinn zu decken.

Schritt 4: mit einer Hand halten die Atemwege, verwenden Sie die andere Hand, um den ersten Gurt auf die Krone des Kopfes (über den Ohren), dann platzieren Sie den zweiten Gurt auf die Rückseite des Halses.

Schritt 5: mit zwei Fingern beider Hände, drücken Sie die Metall-Stück nach der Kontur der Nase Brücke. (Never PINCH das Metal-Stück!)

Schritt 6: mit beiden Händen über die Atemwege, atmen Sie stark zu überprüfen, um Leckagen um ihn herum.

Schritt 7: Leckagen ist offensichtlich, wenn Ihr Haar bewegt sich während der starken atmen. Wenn Sie Gläser tragen, deutet Fogging der Gläser auslaufen.

Schritt 8: Wenn Air Leak bemerkt wird, justieren Sie Atemwege, Riemen, und Nase Stück vor dem Test wieder.



Um die Atemwege zu entfernen:

Schritt 1: mit beiden Händen, heben Sie langsam den unteren Gurt von um den Hals nach oben und über den Kopf.

Schritt 2: heben Sie den oberen Gurt. Berühren Sie nicht die Atemwege.