

Medexpro Thermometer bieten Sicherheit und Zuverlässigkeit [Temperatur](#) Lesungen. Ein akustischer Signalton signalisiert den abgeschlossenen Messvorgang, sobald Spitzentemperaturen erreicht sind. Ein automatischer Fieberalarm ertönt, wenn die Temperatur 37,8 °C (100 %) oder höher erreicht. Der zuletzt gemessene Messwert wird automatisch im Speicher gespeichert, so dass die Benutzer ihre Temperaturwerte problemlos verfolgen können. Die praktische automatische Abschaltfunktion verlängert die Lebensdauer der Batterie.

Produkt-Inhalt:

- 1 Thermometer
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 BBT Abdeckung
- 1 Aufbewahrungskoffer
- 1 Geschenkbox
- 5 Sondenabdeckungen



Produktzeichnung



Produktspezifikation

Produktname: [Digitales Thermometer JT002BT](#)

Stromversorgung: 1,5 DC, 1LR41 Knopfatterie.

Stromverbrauch: 0,1 MW

Batterielebensdauer: Etwa 1100 Messwerte (wenn für 10 Minuten pro Tag verwendet)

Sensoreinheit: Thermistor

Messmethode: Tatsächliche Messung

Temperaturanzeige: 3-stellig, + ° C (° F) in 0,1-Grad-Schritten

Messgenauigkeit: $\pm 0,05$ ° C (32 ° C-43 ° C)

$\pm 0,1$ ° F (89,60 ° F-109,40 ° F)

Messzeit: 2m

Messbereich: 32 ° C bis 43 ° C (89.6 ° F bis 109.40 ° F)

Nutzung Umgebung: Umgebungstemperatur: + 10 ° C bis + 40 ° C (50 ° F bis 104 ° F)

Lagerumgebung: -20 ° C bis + 60 ° C (-4 ° F bis 140 ° F)

Temp und Feuchtigkeit: Relative Luftfeuchtigkeit 30-95% RH

Gewicht ca. 15g (Batterie im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen: 20 mm (W) * 130 mm (l) * 13 mm (d)

Zubehör: Testbatterie (Alkaline-Magnesium Knopfatterie LR4), Aufbewahrungskoffer, Bedienungsanleitung.

Verpackung: 80pcs / CTN

CTN Größe: 331mm * 305mm * 260mm

Gebrauchsanweisung:

Schritt 1. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste neben dem LCD-Display. Ein Ton wird auf dem Bildschirm

angezeigt, gefolgt von der letzten Speichertemperatur.

Nach dem Anzeigen der Selbsttesttemperatur befindet sich das Thermometer nun im Testmodus.

* Hinweis: Wenn die gemessene Temperatur weniger als 32 ° C oder 90 ° C beträgt, zeigt das LCD Lo an. Wenn die gemessene Temperatur höher als 42.9 ° C oder 109.9 ° C ist, zeigt das LCD Hi an.




Schritt 2. Position Thermometer in gewünschter Position (Mund)

a) Mundgebrauch: Legen Sie das Thermometer unter die Zunge, wie in der Position "v" angegeben. Schließen Sie den Mund und atmen Sie gleichmäßig durch die Nase, um zu verhindern, dass die Messung durch die Ein- / Ausatemluft beeinflusst wird. Normale Temperatur zwischen 35,7 ° C und 37,3 ° C (96,3 % an

Schritt 3.

Das Gradzeichen blinkt während des gesamten Testvorgangs. Wenn das Blinken aufhört, ertönt ein Alarm für ca. 10 Sekunden. Der gemessene Messwert erscheint gleichzeitig auf dem LCD. Die minimale Messzeit bis zum Signalton (Piepton) muss ausnahmslos eingehalten werden. Die Messung wird auch nach der Summerbenachrichtigung fortgesetzt. Die angezeigte Temperatur ändert sich nicht, wenn das Thermometer aus seiner Testposition entfernt wird.

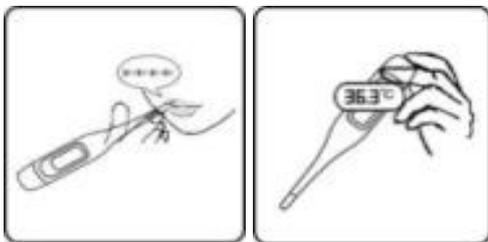

Schritt 4.

Um die Batterielebensdauer zu verlängern, drücken Sie die Ein / Aus-Taste, um das Gerät nach Abschluss des Tests auszuschalten. Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, schaltet sich das Gerät nach etwa 10 Minuten automatisch aus.

Bewahren Sie das Thermometer in seiner Schutzhülle auf.

