

Infrarot-Stirn-Thermometer für Körper, Gegenstände & Umgebungstemperatur

1 zweite Messung



Features

Die Medexpro JT004 Thermometer, weiter zu seiner Zuverlässigkeit, Genauigkeit und einfache Handhabung, erlaubt sanfte und nicht-invasive Messung der Körpertemperatur ohne Berührung des Patienten.


1 Sekunden

Schnelle und schonende Messung in nur 3 Sekunden.

3 in 1

Multifunktionale

Messung der Stirn, Gegenstände und Umgebungstemperatur in Sekunden.

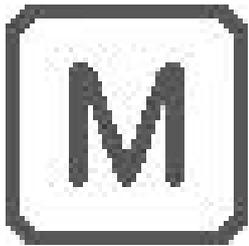

30 Datenspeicher

Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte mit Datum und Uhrzeit.



Spezifikation:

Touch-Free Messung in nur 1 Sek.

Multifunktionale (Körper, Objekt und Umgebungstemperatur)
Tracking Light-für einfachen Gebrauch auch bei Nacht

Klinisch getestet und empfohlen von Ärzten
Silent Glow™-Technologie und Fieber Alarm

Große beleuchtete Anzeige mit Datum und Uhrzeit
30 Datenspeicher (gespeichert mit Datum/Uhrzeit)

Sound Control (ein/aus)
Optional: Storage Case oder Storage Bag

Mod. Nr.: NC 150

Größe: 141,1 x 43,3 x 36,9 mm

Gewicht: 90 g (mit Akku), 67G (ohne Akku)

Messbereich: 0-100,0 ° c


Messgenauigkeit: $\pm 0,2$ ° c zwischen 36,0 und 39,0 ° c

Batterie: 2 x 1,5 V Alkaline Batterien, Größe AAA

Gebrauchsanweisung:


Schritt 1:

Sie können die Mode-Taste drücken, um den Modus zwischen Stirn-Modus und Objekt-Modus umzuschalten. Drücken Sie die Power-Taste oder die Start-Taste, nach dem Anzeigen des Vollbildmodus, das Thermometer ist jetzt bereit für eine neue Messung. Wenn ein ungewöhnliches auftritt, wird der ER1 oder Er2 angezeigt.

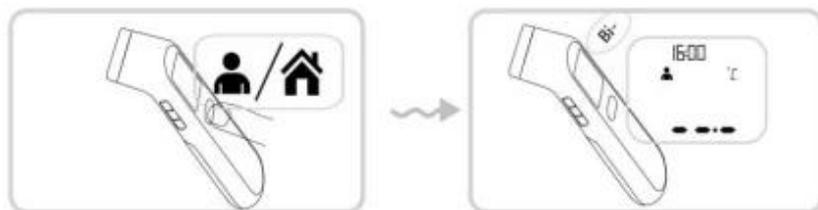

Schritt 2:

Die zeitliche Arterie ist über die Carotis Arterie mit dem Herzen verbunden. So ist es entworfen, um die Haut Oberfläche um temporale Arterie, eine wichtige Arterie des Kopfes zu messen. Richten Sie das Thermometer in die Mitte der Stirn mit einer Entfernung von 2 bis 3 cm und drücken Sie die Start-Taste. Hinweis: Entfernen Sie das Thermometer nicht von der Stirn, bevor Sie den abschließenden Signalton hören.

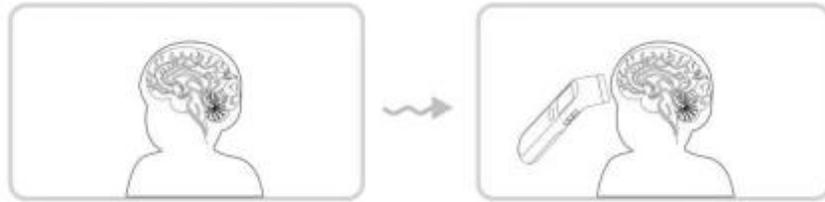

Schritt 3:

Lesen Sie die Temperatur auf dem Display.

1. wenn die Temperatur Lesung unterhalb $37,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($100,0\text{ }^{\circ}\text{F}$), wird ein glückliches Gesicht neben der Lektüre angezeigt.
2. wenn die Temperatur-Lesung $37,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($100,0\text{ }^{\circ}\text{F}$) oder höher ist, wird ein schlechtes Gesicht neben der Lesung angezeigt.



Schritt 4:

Um die Batteriebensdauer zu verlängern, drücken Sie die Power-Taste, um die Einheit nach Abschluss des Tests zu deaktivieren. Wenn keine Aktion ausgeführt wird, wird das Gerät nach ca. 1 Minute automatisch abgeschaltet.

Bewahren Sie das Thermometer in seinem schützenden Fall auf.