

Perfect Design in China VT103 Neck Mask Hersteller

- Einzigartiges Shape-Design ermöglicht niedrige Profile und gute Passform
- Verbesserter Tragekomfort durch leicht einstellbare Nose Bridge
- Hohe Dichte und hohe Zersetzung-Maske für PM 2.5




Features

Human Body Engineering 3D Stereo Design

Mehrschichtige Gewebe und Meltblown, insgesamt 4 Schichten

Aluminium Gürtel Hold Shape

4 layers protection

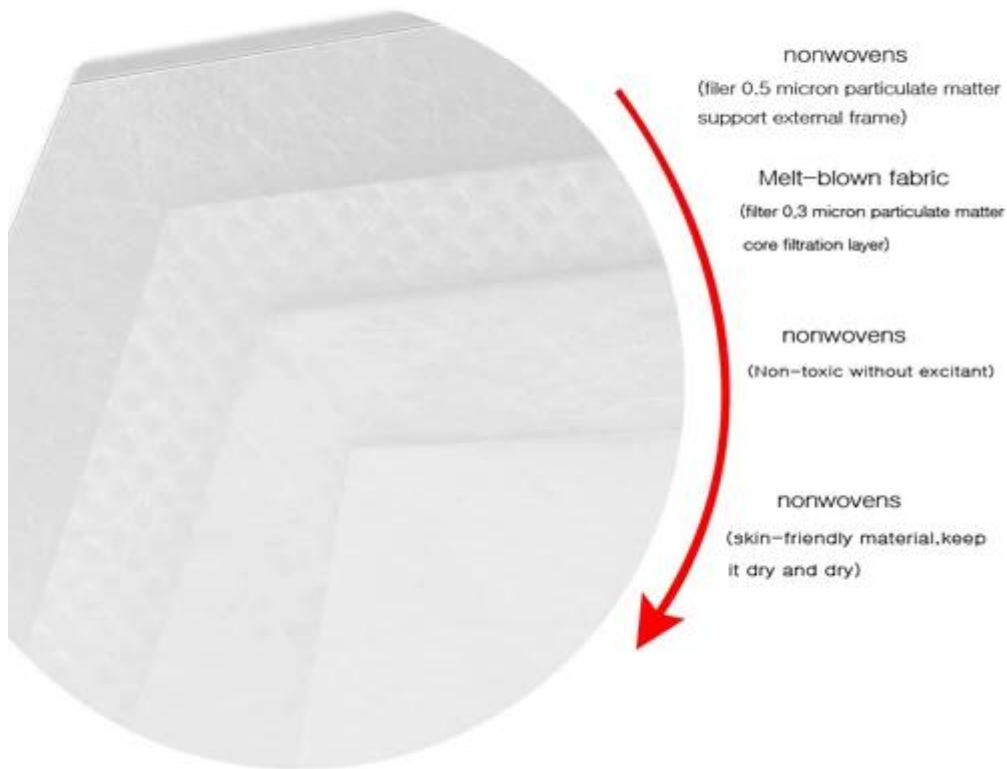

Einschränkungen und Warnungen verwenden

1. der Träger muss zuerst in der korrekten Verwendung ausgebildet und fit getestet werden, bevor Sie diese respirator.
- 2.do verwenden diese Atemwege nicht, wenn die Konzentrationen von Verunreinigungen sofort gefährlich für das Leben oder die Gesundheit sind.
3. lassen Sie den contaminated Bereich sofort, wenn die Atmung schwierig wird, oder Schwindel oder andere Notlage auftritt.
4. verwerfen und ersetzen Sie die Atemwege, wenn Sie beschädigt wird oder die Atmung Widerstand wird übermäßig.
5. untersuchen Sie die Atemwege vor jeder Verwendung, um sicherzustellen, dass Sie in guter Arbeit condition. Untersuchen Sie alle Teile der Atemwege auf Anzeichen von Beschädigungen, einschließlich der beiden Riemen, noseclip und Klammern.
- 6.do nicht ändern, waschen, missbrauchen oder missbrauchen diese Atemwege.
- 7.do nicht mit Bart oder anderen Gesichts-Haare oder andere Bedingungen, die ein gutes Siegel zwischen dem Gesicht und der Abdichtung Kante der Atemwege zu verhindern.

Warnung:

Diese Atemwege schützt vor bestimmten Partikeln, Missbrauch kann zu Krankheit oder Tod führen.

No longer do the human vacuum cleaner



Schritte für die Verwendung

Stellen Sie die Hand Hygiene vor dem setzen auf Maske.

Wählen Sie die korrekte Größe der Maske aus und stellen Sie sicher, dass keine Defekte vorhanden sind.

1. halten Sie die VT103 in Ihrer Handfläche mit dem Revolverscheibe an den Fingerspitzen, hängen Ohr Bänder frei unterhalb der Hand.

2. Positionieren Sie die 103V unter dem Kinn mit dem Revolverscheibe aufwärts.

Wenn Sie die VT103 halten, ziehen Sie die beiden Riemen über jedes Ohr.

3. und ziehen Sie dann den Reifen zu einem anderen Gurt, machen es an der Stelle auf dem Hals.

4. Wenn Sie lange Haare haben, muss der Gurt unter dem Haar positioniert werden.

Positionieren Sie die VT103 niedrig auf der Nase.

5. mit beiden Händen, Schimmel die Revolverscheibe auf die Form der Nase durch Schieben nach unten und nach außen.

Während Sie Ihre Fingerspitzen auf beiden Seiten des Revolverscheibe.

6. führen Sie eine fit-Prüfung durch die Platzierung beider Hände vollständig über die Maske.

Achten Sie darauf, die Position nicht zu stören und scharf zu atmen.

Wenn airlecks um die Nase herum, passen Sie die Revolverscheibe wie in Schritt 5 beschrieben.

Wenn die Luft an der Maske Kanten leckt, passen Sie die Riemen an den Seiten des Kopfes zurück.

Passen Sie wieder fit Check, wenn eine Berichtigung vorgenommen wird.

Denken Sie daran:

Tragen Sie die Rechte Größe Maske

Fit Check ist obligatorisch für alle Benutzer der VT103 Maske und muss jedes Mal nach dem tragen durchgeführt werden.

Führen Sie hygieneafter durch die Maske aus.

