

Nueva venta caliente de la cabeza de la máscara 102 del diseño al por mayor en China.


La máscara del diseño tridimensional según el contorno facial, evita la fricción con la nariz y la boca. El clip de la nariz con cualquier diseño de la forma es máscaras realizadas una gama completa del funcionamiento del lacre. El material importado eficiente del filtro mejora grandemente el efecto de la protección. Conveniente para la protección respiratoria de la partícula, por ejemplo: el polvo, polvo mineral, no se puede utilizar para la protección contra el gas dañoso.



Características:

Diseño estéreo 3D de ingeniería de cuerpo humano
Multicapa no tejidas de tela y melblown, total de 4 capas
Forma del asimiento de la correa de aluminio

4 layers protection

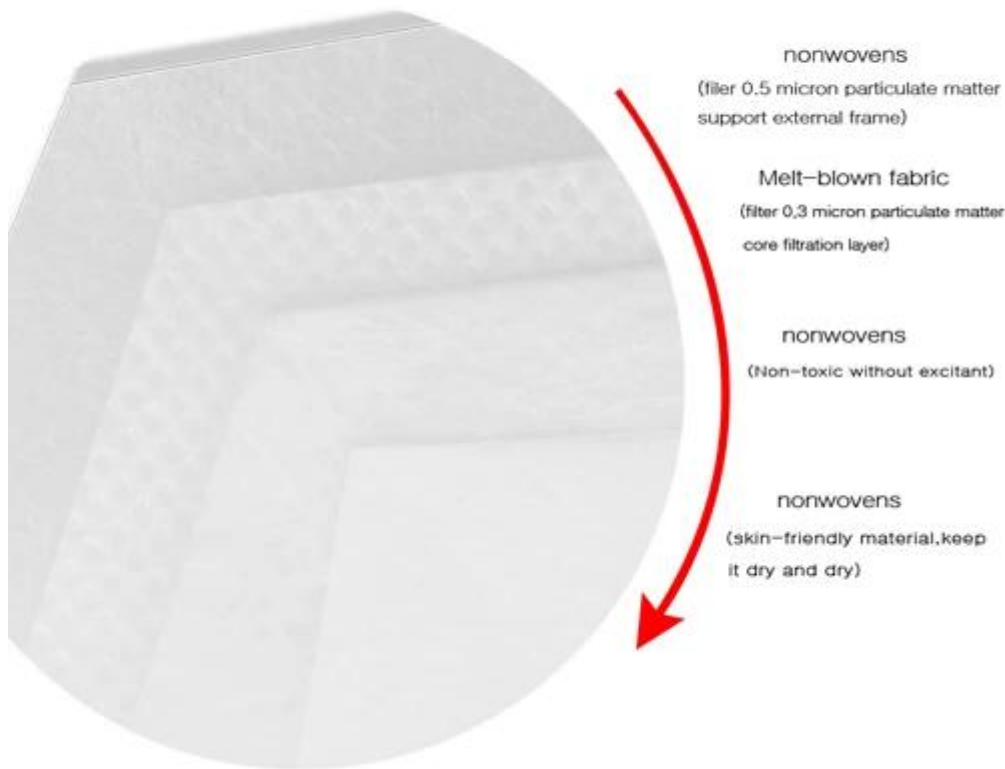

Alcance aplicable

Las máscaras se pueden utilizar para proteger las partículas no aceitosas, reducen el olor de algunos compuestos orgánicos.

No sólo a tiempo para aislar las bacterias, el polvo en el aire, la neblina, y puede proteger mejor el tracto respiratorio, y la piel facial.

Partículas no aceitosas: polvo (característica mineral, polvo metálico de la fibra del polvo) polen y calina, que puede ser usado para proteger el ambiente de la partícula fina de la contaminación atmosférica p.m. 2,5.

No puede ser adecuado para:

Los respiradores no producen oxígeno, no en un ambiente con deficiencia de oxígeno.

Warning:

Este respirador ayuda a proteger contra ciertas partículas, el uso incorrecto puede resultar en enfermedad o la muerte.

Guard your family and your health

Prevention of UV rays Cool and comfortable

Suitable for a variety of occasions



Pasos para el uso

Paso 1: seleccione el tamaño correcto del respirador que usted fue cabido.

Paso 2: Coloque la palma de la mano a través de los bucles de su respirador y colóquelo sobre su cara.

Paso 3: Coloque el respirador para cubrir la nariz y la barbilla.


Paso 4: con una mano sosteniendo el respirador, use la otra mano para colocar la primera correa sobre la corona de la cabeza (encima de las orejas), luego coloque la segunda correa en la parte posterior del cuello.

Paso 5: usando dos dedos de ambas manos, presione la pieza metálica según el contorno de su puente nasal. (i nunca pellizque la pieza metálica!)

Paso 6: con ambas manos sobre el respirador, Exhale fuertemente para comprobar si hay fugas a su alrededor.

Paso 7: las fugas son evidentes cuando el cabello se mueve durante la exhalación fuerte. Si usa anteojos, el empañamiento de los anteojos indica fugas.

Paso 8: si se observa una fuga de aire, ajuste el respirador, las correas y la pieza de la nariz antes de volver a probar.

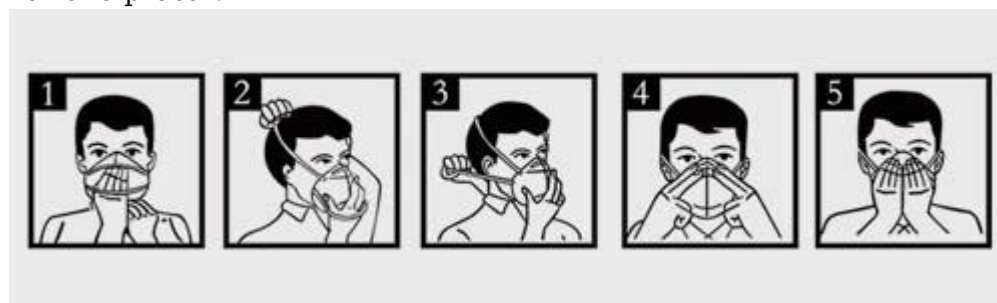

Para quitar el respirador:

Paso 1: con ambas manos, levante lentamente la correa inferior alrededor de su cuello hacia arriba y sobre su cabeza.

Paso 2: Levante la correa superior. No toque el respirador.