

Termómetro infrarrojo de la frente para el cuerpo, objetos y temperatura ambiente

1 segunda medición



Características

El termómetro JT004 Medexpro, más allá de su fiabilidad, precisión y fácil manejo, permite una medición suave y no invasiva de la temperatura corporal sin tocar al paciente.

1 segundo

Medición rápida y suave en sólo 3 segundos.

3 in 1

Multifuncional

Medición de la frente, objetos y temperatura ambiente en cuestión de segundos.



30 memoria de datos

Almacenamiento automático de los últimos 30 valores de medición con fecha y hora.



Especificación:

Medición sin contacto en sólo 1 seg.

Multifuncional (cuerpo, objeto y temperatura ambiente)
Luz de seguimiento-para el uso fácil también en la noche

Clínicamente probado y recomendado por los doctores
Tecnología silenciosa Glow™ y alarma de fiebre

Pantalla grande iluminada con fecha y hora
30 memoria de datos (almacenada con fecha/hora)

Control de sonido (encendido/apagado)
Opcional: caja de almacenaje o bolso del almacenaje

Mod. No.: NC 150

Tamaño: 141,1 x 43,3 x 36,9 milímetro

Peso: 90 (con la batería), 67 (batería de w/o)

Gama de medición: 0-100,0 ° c


Exactitud de la medida: $\pm 0,2$ ° c entre 36,0 y 39,0 ° c

Batería: 2 baterías alcalinas de x 1,5 V, tamaño AAA

Instrucciones para el usuario:


Paso 1:

Puede pulsar el botón MODE para cambiar el modo entre el modo de frente y el modo de objeto. Pulse el botón de encendido o el botón Start, después de mostrar la pantalla completa, el termómetro está listo para una nueva medición. Si hay un anormal, aparece el ER1 o el Er2.

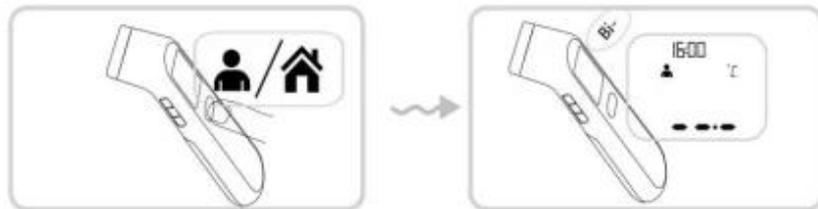

Paso 2:

La arteria temporal está conectada al corazón a través de la arteria carótida. Se diseña tan para medir la superficie de la piel alrededor de la arteria temporal, una arteria importante de la cabeza. Apunte el termómetro en el centro de la frente con una distancia de 2 a 3 cm y luego presione el botón START (Inicio). Nota: no retire el termómetro de la frente antes de escuchar el pitido final.

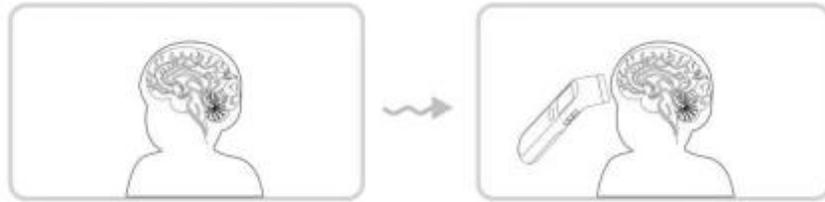

Paso 3:

Lea la temperatura en la pantalla.

1. Si la lectura de la temperatura está debajo de $37,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($100,0\text{ }^{\circ}\text{F}$), una cara feliz será exhibida al lado de la lectura.
2. Si la lectura de la temperatura es $37,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($100.0\text{ }^{\circ}\text{F}$) o superior, se mostrará una mala cara junto a la lectura.



Paso 4:

Para prolongar la duración de la batería, presione el botón de encendido para apagar la unidad después de haber completado las pruebas. Si no se toma ninguna acción, la unidad se apagará automáticamente después de aproximadamente 1 minuto.

Guarde el termómetro en su estuche protector.