


## Nuevo diseño máscara del cuello VT103 venta al por mayor en China

- El diseño único de la forma permite el perfil bajo y el buen ajuste
- Comodidad mejorada debido al puente fácilmente ajustable de la nariz
- Mascarilla de alta densidad y alta degradación para PM 2.5



### Características

- Diseño estéreo 3D de ingeniería de cuerpo humano
- Multicapa no tejidas de tela y meltblown, total de 4 capas
- Forma del asimiento de la correa de aluminio

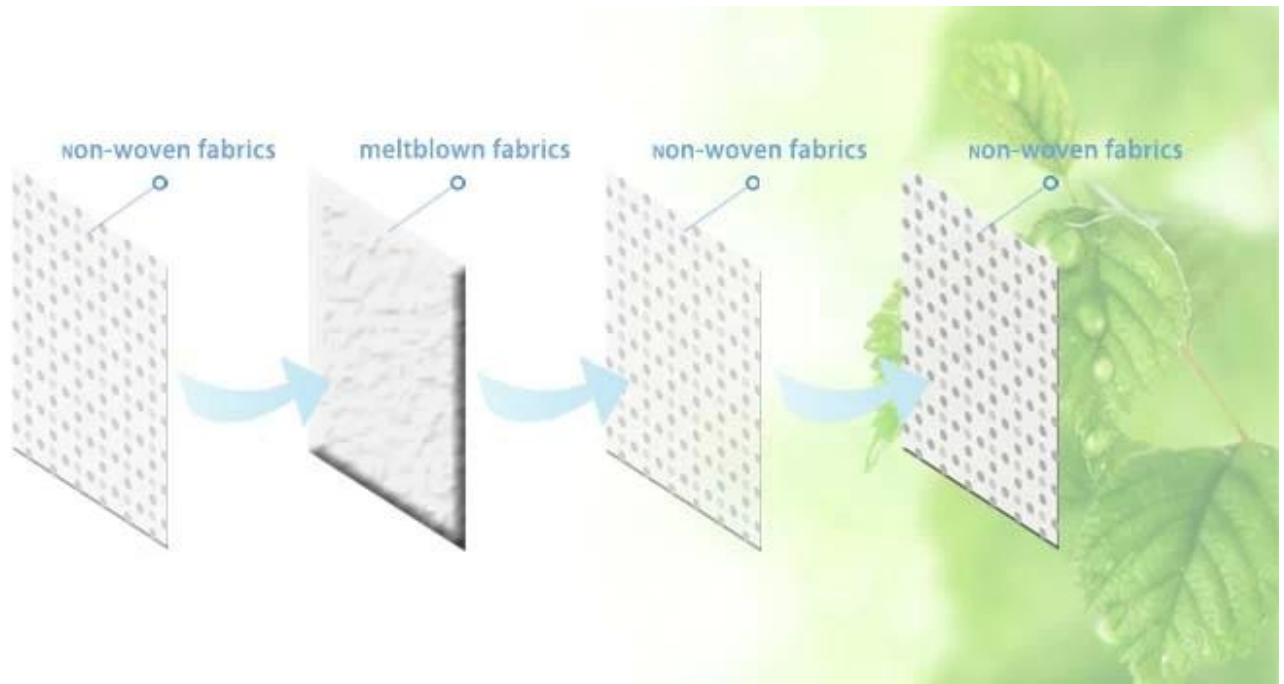

## Usar limitaciones y advertencias

1. el usuario debe primero ser entrenado en el uso y el ajuste apropiados probados antes de usar este respirator.
2. do no utilice este [respirador](#) Cuando las concentraciones de contaminantes son inmediatamente peligrosas para la vida o la salud.
3. deje el área de contaminada inmediatamente si la respiración se dificulta, o se produce mareos u otras angustias.
4. Deseche y reemplace el respirador si se daña o la resistencia a la respiración se vuelve excesiva.
5. Inspeccione el respirador antes de cada uso para asegurarse de que esté en buen funcionamiento. Examine todas las partes del respirador para detectar daños, incluyendo las dos correas, Noseclip y grapas.
6. do no altere, lave, abuse o use este respirador.
7. do no utilice con barbas u otros vellos faciales u otras afecciones que impidan un buen sellado entre la cara y el borde de sellado del respirador.


### **ADVERTENCIA:**

**Este respirador ayuda a proteger contra ciertas partículas, el uso incorrecto puede resultar en enfermedad o la muerte.**

# Guard your family and your health

Prevention of UV rays      Cool and comfortable

Suitable for a variety of occasions

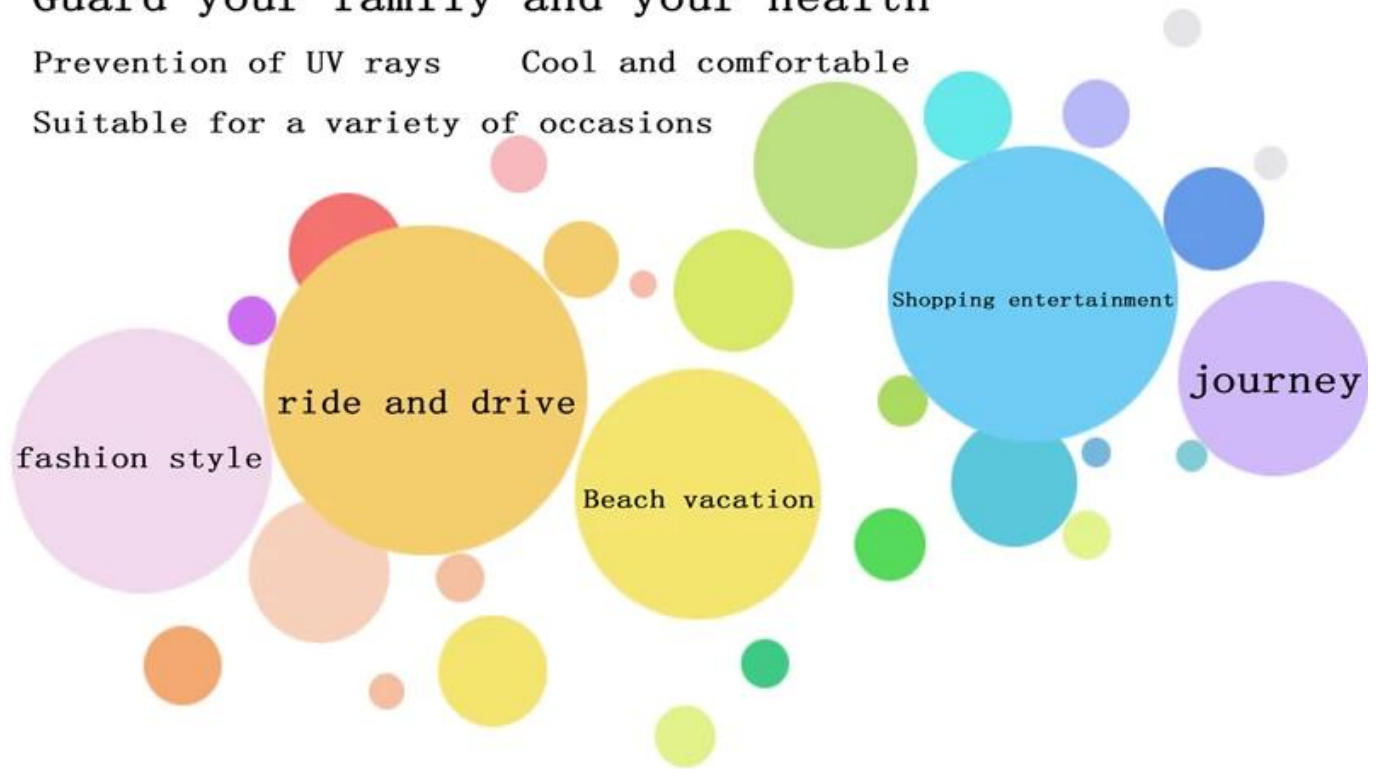

## Pasos para el uso

Realice la higiene de la mano antes de poner [máscara](#).

Elija el tamaño correcto de la mascarilla y asegúrese de que no haya defectos.

1. Sostenga el VT103 en su palma con la punta al alcance de las manos, cuelgue las correas para los oídos libremente debajo de la mano.

2. Coloque el 103v debajo de la barbilla con la punta hacia arriba.

Mientras sostiene el VT103 en su lugar, tire de las dos correas sobre cada oreja.

3. y luego tirar del aro a otra correa, hacerlo en su lugar en el cuello.

4. Si tiene el pelo largo, la correa debe colocarse debajo de su cabello.

Coloque el VT103 bajo en la nariz.

5. Usando ambas manos, moldee la boquilla a la forma de su nariz empujando hacia abajo y hacia afuera.

Mientras mueve los dedos hacia abajo por ambos lados de la boquilla.

6. Realice un control de ajuste colocando ambas manos completamente sobre la mascarilla.

Tenga cuidado de no molestar la posición y exhale bruscamente.

Si hay fugas de agua alrededor de la nariz, ajuste la boquilla como se describe en el paso 5.

Si hay fugas de aire en los bordes de la mascarilla, ajuste las correas hacia atrás a lo largo de los lados de la cabeza.

Realice la comprobación de ajuste de nuevo si se realiza un ajuste.

## Recuerdo:

Usar la máscara de tamaño adecuado

El ajuste check es obligatorio para todos los usuarios de VT103 Mask y debe realizarse cada vez que se use.

Realice la hygieneafter de la mano que pone la máscara.

