

Medexpro proporciona de calidad superior [máscaras](#) que se pueden imprimir **logo**. Si usted está interesado, la investigación de los pls yo.


Nuestras máscaras son todo el diseño 3D y hay seis clases.



Artículos de clientes

El producto personalizado en sí pertenece a la particularidad. Después de confirmar la muestra personalizada, el producto no puede ser cambiado. Se sugiere confirmar la información con el servicio de atención al cliente antes de la producción.

The filtration effect of non oil particulate matter was at least 96.7%

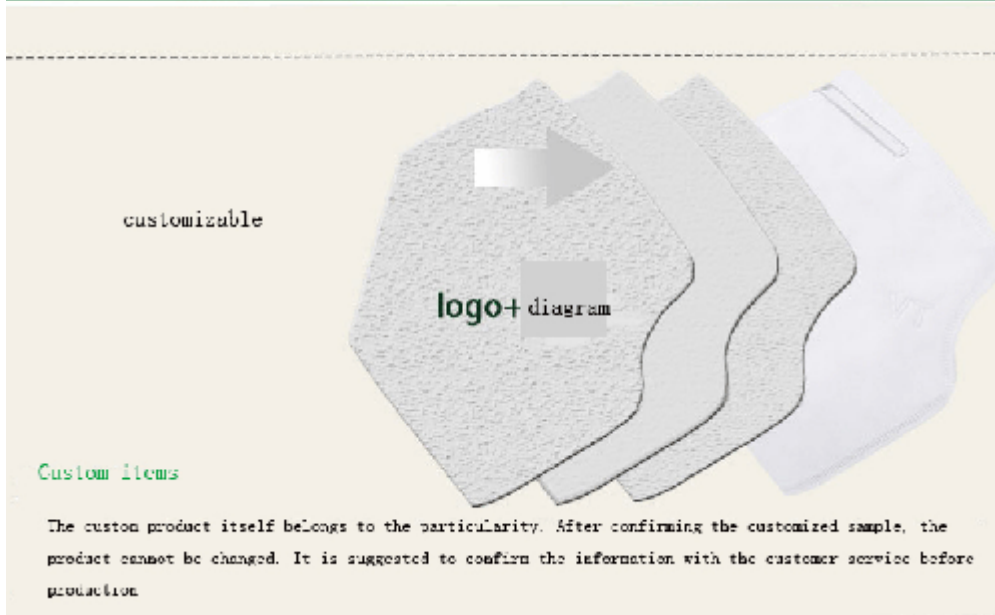

Pasos para el uso

Realice la higiene de las manos antes de colocar la mascarilla.

Elija el tamaño correcto de la mascarilla y asegúrese de que no haya defectos.

1. Sostenga el VT103 en la palma de la mano con la boquilla a la yema de los dedos, cuelgue las correas del oído libremente por debajo de las manos.

2. Coloque el 103v debajo de la barbilla con la boquilla hacia arriba.

Mientras sostiene el VT103 en su lugar, tire de las dos correas sobre cada oreja.

3. y después tire del aro a otra correa, haga en el lugar en el cuello.

4. Si usted tiene el pelo largo, la correa se debe colocar debajo de su pelo.

Coloque el VT103 bajo en su nariz.

5. Usando ambas manos, moldee la boquilla a la forma de su nariz empujando hacia abajo y hacia afuera.

Mientras mueve las yemas de los dedos por ambos lados de la boquilla.

6. Realice una verificación de ajuste colocando ambas manos completamente sobre la mascarilla. Tenga cuidado de no perturbar la posición y exhale bruscamente.

Si hay fugas de agua alrededor de la nariz, ajuste la boquilla como se describe en el paso 5.

Si hay fugas de aire en los bordes de la mascarilla, ajuste las correas hacia atrás a lo largo de los lados de la cabeza.

Realice la comprobación de ajuste de nuevo si se realiza un ajuste.



Fabricante profesional de máscara con bastante en la acción.