


China fabricante 103v particulado respirador cuello [máscara](#)

1. el respirador tiene un mejor diseño.
2. correas fijas duales, venda ajustable de la nariz del metal.
3. forro interior liso asegurando un sello seguro.
4. alta filtración y material estático de la electricidad para resistir la partícula tóxica normal y del micrón del Ting.



Características

Diseño estéreo 3D de ingeniería de cuerpo humano
Multicapa no tejidas de tela y meltblown, total de 4 capas
Forma del asiento de la correa de aluminio

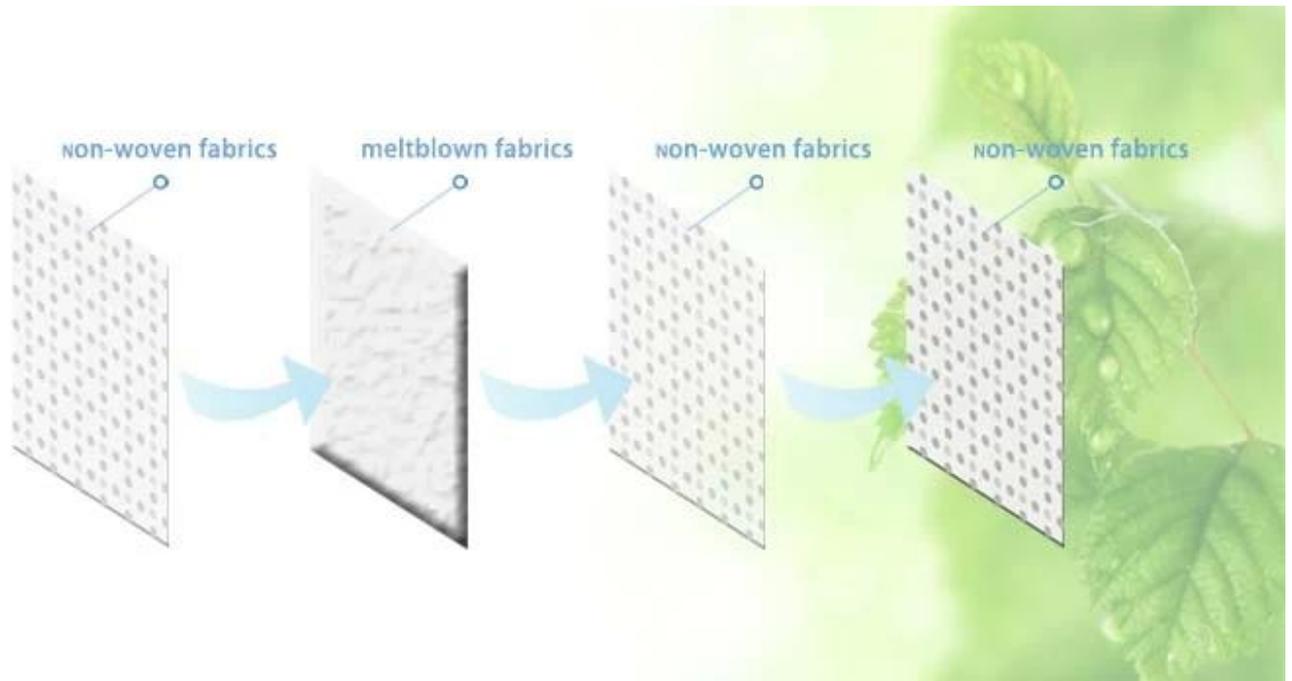

Alcance aplicable

Las máscaras se pueden utilizar para proteger las partículas no aceitosas, reducen el olor de algunos compuestos orgánicos.

No sólo a tiempo para aislar las bacterias, el polvo en el aire, la neblina, y puede proteger mejor el tracto respiratorio, y la piel facial.

Partículas no aceitosas: polvo (característica mineral, polvo metálico de la fibra del polvo) polen y calina, que puede ser usado para proteger el ambiente de la partícula fina de la contaminación atmosférica p.m. 2,5.

No puede ser adecuado para:

Los respiradores no producen oxígeno, no en un ambiente con deficiencia de oxígeno.

ADVERTENCIA:

Este respirador ayuda a proteger contra ciertas partículas, el uso incorrecto puede resultar en enfermedad o la muerte.



Pasos para el uso

Realice la higiene de la mano antes de poner [máscara](#).

Elija el tamaño correcto de la mascarilla y asegúrese de que no haya defectos.

1. Sostenga el 103v en su palma con la punta al alcance de las manos, cuelgue las correas para los oídos libremente debajo de la mano.

2. Coloque el 103v debajo de la barbilla con la punta hacia arriba.

Mientras sostiene el 103v en su lugar, tire de las dos correas sobre cada oreja.

3. y luego tirar del aro a otra correa, hacerlo en su lugar en el cuello.

4. Si tiene el pelo largo, la correa debe colocarse debajo de su cabello.

Coloque el 103v bajo en la nariz.

5. Usando ambas manos, moldee la boquilla a la forma de su nariz empujando hacia abajo y hacia afuera.

Mientras mueve los dedos hacia abajo por ambos lados de la boquilla.

6. Realice un control de ajuste colocando ambas manos completamente sobre la mascarilla.

Tenga cuidado de no molestar la posición y exhale bruscamente.

Si hay fugas de agua alrededor de la nariz, ajuste la boquilla como se describe en el paso 5.

Si hay fugas de aire en los bordes de la mascarilla, ajuste las correas hacia atrás a lo largo de los lados de la cabeza.

Realice la comprobación de ajuste de nuevo si se realiza un ajuste.

Recuerdo:

Use el tamaño adecuado [máscara](#)

El ajuste check es obligatorio para todos los usuarios de 103v Mask y debe realizarse cada vez que se use.

Realice la higieneafter de la mano que pone la máscara.

