

Thermomètre frontal infrarouge pour corps, objets et température ambiante

1 seconde mesure



### **Caractéristiques**

Le thermomètre Medexpro JT004, à la suite de sa fiabilité, de sa précision et de sa maniabilité facile, permet une mesure douce et non invasive de la température corporelle sans toucher le patient.


1 seconde

Mesure rapide et douce en seulement 3 secondes.

# 3 in 1

Multifonctionnel

Mesure du front, des objets et de la température ambiante en quelques secondes.

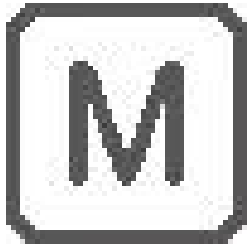

30 mémoire de données

Stockage automatique des 30 dernières valeurs de mesure avec date et heure.



## Spécification:

Mesure sans contact en seulement 1 sec.

Multifonctions (corps, objet et température ambiante)  
Tracking Light-pour une utilisation facile aussi la nuit

Testé cliniquement et recommandé par les médecins  
Technologie silencieuse Glow™ et alarme de fièvre

Grand affichage éclairé avec la date et l'heure  
30 mémoire de données (stockée avec date/heure)

Contrôle du son (on/off)  
Optionnel: étui de rangement ou sac de rangement

Mod. No.: NC 150

Taille: 141,1 x 43,3 x 36,9 millimètre

Poids: 90 (avec la batterie), 67 (w/o batterie)

Plage de mesure: 0-100,0 ° c


Précision de mesure:  $\pm 0,2$  ° c entre 36,0 et 39,0 ° c

Batterie: 2 x 1,5 V piles alcalines, taille AAA

## Instructions de l'utilisateur:

Etape 1:

Vous pouvez appuyer sur le bouton mode pour commuter le mode entre le mode frontal et le mode objet. Appuyez sur le bouton d'alimentation ou le bouton de démarrage, après avoir affiché l'écran plein, le thermomètre est maintenant prêt pour une nouvelle mesure. S'il y a un anormal, le ER1 ou ER2 apparaît.

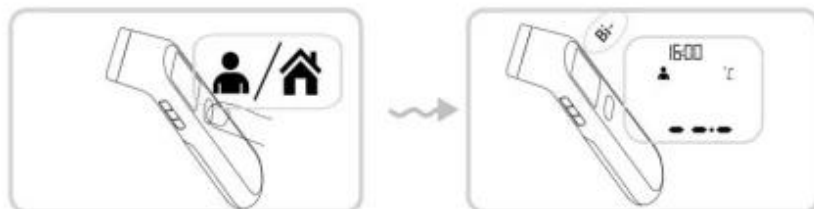

Etape 2:

L'artère temporale est reliée au coeur par l'artère carotide. Ainsi, il est conçu pour mesurer la surface de la peau autour de l'artère temporale, une artère majeure de la tête. Viser le thermomètre au centre du front avec une distance de 2 à 3 cm, puis appuyer sur le bouton Start. Remarque: ne pas retirer le thermomètre du front avant d'entendre le bip final.



Etape 3:

Lire la température sur l'afficheur.

1. Si la température de lecture est inférieure à 37,8 °C (100,0 °F), un visage heureux sera affiché à côté de la lecture.
2. Si la température est de 37,8 °C (100,0 °F) ou plus, un mauvais visage sera affiché à côté de la lecture.



Etape 4:

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil une fois le test terminé. Si aucune action n'est prise, l'appareil s'éteindra automatiquement après environ 1 minutes.

Ranger le thermomètre dans son étui de protection.