

Caractéristiques:

Jumbo LCD

Précision: ± 0.05 °C (± 0 °F)

Alarme de fièvre

Mémoire de dernière lecture

Embout rigide

Indicateur de batterie faible

Arrêt automatique

Conçu pour une utilisation orale




Instructions de l'utilisateur:

1. Appuyez sur le bouton on/off à côté de l'afficheur LCD. Une tonalité retentira pendant que l'écran s'affiche, suivi de la dernière température de la mémoire.

Après avoir montré la température d'auto-test, le thermomètre est maintenant en mode d'essai.

* Remarque: si la température mesurée est inférieure à 32 °C ou 90 °F, l'écran ACL affiche LO, si la température mesurée est supérieure à 42,9 °C ou 109,9 °F, l'écran ACL affiche Hi.

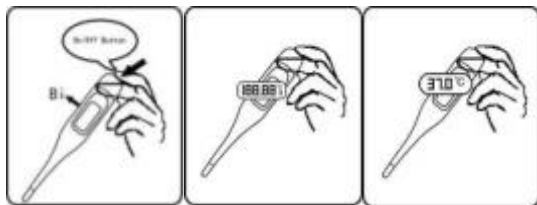


Step2. Positionner le thermomètre à l'endroit désiré (bouche)

(a) utilisation orale: placer le thermomètre sous la languette comme indiqué par la position "√". Fermez la bouche et respirez uniformément à travers le nez pour éviter que la mesure ne soit influencée par l'air inhalé/expiré. Température normale entre 35,7 °C et 37,3 °C (96 °F et 99,1 °F)

3.

Le signe de degré clignote tout au long du processus de test. Lorsque le clignotant s'arrête, une alarme émet un bip pendant environ 10 secondes. La lecture mesurée apparaîtra simultanément sur l'écran ACL. Le temps de mesure minimum jusqu'à ce que la tonalité de signalisation (bip) doit être maintenue sans exception. La mesure continue même après la notification du buzzer. La température affichée ne changera pas lorsque le thermomètre est retiré de sa position d'essai.

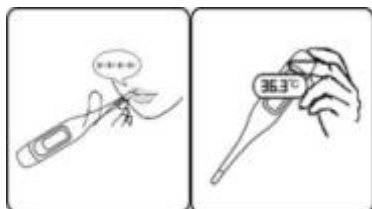

4.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil après l'achèvement du test. Si aucune action n'est prise, l'appareil s'arrêtera automatiquement après 10 minutes.

Ranger le thermomètre dans son étui de protection.

