



## Nuova vendita all'ingrosso di maschera di testa 102 di vendita calda in Cina.

Il [maschera](#) di design 3-D in base al contorno del viso, evitare l'attrito con thenose e mouth. Nose clip con qualsiasi disegno di forma è migliorata maschere una gamma completa di prestazioni di tenuta .Efficiente materiale filtrante importato notevolmente migliorare l'effetto di protezione. Adatto per la protezione delle vie respiratorie delle particelle, come: polvere, polvere minerale, non può essere utilizzato per la protezione da gas nocivi.



### Caratteristiche:

Progettazione stereo 3D del corpo umano  
Tessuto non tessuto multistrato e soffiato a fusione, totale 4 strati  
Forma di tenuta della cintura in alluminio

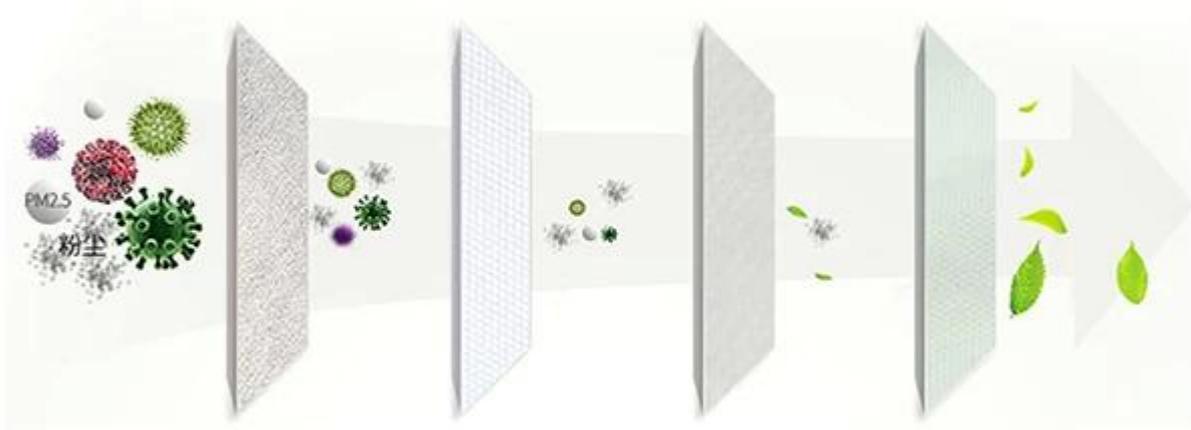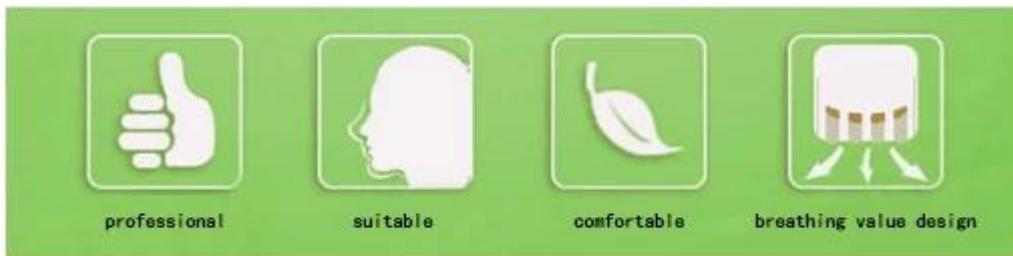

## Ambito applicabile

Le maschere possono essere utilizzate per proteggere le particelle non oleose, ridurre l'odore di alcuni composti organici.

Non solo in tempo per isolare batteri, polvere nell'aria, foschia, e può proteggere meglio le vie respiratorie e la pelle del viso.

Particolato non oleoso: polvere (proprietà minerale, polvere di fibre metalliche polverizzate) polline e foschia, che può essere utilizzato per proteggere l'ambiente dall'inquinamento atmosferico particolato PM 2.5.

## Non può essere adatto per:

I respiratori non producono ossigeno, non in ambiente carente di ossigeno.

warning:

Questo [respiratore](#) aiuta a proteggere contro certe particelle, l'uso improprio può causare malattie o morte.



## Passi per l'uso

Passaggio 1: selezionare il corretto [respiratore](#) dimensione che eri montata

Passaggio 2: posiziona il palmo attraverso i passanti del respiratore e copriilo sul viso.

Fase 3: posizionare il respiratore per coprire il naso e il mento.

Fase 4: Con una mano che trattiene il respiratore, utilizzare l'altra mano per posizionare la prima cinghia sulla corona della testa (sopra le orecchie), quindi posizionare la seconda cinghia sul retro del collo.

Step 5: Usando due dita di entrambe le mani, premi verso il basso il pezzo di metallo in base al contorno del tuo ponte nasale. (NON PIEGARE MAI IL PEZZO DI METALLO!)

Passaggio 6: con entrambe le mani sul respiratore, espirare con forza per verificare la presenza di perdite intorno ad esso.

Passo 7: La perdita è evidente quando i tuoi capelli si muovono durante la forte espirazione. Se si indossano gli occhiali, l'appannamento degli occhiali indica una perdita.

Passo 8: Se si nota una perdita d'aria, regolare il respiratore, le cinghie e il nasello prima di eseguire nuovamente il test.

