

Termometro fronte infrarosso per corpo, oggetti e temperatura ambiente

1 seconda misurazione



Caratteristiche

Il termometro Medexpro JT004, oltre alla sua affidabilità, accuratezza e maneggevolezza, permette una misurazione dolce e non invasiva della temperatura corporea senza toccare il paziente.

1 secondi

Misurazione veloce e delicata in soli 3 secondi.

3 in 1

Multifunzionale

Misurazione della fronte, oggetti e temperatura ambiente in pochi secondi.



30 memoria dati

Memorizzazione automatica degli ultimi 30 valori di misura con data e ora.



Specifica:

Misurazione senza contatto in solo 1 sec.

Multifunzionale (corpo, oggetto e temperatura ambiente)
Luce di inseguimento-per uso facile anche alla notte

Clinicamente testato e raccomandato dai medici
Tecnologia Silent Glow™ e allarme febbre

Ampio display illuminato con data e ora
30 memoria dati (memorizzata con data/ora)

Controllo del suono (on/off)
Facoltativo: custodia o borsa di stoccaggio

Mod. No.: NC 150

Dimensioni: 141,1 x 43,3 x 36,9 mm

Peso: 90g (con batteria), 67g (batteria di w/o)

Campo di misura: 0-100,0 ° c


Precisione di misura: $\pm 0,2$ ° c tra 36,0 e 39,0 ° c

Batteria: 2 batterie alcaline di x 1,5 V, formato AAA

Istruzioni d'uso:

Passo 1:

È possibile premere il pulsante Mode per attivare la modalità tra modalità fronte e modalità oggetto. Premere il pulsante di accensione o il pulsante di avvio, dopo aver visualizzato di schermo intero, il termometro è ora pronto per una nuova misurazione. Se c'è un'anomalia, il ER1 o ER2 appare.

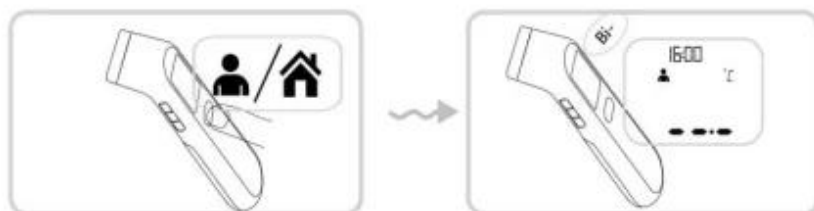

Fase 2:

L'arteria temporale è collegata al cuore tramite l'arteria carotica. Così è progettato per misurare la superficie della pelle intorno all'arteria temporale, un'arteria importante della testa. Puntare il termometro al centro della fronte con una distanza da 2 a 3 cm e quindi premere il pulsante di avvio. Nota: non rimuovere il termometro dalla fronte prima di udire il bip finale.



Fase 3:

Leggere la temperatura sul display.

1. se la temperatura di lettura è inferiore a 37,8 °C (100,0 °F), una faccia felice sarà visualizzato accanto alla lettura.
2. se la temperatura di lettura è 37,8 °C (100,0 °F) o superiore, una brutta faccia sarà visualizzato accanto alla lettura.



Fase 4:

Per prolungare la durata della batteria, premere il pulsante Power per spegnere l'unità dopo aver completato il test. Se non viene intrapresa alcuna azione, l'unità si spegne automaticamente dopo circa 1 minuto.

Conservare il termometro nella sua custodia protettiva.