

Design perfetto in Cina VT103 collo Mask fornitore

- Design forma unica permette basso profilo e buona misura
- Maggiore comfort grazie al ponte nasale facilmente regolabile
- Alta densità e alta maschera di degradazione per PM 2.5




Caratteristiche

Disegno stereo del corpo umano di ingegneria 3D

Tessuto non tessuto multistrato e Meltblown, totale 4 strati

Forma della stretta della cinghia di alluminio

# 4 layers protection

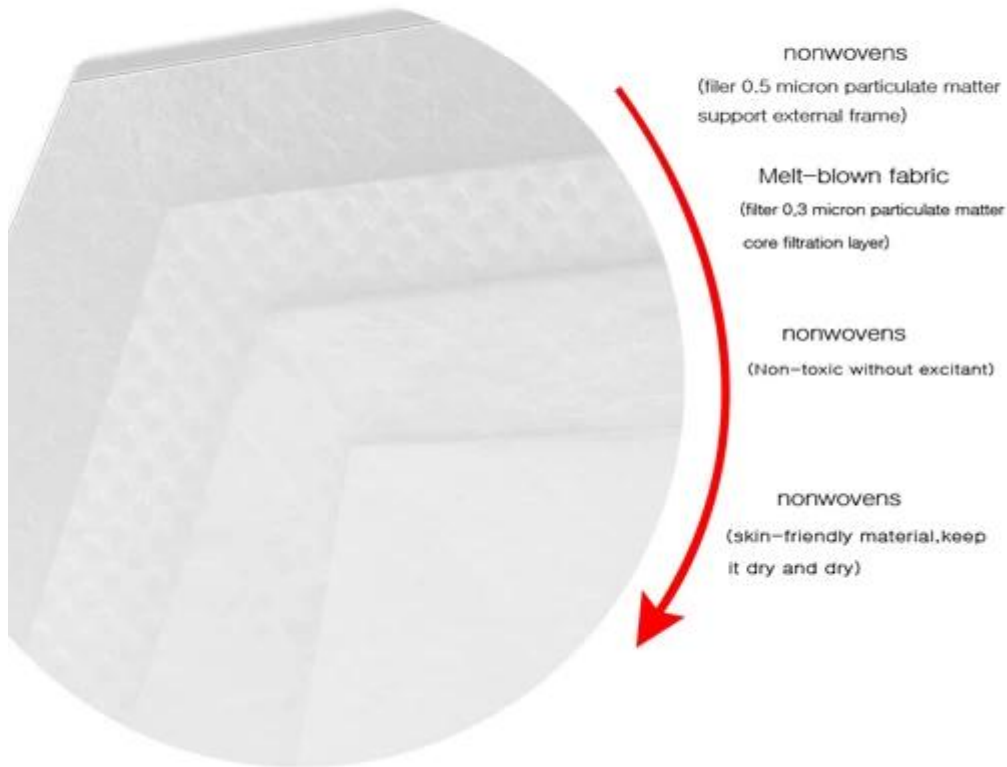

## Utilizzare limitazioni e avvisi

1. l'indossatore deve prima essere addestrato nel corretto uso e Fit testato prima di utilizzare questo respirator.
2. do non utilizzare questo respiratore quando le concentrazioni di contaminanti sono immediatamente pericolose per la vita o la salute.
3. lasciare immediatamente l'area contaminata se la respirazione diventa difficoltosa, o si verificano vertigini o altri disagi.
4. scartare e sostituire il respiratore se diventa danneggiato o la resistenza respiratoria diventa eccessiva.
5. Ispezionare il respiratore prima di ogni uso per assicurarsi che sia in buone condizioni di lavoro condition. Esaminare tutte le parti respiratorie per i segni di danneggiamento, comprese le due cinghie, Noseclip e graffette.
6. do non alterare, lavare, abusare o abusare di questo respiratore.
7. do non utilizzare con barbe o altri peli facciali o altre condizioni che impediscono una buona tenuta tra il viso e il bordo di tenuta del respiratore.

## Avviso:

Questo respiratore aiuta a proteggere contro determinate particelle, l'abuso può provocare la malattia o la morte.

No longer do the human vacuum cleaner



#### Procedura per l'utilizzo

Eseguire l'igiene della mano prima di indossare la maschera.

Scegliere la dimensione corretta della maschera e assicurarsi che non vi siano difetti.

1. tenere il VT103 nel vostro palmo con il revolver a portata di mano, appendere le cinghie dell'orecchio liberamente sotto le mani.

2. Posizionare il 103V sotto il mento con il portaobiettivi.

Tenendo il VT103 in posizione, tirare le due cinghie su ogni orecchio.

3. e poi tirare il cerchio su un altro cinturino, farlo in posizione sul collo.

4. se avete capelli lunghi, la cinghia deve essere posizionata sotto i vostri capelli.

Posizionare il VT103 basso sul naso.

5. usando entrambe le mani, stampi il revolver alla figura del vostro naso spingendo verso il basso ed esternamente.

Mentre si sposta la punta delle dita verso il basso entrambi i lati del revolver.

6. eseguire un controllo Fit mettendo entrambe le mani completamente sopra la maschera.

Fare attenzione a non disturbare la posizione ed espirare bruscamente.

Se le perdite di liquido intorno al naso, regolare il revolver come descritto al punto 5.

Se le perdite d'aria ai bordi della maschera, regolare le cinghie indietro lungo i lati della testa.

Eseguire nuovamente il controllo del fit se viene effettuata una regolazione.

Ricordo:

Indossare la maschera di dimensioni giuste

Il controllo Fit è obbligatorio per tutti gli utilizzatori della maschera VT103 e deve essere eseguito ogni volta sull'usura.

Eeguire hygieneafter mano mettendo sulla maschera.

