

Porcellana produttore 103V particolato respiratorio collo [maschera](#)

1. respiratorio ha un design migliore.
2. cinghie fisse doppie, Fascia di naso regolabile del metallo.
3. fodera interna liscia garantendo una tenuta sicura.
4. alta filtrazione e materiale elettrico statico per resistere alla normale particella di micron tossico e Ting.




Caratteristiche

Disegno stereo del corpo umano di ingegneria 3D

Tessuto non tessuto multistrato e Meltblown, totale 4 strati

Forma della stretta della cinghia di alluminio

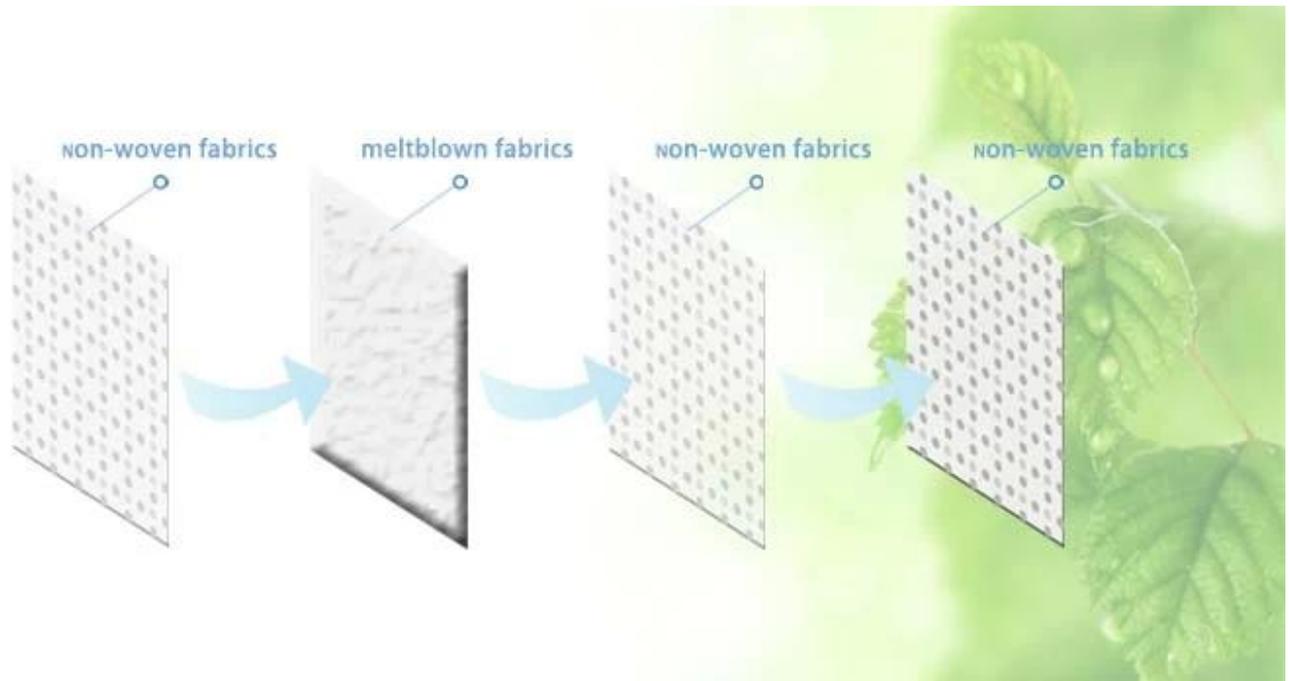

Ambito applicabile

Maschere possono essere utilizzati per proteggere le particelle non oleose, ridurre l'odore di alcuni composti organici.

Non solo in tempo per isolare i batteri, la polvere in aria, foschia, e può meglio proteggere il tratto respiratorio, e la pelle del viso.

Particolato non oleoso: polvere (proprietà minerale, polveri metalliche in fibra di polvere) polline e foschia, che può essere utilizzato per proteggere l'ambiente inquinamento atmosferico particolato fine PM 2,5.

Non può essere adatto per:

I respiratori non producono ossigeno, non in ambiente carente di ossigeno.

Avviso:

Questo respiratore aiuta a proteggere contro determinate particelle, l'abuso può provocare la malattia o la morte.



Procedura per l'utilizzo

Eseguire l'igiene della mano prima di [maschera](#).

Scegliere la dimensione corretta della maschera e assicurarsi che non vi siano difetti.

1. tenere il 103V nel vostro palmo con il revolver a portata di mano, appendere le cinghie dell'orecchio liberamente sotto le mani.

2. Posizionare il 103V sotto il mento con il portaobiettivi.

Tenendo il 103V in posizione, tirare le due cinghie su ogni orecchio.

3. e poi tirare il cerchio su un altro cinturino, farlo in posizione sul collo.

4. se avete capelli lunghi, la cinghia deve essere posizionata sotto i vostri capelli.

Posizionare il 103V basso sul naso.

5. usando entrambe le mani, stampi il revolver alla figura del vostro naso spingendo verso il basso ed esternamente.

Mentre si sposta la punta delle dita verso il basso entrambi i lati del revolver.

6. eseguire un controllo Fit mettendo entrambe le mani completamente sopra la maschera.

Fare attenzione a non disturbare la posizione ed espirare bruscamente.

Se le perdite di liquido intorno al naso, regolare il revolver come descritto al punto 5.

Se le perdite d'aria ai bordi della maschera, regolare le cinghie indietro lungo i lati della testa.

Eseguire nuovamente il controllo del fit se viene effettuata una regolazione.

Ricordo:

Indossare la giusta dimensione [maschera](#)

Il controllo Fit è obbligatorio per tutti gli utilizzatori della maschera 103V e deve essere eseguito ogni volta sull'usura.

Eseguire hygieneafter mano mettendo sulla maschera.

