

Termômetro infravermelho da testa para o corpo, os objetos & a temperatura ambiente

1 segunda medição



Características

O Medexpro JT004 termômetro, mais a sua confiabilidade, precisão e manuseio fácil, permite a medição suave e não-invasiva da temperatura corporal sem tocar o paciente.


1 segundo

Medição rápida e suave em apenas 3 segundos.

3 in 1

Multifuncional

Medição da testa, objetos e temperatura ambiente em segundos.

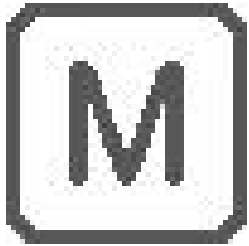

30 memória de dados

Armazenamento automático dos últimos 30 valores de medição com data e hora.



Especificação:

Medição sem toque em apenas 1 seg.

Multifuncional (corpo, objeto e temperatura ambiente)
Luz de seguimento-para o uso fácil também na noite

Clinicamente testado e recomendado pelos médicos
Silent brilho™ tecnologia e febre alarme

Grande display iluminado com data e hora
30 memória de dados (armazenado com data/hora)

Controlo de som (ligado/desligado)
Opcional: estojo de armazenamento ou saco de armazenamento

Mod. No.: NC 150

Tamanho: 141,1 x 43,3 x 36,9 mm

Peso: 90g (com bateria), 67G (bateria de w/o)

Escala de medição: 0-100,0 ° c


Exatidão da medida: $\pm 0,2$ ° c entre 36,0 e 39,0 ° c

Bateria: 2 x 1,5 V pilhas alcalinas, tamanho AAA

Instruções do usuário:

Passo 1:

Você pode pressionar o botão Mode para alternar o modo entre o modo de testa e o modo de objeto. Pressione o botão de alimentação ou o botão Iniciar, depois de mostrar a tela cheia, o termômetro está agora pronto para uma nova medição. Se houver um anormal, o ER1 ou Er2 aparece.

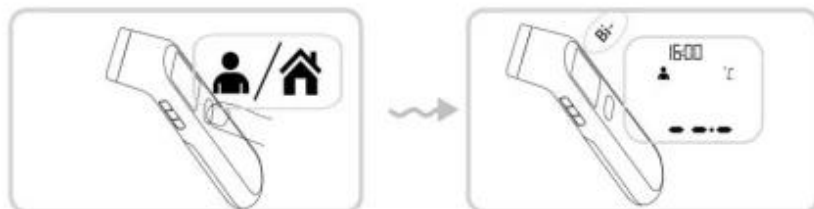

Passo 2:

A artéria temporal está ligada ao coração através da artéria carótida. Assim, ele é projetado para medir a superfície da pele em torno da artéria temporal, uma artéria principal da cabeça. Aponte o termómetro no centro da testa com uma distância de 2 a 3 cm e, em seguida, prima o botão Start. Nota: não retire o termómetro da testa antes de ouvir o bip final.



Passo 3:

Leia a temperatura no display.

1. se a leitura da temperatura está abaixo de 37,8 °C (100,0 °F), um rosto feliz será exibido ao lado da leitura.
2. se a leitura de temperatura é 37,8 °C (100,0 °F) ou acima, um rosto ruim será exibido ao lado da leitura.



Passo 4:

Para prolongar a vida útil da bateria, pressione o botão Power para desligar a unidade após a conclusão do teste. Se nenhuma ação for tomada, a unidade será desligada automaticamente após cerca de 1 minuto. Guarde o termómetro no estojo de protecção.