

Características:

Jumbo LCD

Exatidão:  $\pm 0.05$  °C ( $\pm 0.1$  °F)

Alarme da febre

Última memória de leitura

Ponta rígida

Baixo indicador da bateria

Automático desligado

Projetado para uso oral




Instruções do usuário:

1. Pressione o botão on/off ao lado do display LCD. Um tom soará como a tela mostra, seguido pela última temperatura da memória.

Após ter mostrado a temperatura do Self-Test, o termômetro está agora no modo de teste.

\* Nota: se a temperatura medida for inferior a 32 °C ou 90 °F, o LCD indicará lo, se a temperatura medida for superior a 42,9 °C ou 109,9 °F, o LCD mostrará Oi.

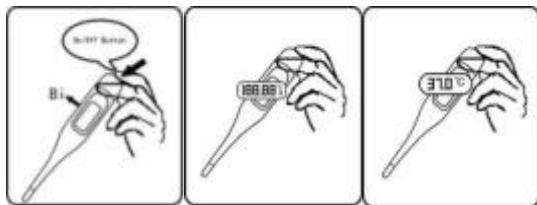


## 2. Posicione o termômetro no local desejado (boca)

a) uso oral: Coloque o termómetro a língua como indicado pela posição √. Feche a boca e respire uniformemente através do nariz para evitar que a medição seja influenciada pelo ar inalado/exalado. Temperatura normal entre 35,7 °C e 37,3 °C (96,3 °F e 99,1 °F)

## 3.

O sinal de grau pisca durante todo o processo de teste. Quando o piscamento pára um alarme apita durante aproximadamente 10 segundos. A leitura medida aparecerá no LCD simultaneamente. O tempo mínimo de medição até que o sinal sonoro (bip) tenha de ser mantido sem excepção. A medição continua mesmo após a notificação do buzzer. A temperatura exibida não será alterada quando o termómetro for removido da posição de teste.

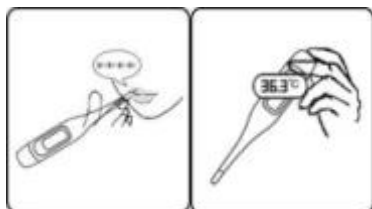

## 4.

Para prolongar a vida útil da bateria, pressione o botão on/off para desligar a unidade após o teste estar completo. Se nenhuma ação for tomada, a unidade será desligada automaticamente após around 10 minutos.

Guarde o termómetro no estojo de protecção.

