

Projeto perfeito em China VT103 máscara de pescoço fabricante

- O projeto original da forma permite o baixo perfil e o bom ajuste
- Conforto melhorado devido à ponte de nariz facilmente ajustável
- Máscara de alta densidade e degradação para o PM 2.5




Características

Engenharia de corpo humano 3D Design estéreo

Tecido não tecido multicamado e Meltblown, total 4 camadas

Forma da preensão da correia de alumínio

4 layers protection

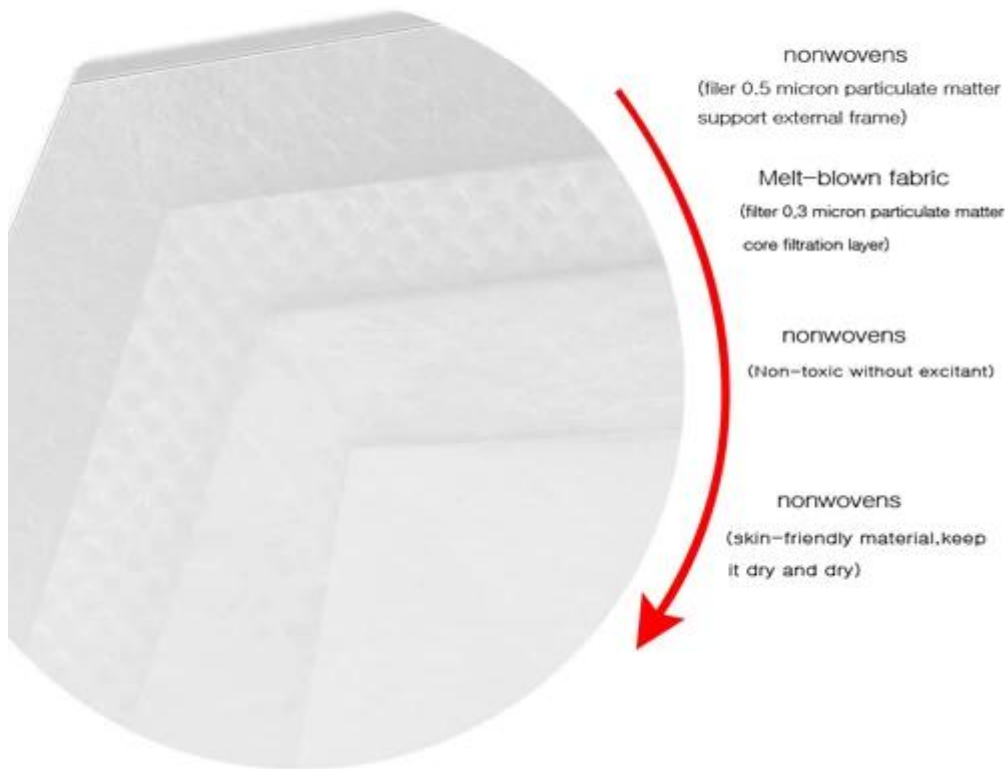

Use limitações e avisos

1. o utente deve primeiro ser treinado no uso adequado e encaixar testado antes de utilizar este respirator.
2. do não usar este respirador quando as concentrações de contaminantes são imediatamente perigosas para a vida ou a saúde.
3. deixe a área contaminada imediatamente se a respiração se torna difícil, ou tonturas ou outras angústias ocorre.
4. descarte e substitua o respirador se ficar danificado ou a resistência respiratória se torna excessiva.
5. Inspeccione o respirador antes de cada utilização para garantir que está em bom funcionamento. Examine todas as peças do respirador para sinais de dano, incluindo as duas correias, noseclip e grampos.
6. do não alteram, lavam, abusam ou abusam deste respirador.
7. do não use com barbas ou outros pêlos faciais ou outras condições que impeçam uma boa vedação entre a face e a aresta de vedação do respirador.

Aviso:

Este respirador ajuda a proteger contra certas partículas, o uso indevido pode resultar em doença ou morte.

No longer do the human vacuum cleaner



dust



Automobile exhaust



fire disaster



Fossil fuels

Etapas para o uso

Executar a higiene da mão antes de colocar a máscara.

Escolha o tamanho correto da máscara e certifique-se de que não há defeitos.

1. Segure o VT103 em sua palma com o nasal na ponta dos dedos, pendure as correias da orelha livremente abaixo da mão.

2. Posicione o 103v seu queixo com o nasal acima.

Ao prender o VT103 no lugar, puxe as duas cintas sobre cada orelha.

3. e, em seguida, puxe o aro para outra cinta, fazê-lo no lugar no pescoço.

4. se você tem o cabelo longo, a cinta deve ser posicionada abaixo de seu cabelo.

Posicione o VT103 baixo em seu nariz.

5. usando ambas as mãos, molde o nasal à forma de seu nariz empurrando para baixo e para fora.

Ao mover suas pontas dos dedos para baixo ambos os lados do nasal.

6. realize uma verificação de ajuste colocando ambas as mãos completamente sobre a máscara.

Tenha cuidado para não perturbar a posição e expire bruscamente.

Se os vazamentos de água em torno de seu nariz, ajustar o nasal como descrito na etapa 5.

Se o ar vazar nas bordas da máscara, ajuste as correias para trás ao longo dos lados de sua cabeça.

Executar verificação de ajuste novamente se um ajuste for feito.

-:

Use a máscara de tamanho certo

A verificação do ajuste é obrigatória para todos os usuários da máscara do VT103 e deve ser executada cada vez em cima do desgaste.

Executar a mão hygieneafter colocar a máscara.

