

Новая проектная Горячая продажа 102 маска головки в Китае.

Маска трехмерного дизайна в соответствии с контуром лица, избегайте трения с носом и ртом. Клип с любыми фигурами в носу-это усиление маски. Эффективный импортный материал фильтра значительно повышает эффект защиты. Приспособление для защиты дыхательных путей для частиц, например, пыль, минеральный порошок, не может использоваться для защиты от вредного газа.




Функции:

Проектирование

Многослойная ткань и мелтбловн, всего 4 слоя

Форма удержания алюминиевого ремня

# 4 layers protection

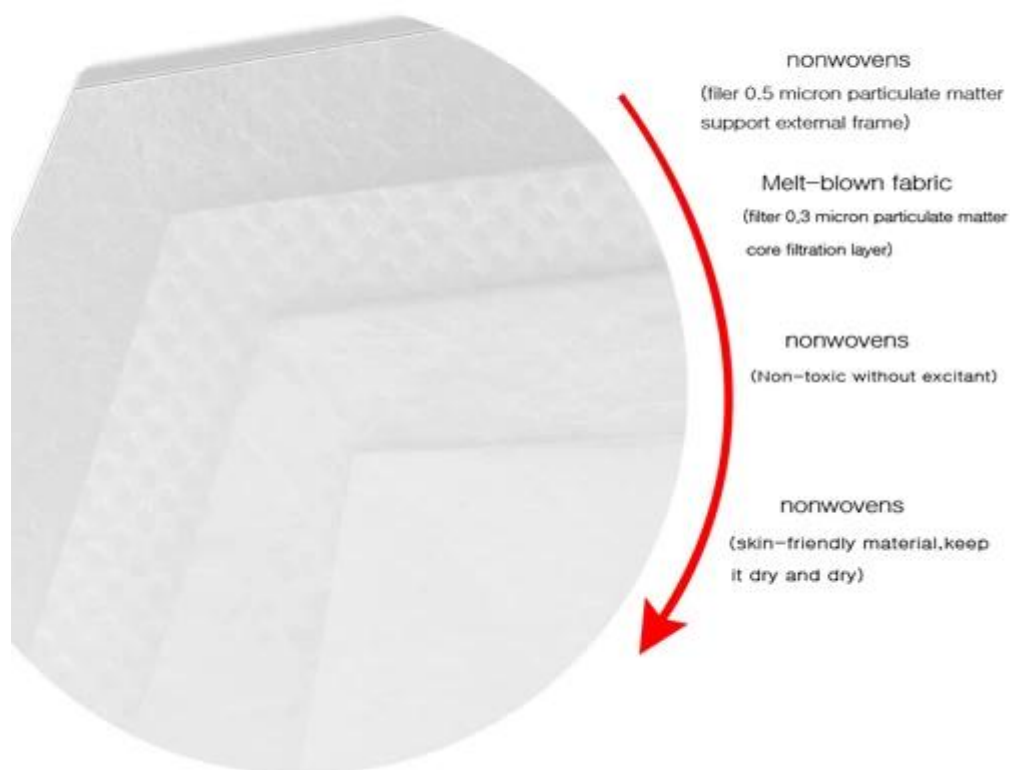

## Применимая область

Маски можно использовать для защиты нелегких частиц, уменьшая запах некоторых органических соединений.

Не только вовремя изолировать бактерии, пыль в воздухе, дымку и лучше защитить дыхательные тракты и кожу лицевой стороны.

Не маслянистые частицы: пыль (минеральная собственность, металлическая пыльная волокно) пыльца и дымка, которые могут использоваться для защиты окружающей среды тонкодисперсных частицы ТЧ 2,5.

Не подходит для:

Респираторы не производят кислород, а не в условиях дефицита кислорода.

Варининг:

Этот респиратор помогает защититься от определенных частиц, неправомерное использование может привести к болезни или смерти.

## Guard your family and your health

Prevention of UV rays    Cool and comfortable

Suitable for a variety of occasions



### Действия по использованию

Шаг 1: выберите правильный размер респираторного аппарата.

Шаг 2: Поместите ладонь через петли респиратора и выпьем по вашему лицу.

Шаг 3: Поместите респиратор, чтобы покрыть нос и подбородок.


Шаг 4: с одной рукой, держащей респиратор, используйте другую руку для размещения первой лямки на гребне головы (над ушами), а затем поместите вторую лямку на спину шеи.

Шаг 5: используя два пальца обеих рук, нажимайте металлическую деталь в соответствии с контуром моста носа. (никогда не зажмите металлическую деталь!)

Шаг 6: с помощью обеих рук в аппарате респираторного дыхания твердо выдохните, чтобы проверить наличие утечки вокруг него.

Шаг 7: утечка очевидно, когда ваши волосы перемещаются во время сильного выдохнуть. Если надеть очки, то туманность очков указывает на утечку.

Шаг 8: Если отмечается утечка воздуха, то перед повторным испытанием Отрегулируйте респиратор, ремни и кусок носа.

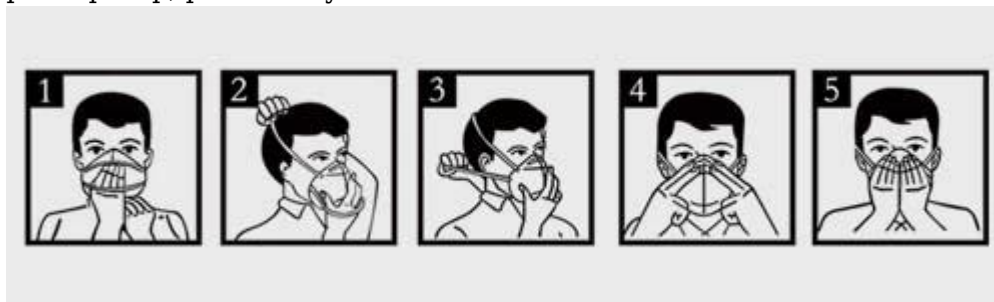

### Чтобы удалить аппарат искусственного дыхания:

Шаг 1: с обеих рук, медленно поднимите нижнюю лямку вокруг шеи и над головой.

Шаг 2: Поднимите верхнюю лямку. Не трогай аппарат искусственного дыхания.