


Анти-полутсион голова [Маск](#) Вт102 с респираторной маской.

- Уникальная конструкция формы позволяет проделать недостаточное профиле и хорошую посадки.
- Повышение удобства в связи с легко регулируемым мостом носа
- Высокая плотность и высокая деградация [Маск](#) для ТЧ2, 5



Основные функции

- Уникальная конструкция формы позволяет проделать недостаточное профиле и хорошую посадки.
- Повышение удобства в связи с легко регулируемым мостом носа
- Экстра гладкая пенопластовая полоса внутри [Маск](#)
- Простота дыхания благодаря надежному носителю фильтров
- Для среды пыли и тумана
- Профессиональный микроволоконный носитель
- Материал высокого качества

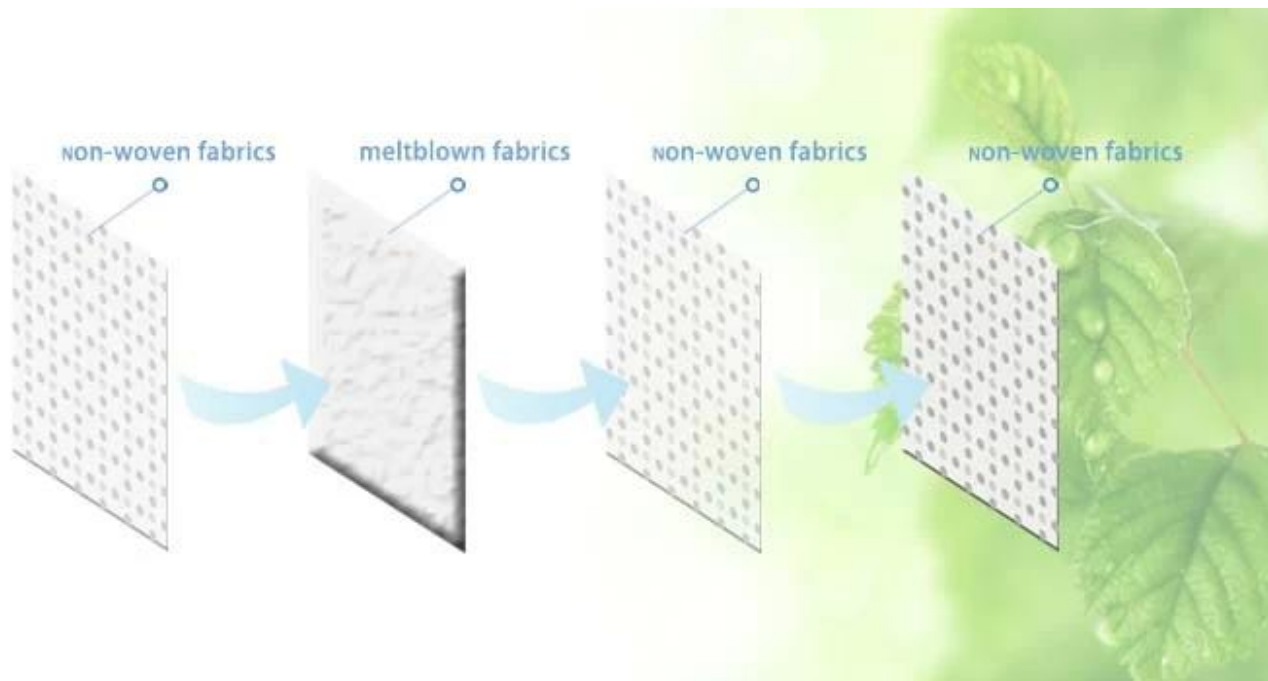

Применимая область

Маски можно использовать для защиты нелегких частиц, уменьшая запах некоторых органических соединений.

Не только вовремя изолировать бактерии, пыль в воздухе, дымку и лучше защитить дыхательные тракты и кожу лицевой стороны.

Не маслянистые частицы: пыль (минеральная собственность, металлическая пыльная волокно) пыльца и дымка, которые могут использоваться для защиты окружающей среды тонкодисперсных частицы ТЧ 2,5.

Не подходит для:

Респираторы не производят кислород, а не в условиях дефицита кислорода.

Варинг:

Этот респиратор помогает защититься от определенных частиц, неправомерное использование может привести к болезни или смерти.



Действия по использованию

Шаг 1: выберите правильный размер респираторного аппарата.

Шаг 2: Поместите ладонь через петли респиратора и выпьем по вашему лицу.

Шаг 3: Поместите респиратор, чтобы покрыть нос и подбородок.

Шаг 4: с одной рукой, держащей респиратор, используйте другую руку для размещения первой лямки на гребне головы (над ушами), а затем поместите вторую лямку на спину шеи.

Шаг 5: используя два пальца обеих рук, нажимайте металлическую деталь в соответствии с контуром моста носа. (никогда не зажмите металлическую деталь!)

Шаг 6: с помощью обеих рук в аппарате респираторного дыхания твердо выдохните, чтобы проверить наличие утечки вокруг него.

Шаг 7: утечка очевидна, когда ваши волосы перемещаются во время сильного выдохнуть. Если надеть очки, то туманность очков указывает на утечку.

Шаг 8: Если отмечается утечка воздуха, то перед повторным испытанием Отрегулируйте респиратор, ремни и кусок носа.



Чтобы удалить аппарат искусственного дыхания:

Шаг 1: с обеих рук, медленно поднимите нижнюю лямку вокруг шеи и над головой.

Шаг 2: Поднимите верхнюю лямку. Не трогай аппарат искусственного дыхания.